


Neobiotech

Founded in 2000, Neobiotech is a dedicated dental medical device company specializing in the production and distribution of high-quality implant products.

Through innovative product development, we have played a key role in making implants more accessible and widely accepted in the dental field. With a commitment to advanced technology, superior product quality, and customer-focused service, Neobiotech continues to evolve as a trusted implant specialist.

NEOBIOTECH

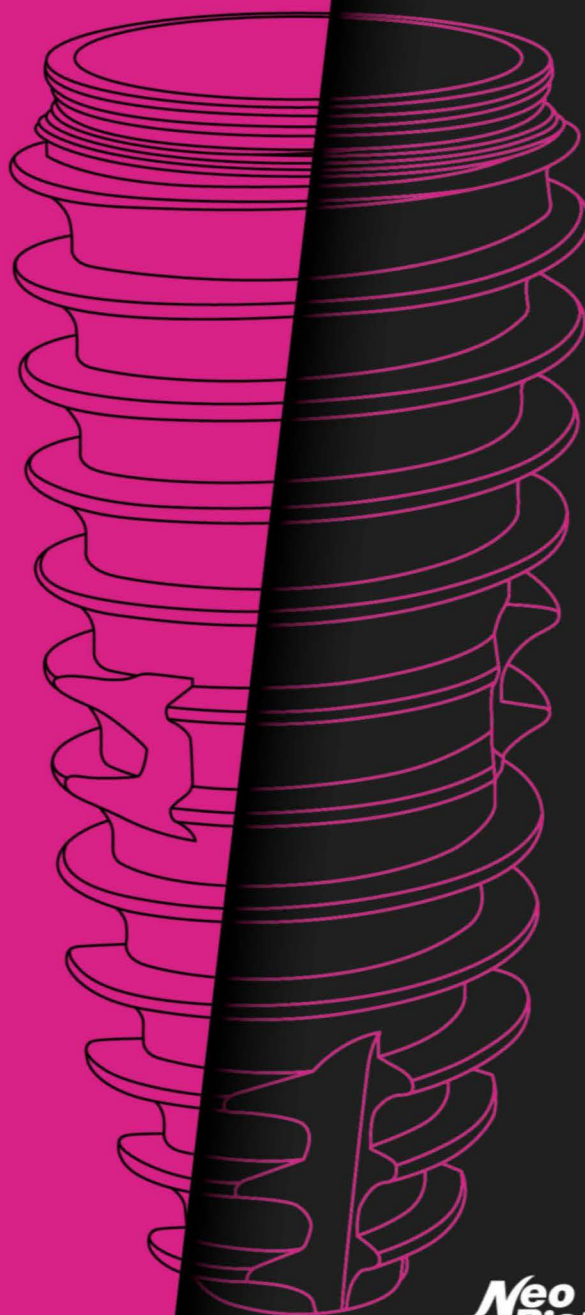

**Neo
Biotech**
Satisfaction to Dentists

NeoBiotech IMPLANT SYSTEM

ВВЕДЕНИЕ

Предоставление лучших продуктов и услуг имплантологам по всему миру.

Как ведущий производитель комплексных решений в области имплантологии, реставрационной и цифровой стоматологии, Neobiotech находится на передовой стоматологических инноваций с момента своего основания в 2000 году. Наша приверженность совершенству побуждает нас постоянно исследовать новые и улучшенные методы в имплантологии.

Руководствуясь нашими основополагающими принципами «Просто, Безопасно, Быстро» (3S), мы стремимся к тому, чтобы наши решения приносили пользу как врачам, так и пациентам. Сегодня продукты, услуги и образовательные программы Neobiotech доступны примерно в 70 странах через наши дочерние компании и глобальную сеть дистрибьюторов.

В Neobiotech мы считаем, что дизайн имплантатов должен основываться на четко определенных хирургических протоколах. В 2007 году мы представили имплантат CMI (Sinus Quick), инновационное решение, разработанное для оптимальной первичной фиксации в костной ткани верхней и нижней челюсти, что ознаменовало переход от традиционного прямого типа тела к коническому. Этот прорыв в дизайне имплантатов, включающий функции «CMI фиксация» и «Anytime loading».

В том же году мы запустили нашу революционную систему GBR (Направленная костная регенерация), разработанную благодаря обширному хирургическому опыту нашего генерального директора, доктора Янг-ку Хео. Это новшество позволило сделать процедуры GBR более безопасными, быстрыми и эффективными. Кроме того, в 2008 году мы представили наборы Sinus Crestal Approach (SCA) и Sinus Lateral Approach (SLA), которые быстро получили признание во всем мире благодаря их влиянию на синус-имплантацию.

В 2009 году Neobiotech выпустила набор FR Kit (Fixture Remover Kit), а в 2010 году — набор SR Kit (Screw Remover Kit). Эти инновации заложили основу для продвинутой серии хирургических решений, включающей наборы SCA, SLA, FR и SR. В 2011 году мы расширили наши решения GBR, представив новый набор GBR, CTi-mem (Индивидуализированная титановая мембрана) и ACM (Autochip Maker).

Осознавая преобразующую роль цифровой стоматологии, Neobiotech установила стратегические партнерские отношения с ведущими мировыми производителями цифровых решений, включая внутриротовые сканеры, 3D-принтеры, фрезерные станки и CAD-программы. По мере развития цифровой стоматологии мы продолжаем предоставлять решения, отвечающие конкретным потребностям врачей. В 2017 году мы представили AnyCheck — компактное устройство для оценки подвижности кости во время установки формирователя десны. В 2019 году мы запустили OSTEO ACTIVE, первый в мире активатор гидрофильности плазмы для имплантатов, и VAROGuide — передовую систему цифровых шаблонов, известную своей простотой и точностью.

Глядя в будущее, Neobiotech остается непоколебимой в своей миссии лидировать в инновациях и формировать будущее цифровой стоматологии. Следуя принципам «Просто, Безопасно, Быстро», мы стремимся разрабатывать решения, которые являются удобными, надежными и эффективными. Наше внимание к потребностям клиентов побуждает нас устанавливать новые стандарты в имплантологии, с неизменной целью стать самым надежным именем в отрасли.)

Chairman of Neobiotech
Young-ku Heo



Линейка продукта

Поздравляем! Вы сделали верный выбор! Добро пожаловать в семью Neobiotech

Implant System			
			
IS System	Neo Master Kit	S-Wide Kit	Prosthetic Kit
			
IT System	IS Full Kit	S-Narrow Kit	Ridge Wider Kit
			
	Neo Surgical Kit		Accessory Kit
			
	StopDrill Kit		

Sinus Lift Solution	Repair Solution	GBR Solution	Guide System
			
SCA Kit (Sinus Crestal Approach Kit)	FR Kit (Fixture Remover Kit)	ACM (Auto Chip Maker)	VAROGuide Kit
			
SLA Kit (Sinus Lateral Approach Kit)	SR Kit (Screw Remover Kit)		VAROGuide Mini Kit
			
SinusAll Kit			VAROGuide Sinus kit
			
			Neo NaviGuide Kit
			
			Neo NaviGuide Narrow Kit


NeoBiotech

IS IMPLANT SYSTEM



IS-III active / IS-III active S-Narrow / IS-III active S-Wide / IS-II active / IS-II active S-Wide

Содержание


IS-III active	7-8
Имплантат IS-III active	9-10
IS-II active	11-12
Имплантат IS-II active (S.L.A.-поверхность)	13-14
Формирователь десны	15-16
Компоненты для снятия слепка с уровня имплантата	17-19
Временный абатмент	20
Схема протезирования (ортопедический протокол)	21-24
Двойной абатмент (с шестигранником)	25
Двойной абатмент (без шестигранника)	26
Фрезеруемый абатмент	27
Приливаемый индивидуальный абатмент (кобальт-хром)	28
Индивидуальный пластиковый абатмент	28
Угловой абатмент	29-30
Титановый блок, титановый цилиндр	31-32
Монолитный абатмент (комбинированный)	33
SCRП Multi абатмент	34
Компоненты для снятия слепка с уровня абатмента	35-36
IS PickCap Impression Coping	37
Multi unit абатмент	38-40
Шариковый абатмент	41-42
АСМ - Autobone Chip Maker - Фреза для забора аутокости	43

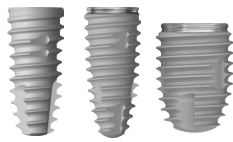


IS-III active

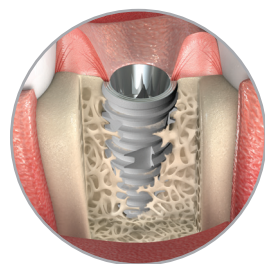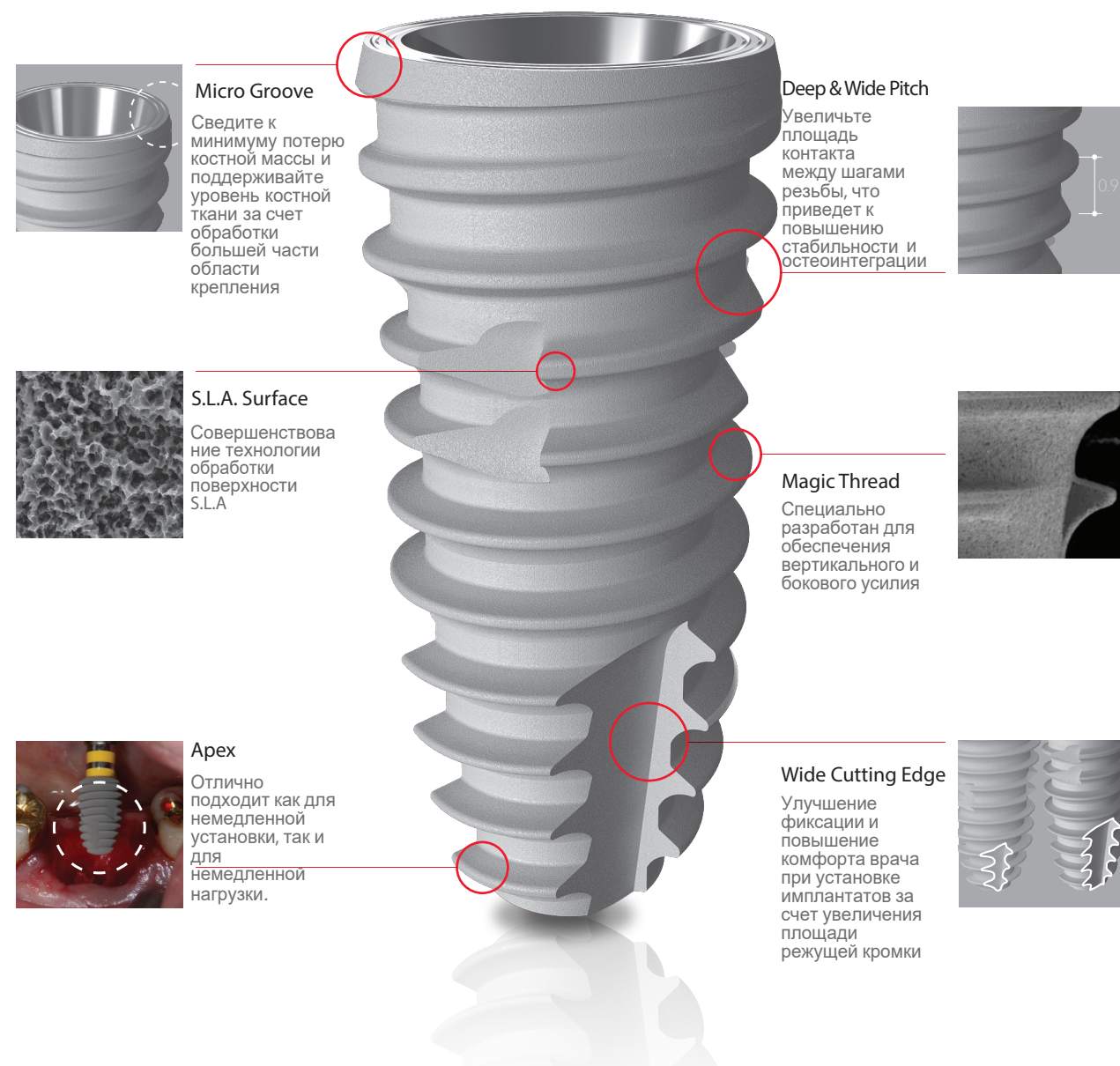

Остеокондуктивная поверхность имплантата (S.L.A.)
Конструкция с кристаллической микрорезьбой
Самоуплотняющаяся вершина
Мощная глубокая резьба
Конструкция с микроканавками
Коническое уплотнение 11°

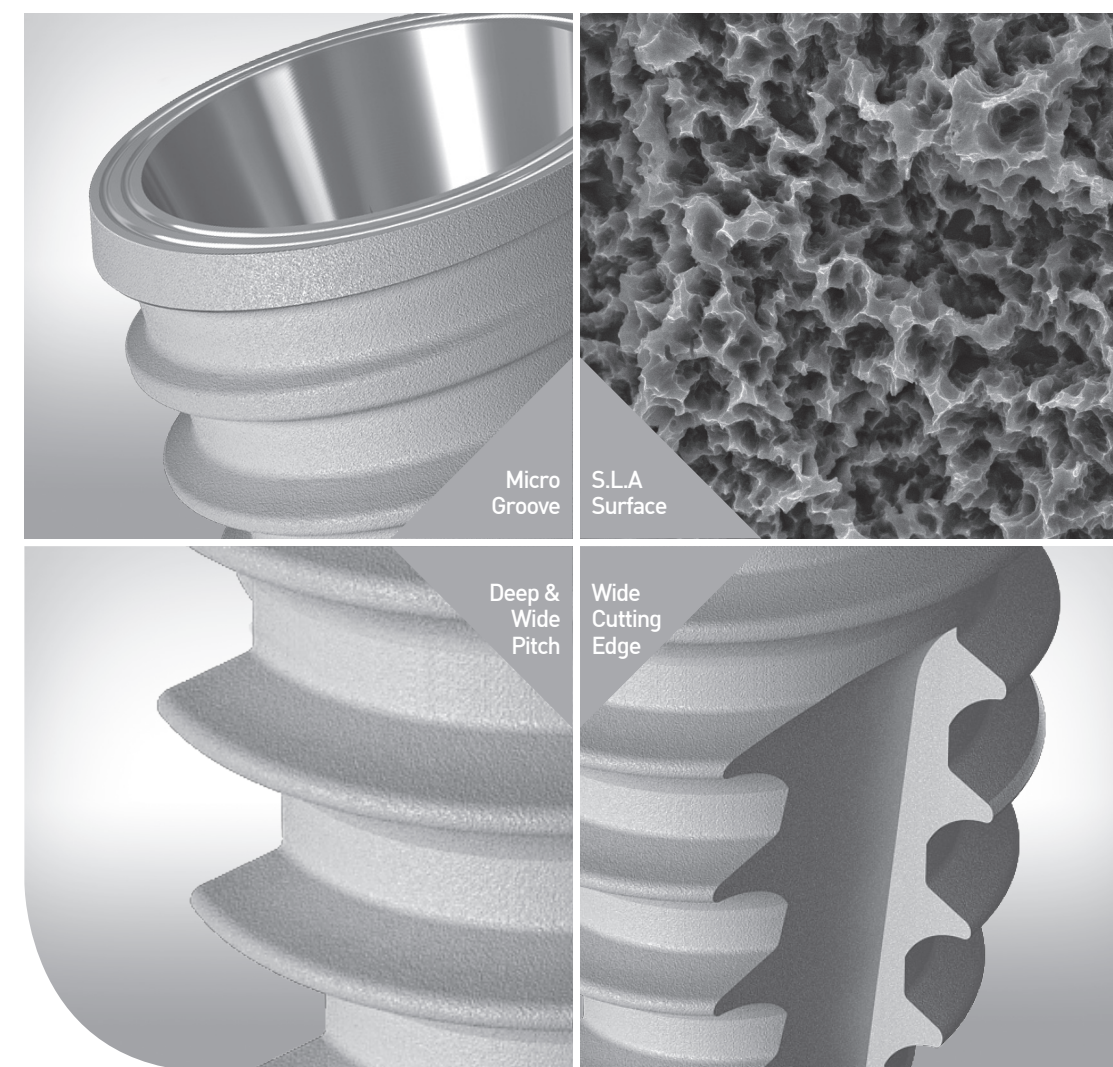

Клинический случай

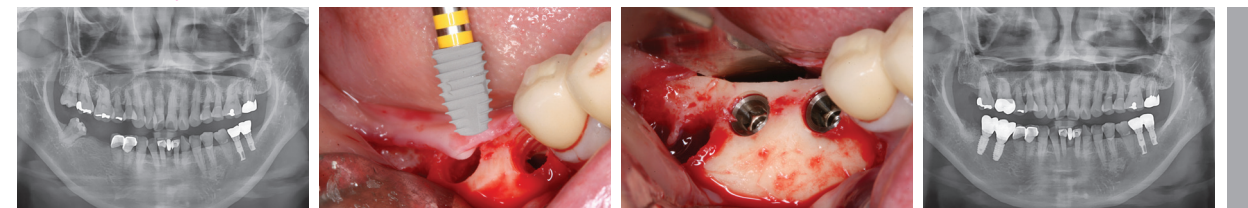


IS-III active Fixture(S.L.A. Surface)



• Узкий / Диаметр Ø 3.5

Длина (мм)	8.5	10.0	11.5	13.0
Артикул	IS33508AP	IS33510AP	IS33511AP	IS33513AP

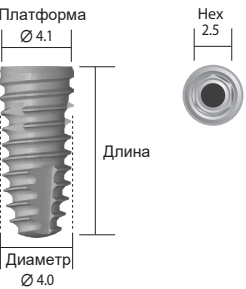

• Стандартный / Диаметр Ø 4.0

Длина (мм)	7.3	8.5	10.0	11.5	13.0
Артикул	IS34007AP	IS34008AP	IS34010AP	IS34011AP	IS34013AP



• Стандартный / Диаметр Ø 4.5

Длина (мм)	7.3	8.5	10.0	11.5	13.0
Артикул	IS34507AP	IS34508AP	IS34510AP	IS34511AP	IS34513AP



• Широкий / Диаметр Ø 5.0

Длина (мм)	6.6	7.3	8.5	10.0	11.5	13.0
Артикул	IS35006AP	IS35007AP	IS35008AP	IS35010AP	IS35011AP	IS35013AP

IS-III active Fixture(S.L.A. Surface)



• S-Wide / Диаметр Ø 5.5

Длина (мм)	6.6	7.3	8.5	10.0	11.5	13.0
Артикул	IS35506AP	IS35507AP	IS35508AP	IS35510AP	IS35511AP	IS35513AP




• S-Wide / Диаметр Ø 6.0


Длина (мм)	6.6	7.3	8.5	10.0	11.5	13.0
Артикул	IS36006AP	IS36007AP	IS36008AP	IS36010AP	IS36011AP	IS36013AP

Винт-заглушка



Узкий

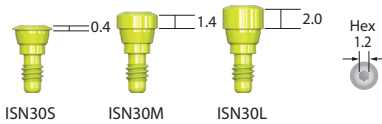

Стандартный / Широкий / S-Wide

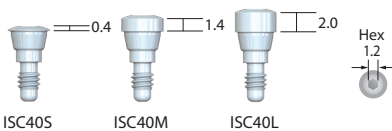

IS-II active

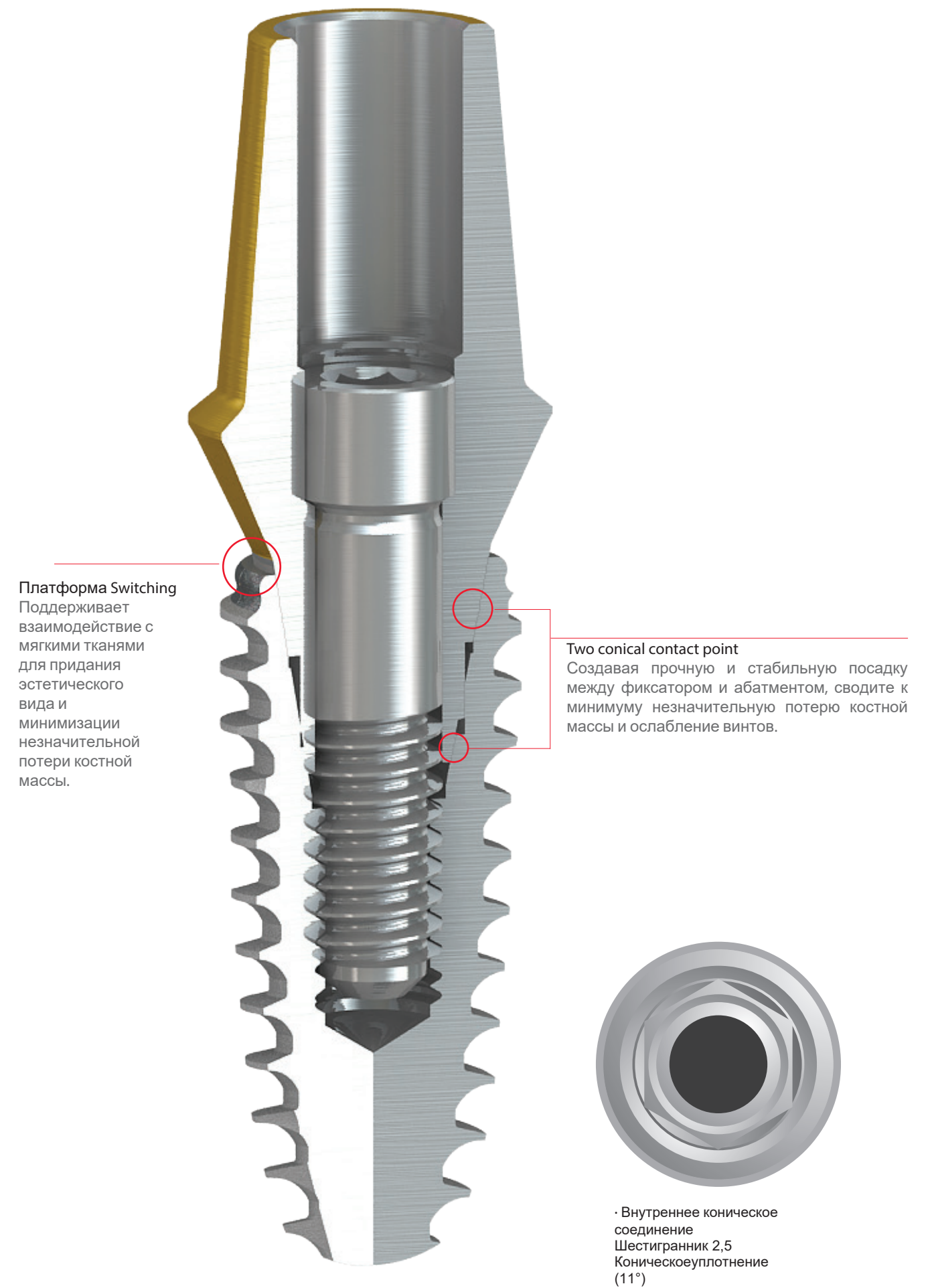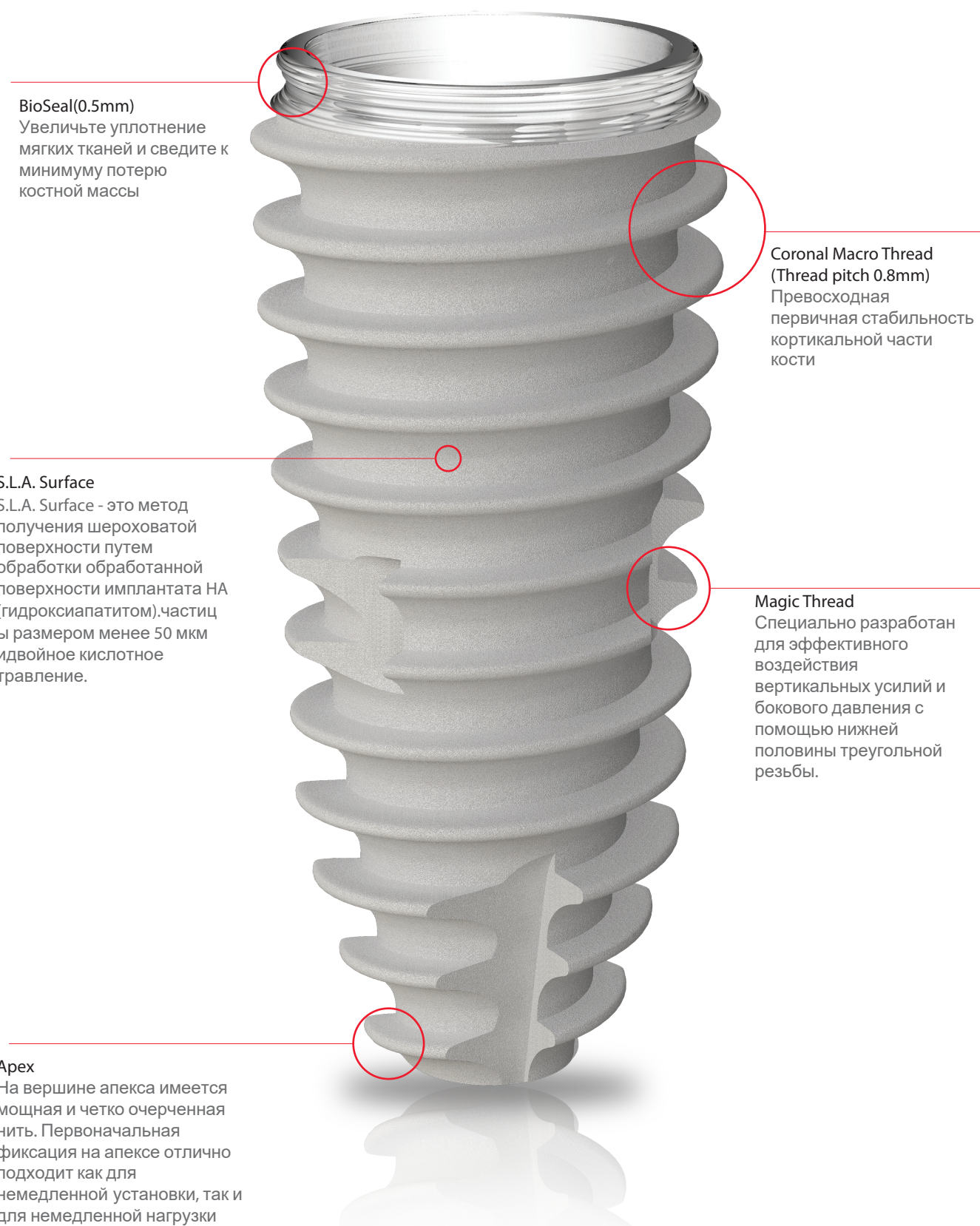

IS-II active Fixture(S.L.A. Surface)



• Узкий / Диаметр Ø 3.5

Длина (мм)	8.5	10.0	11.5	13.0
Артикул	BIS3508A	BIS3510A	BIS3511A	BIS3513A




• Стандартный / Диаметр Ø 4.0

Длина (мм)	7.3	8.5	10.0	11.5	13.0
Артикул	BIS4007A	BIS4008A	BIS4010A	BIS4011A	BIS4013A



• Стандартный / Диаметр Ø 4.5

Длина (мм)	7.3	8.5	10.0	11.5	13.0
Артикул	BIS4507A	BIS4508A	BIS4510A	BIS4511A	BIS4513A

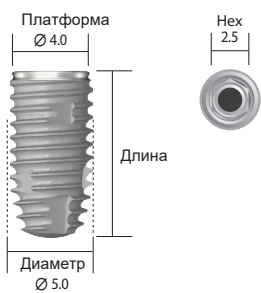

• Широкий / Диаметр Ø 5.0

Длина (мм)	7.3	7.3	7.3	8.5	10.0	11.5	13.0
Артикул	BIS5005A	BIS5006A	BIS5007A	BIS5008A	BIS5010A	BIS5011A	BIS5013A

※ All measurements can be different with the actual size

IS-II active Fixture(S.L.A. Surface)



S-Wide / Диаметр Ø 5.5

Длина (мм)	7.3	7.3	7.3	8.5	10.0	11.5	13.0
Артикул	BIS5505A	BIS5506A	BIS5507A	BIS5508A	BIS5510A	BIS5511A	BIS5513A



S-Wide / Диаметр Ø 6.0


Длина (мм)	7.3	8.5	10.0	11.5	13.0
Артикул	BIS6007A	BIS6008A	BIS6010A	BIS6011A	BIS6013A



S-Wide / Диаметр Ø 7.0

Длина (мм)	7.3	8.5	10.0	11.5	13.0
Артикул	BIS7007A	BIS7008A	BIS7010A	BIS7011A	BIS7013A

Винт-заглушка

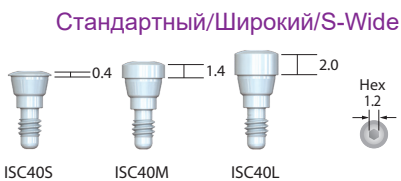

IS Формирователь десны

Формирует оптимальный профиль прорезывания мягких тканей

•Рекомендуемая сила затягивания: 8~10 Ncm



• Диаметр 4.0

Высота (мм)	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
Артикул	ISUH4002	ISUH4003	ISUH4004	ISUH4005	ISUH4006



• Диаметр 4.5

Высота (мм)	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
Артикул	ISUH4502	ISUH4503	ISUH4504	ISUH4505	ISUH4506



• Диаметр 4.8

Высота (мм)	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
Артикул	ISH402	ISH403	ISH404	ISH405	ISH406	ISH407



• Диаметр 5.5

Высота (мм)	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
Артикул	ISH502	ISH503	ISH504	ISH505	ISH506	ISH507

IS Формирователь десны



• Диаметр 6.0

Высота (мм)	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
Артикул	ISH602	ISH603	ISH604	ISH605	ISH606	ISH607




• Диаметр 6.8

Высота (мм)	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
Артикул	ISH702	ISH703	ISH704	ISH705	ISH706	ISH707



• Диаметр 8.0

Высота (мм)	2.0	3.0	4.0
Артикул	ISH802	ISH803	ISH804

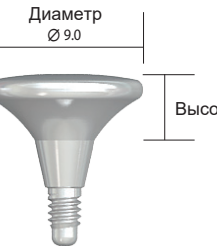

• Диаметр 9.0


Высота (мм)	2.0	3.0	4.0
Артикул	ISH902	ISH903	ISH904

Компоненты для снятия слепка с уровня имплантата

Трансфер для открытой ложки

Узкий / Стандартный / Wide / S-wide


• Диаметр Ø4.0

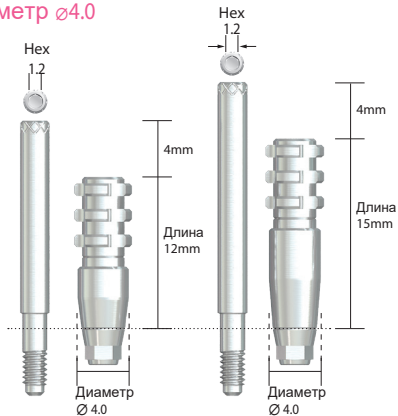

Type	Hex	SCRП*	Non-Hex
Short	ISIPH400	ISIPS400	ISIPN400
Long	ISIPHL400	ISIPSL400	ISIPNL400

* Impression coping Screw included (Short – ISPIS20, Long – ISPISL20)


• Диаметр Ø4.5

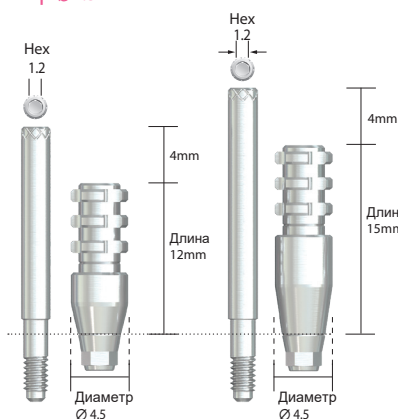

Type	Hex	SCRП*	Non-Hex
Short	ISIPH450	ISIPS450	ISIPN450
Long	ISIPHL450	ISIPSL450	ISIPNL450

* Impression coping Screw included (Short – ISPIS20, Long – ISPISL20)

• Диаметр Ø4.8

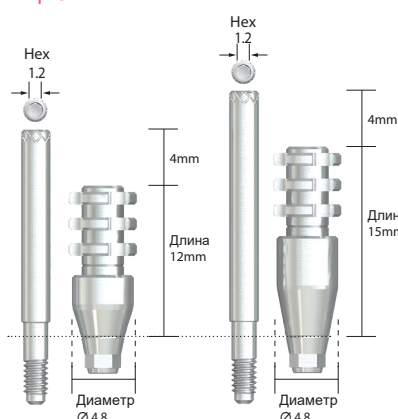

Type	Hex	SCRП*	Non-Hex
Short	ISIPH411	ISIPS411	ISIPN411
Long	ISIPHL411	ISIPSL411	ISIPNL411


* Impression coping Screw included (Short – ISPIS20, Long – ISPISL20)

Компоненты для снятия слепка с уровня имплантата

Трансфер для открытой ложки

Узкий / Стандартный / Wide / S-wide


• Диаметр Ø5.5

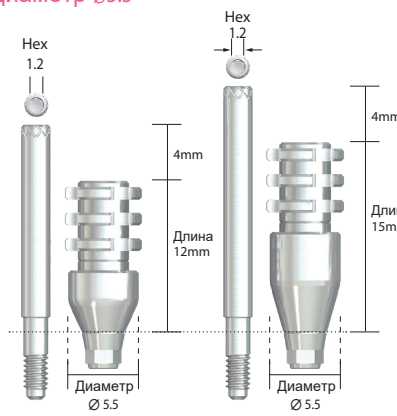

Type	Hex	SCRП*	Non-Hex
Short	ISIPH511	ISIPS511	ISIPN511
Long	ISIPHL511	ISIPSL511	ISIPNL511

* Impression coping Screw included (Short – ISPIS20, Long – ISPISL20)

• Диаметр Ø6.0

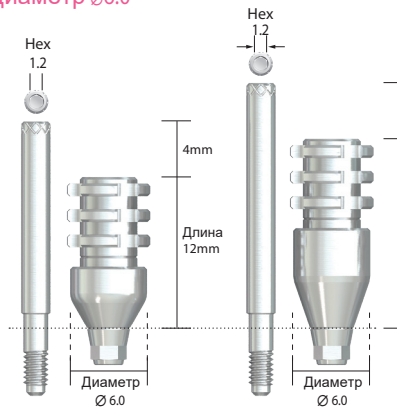


Type	Hex	SCRП*	Non-Hex
Medium	ISIPH611	ISIPS611	ISIPN611
Long	ISIPHL611	ISIPSL611	ISIPNL611

* Impression coping Screw included (Short – ISPIS20, Long – ISPISL20)

Компоненты для снятия слепка с уровня имплантата

Трансфер для закрытой ложки


Узкий / Стандартный / Wide
/ S-wide • Диаметр Ø 4.8

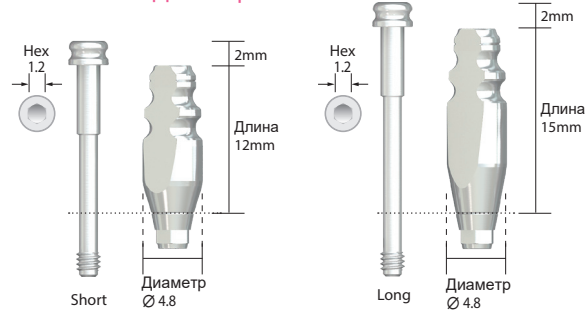

Type	Hex	Non-Hex
Short	ISITH411	ISITN411
Long	ISITHL411	ISITNL411

* Impression coping Screw included
(Short – ISTIS20H, Long – ISTISL20H)


• Диаметр Ø 5.5

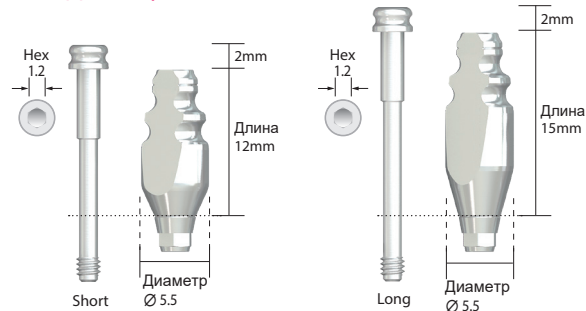

Type	Hex	Non-Hex
Short	ISITH511	ISITN511
Long	ISITHL511	ISITNL511

* Impression coping Screw included
(Short – ISTIS20H, Long – ISTISL20H)


• Диаметр Ø 6.0

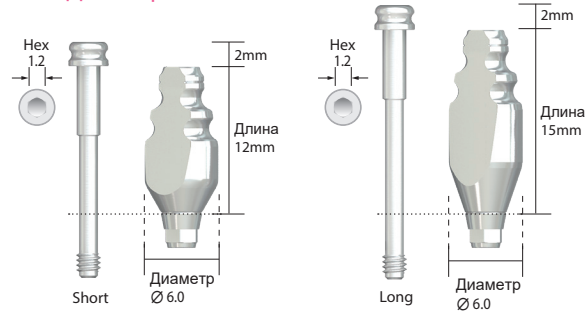

Type	Hex	Non-Hex
Short	ISITH611	ISITN611
Long	ISITHL611	ISITNL611

* Impression coping Screw included
(Short – ISTIS20H, Long – ISTISL20)


Винт трансфера закрытой ложки

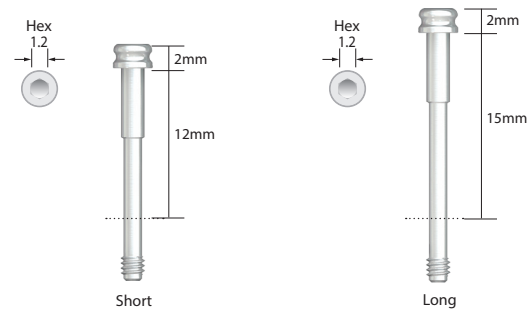

Short	ISTIS20H
Long	ISTISL20H

IS Временный абатмент

Титановый абатмент для временной конструкций и мостовидных протезов
Рекомендуемый момент вращения : 30 Ncm

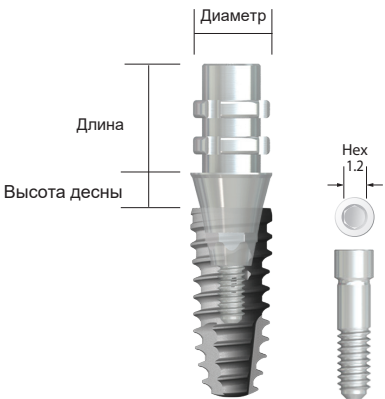

С шестигранником

Диаметр	Ø 4.5		
Высота	2.0	2.0	1.0
Длина (мм)	6.0	8.0	13.0
Артикул	ISANT460	ISANT480	ISANT4130



Без шестигранника

Диаметр	Ø 4.5		
Высота	2.0	2.0	1.0
Длина (мм)	6.0	8.0	13.0
Артикул	Ø 4.5	ISANT460	ISANT480
			ISANT4130

Схема протезирования

- IS Монолитный абатмент

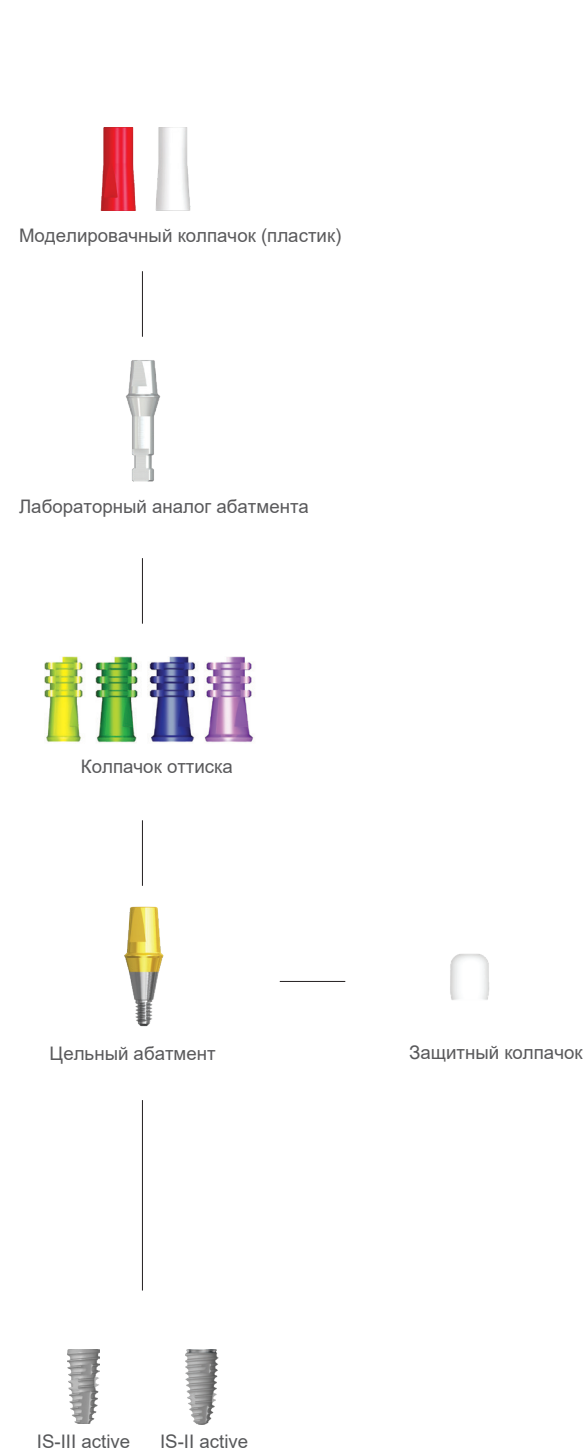


Схема протезирования

(ортопедический протокол)

- IS Абатмент

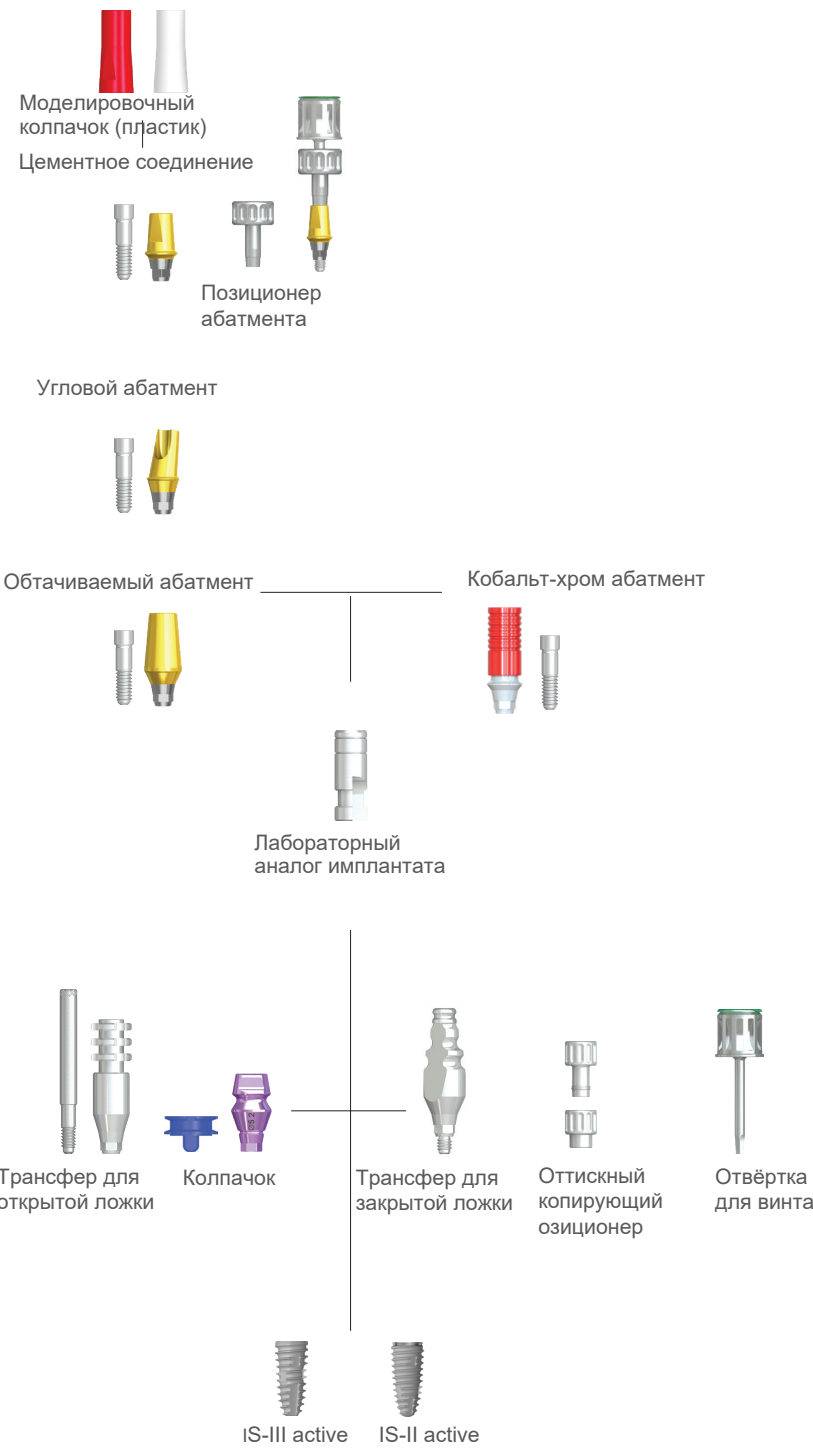


Схема протезирования (ортопедический протокол)

- Multi Unit абатмент


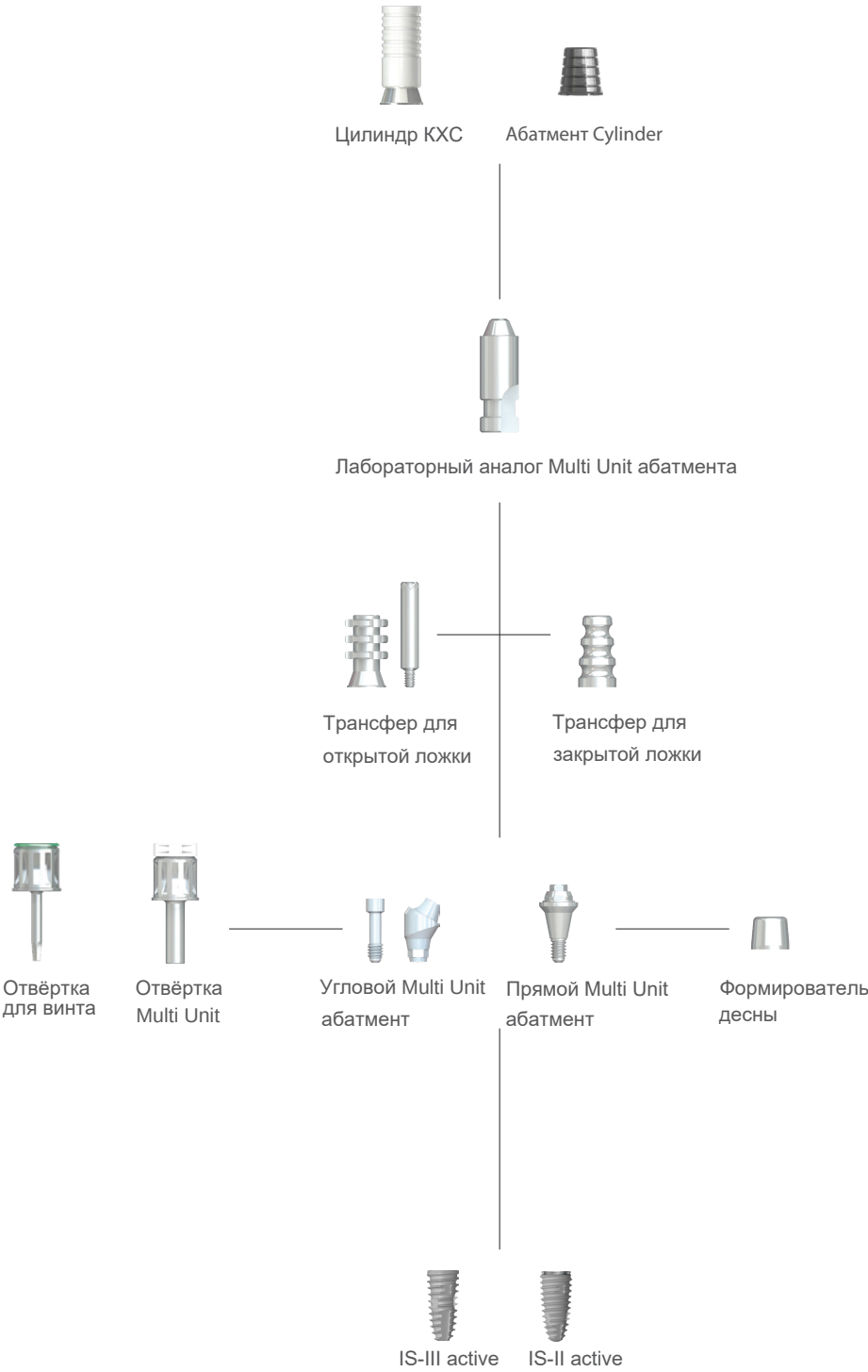


Схема протезирования (ортопедический протокол)

- IS Ball Абатмент

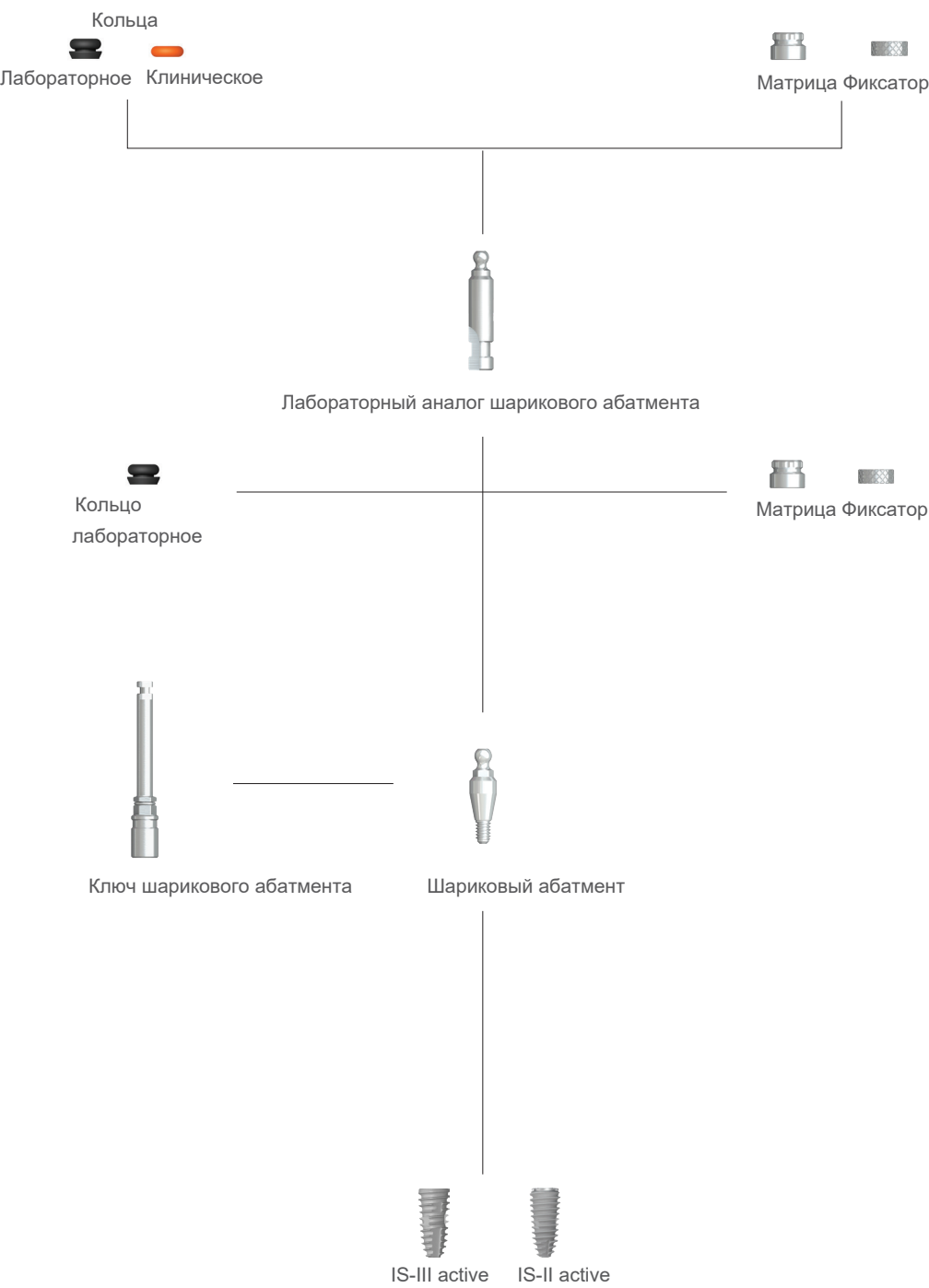

Двойной абатмент (с шестигранником)

- Абатмент для цементируемых одиночных коронок и мостовидных протезов
- Возможна индивидуализация абатмента при помощи фрезерования (во избежание повреждений винта, не затрагивайте поверхность 3мм от платформы имплантата)
 - Винт абатмента (ISCS20) в комплекте
 - Рекомендованный момент вращения: 30 Нсм



Узкий / Стандартный / Wide
/ S-wide • Диаметр Ø 4.5



	Высота (мм)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
Длина	4.0mm	ISAH4140	ISAH4240	ISAH4340	ISAH4440	ISAH4540
	5.5mm	ISAH415	ISAH425	ISAH435	ISAH445	ISAH455
	7.0mm	ISAH417	ISAH427	ISAH437	ISAH447	ISAH457

• Диаметр Ø 5.2



	Высота (мм)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
Длина	4.0mm	ISAH5140	ISAH5240	ISAH5340	ISAH5440	ISAH5540
	5.5mm	ISAH515	ISAH525	ISAH535	ISAH545	ISAH555
	7.0mm	ISAH517	ISAH527	ISAH537	ISAH547	ISAH557

• Диаметр Ø 5.7



	Высота (мм)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
Длина	4.0mm	ISAH6140	ISAH6240	ISAH6340	ISAH6440	ISAH6540
	5.5mm	ISAH615	ISAH625	ISAH635	ISAH645	ISAH655
	7.0mm	ISAH617	ISAH627	ISAH637	ISAH647	ISAH657

• Диаметр Ø 6.5



	Высота (мм)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
Длина	4.0mm	ISAH7140	ISAH7240	ISAH7340	ISAH7440	ISAH7540
	5.5mm	ISAH715	ISAH725	ISAH735	ISAH745	ISAH755

Двойной абатмент (без шестигранника)

- Абатмент для цементируемых мультипорных и мостовидных протезов
- Возможна индивидуализация абатмента при помощи фрезерования (во избежание повреждений винта, не затрагивайте поверхность 3мм от платформы имплантата)
 - Винт абатмента (ISCS20) в комплекте,
 - Рекомендованный момент вращения: 30 Нсм



Узкий / Стандартный / Wide
/ S-wide • Диаметр Ø 4.5



	Высота (мм)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
Длина	4.0mm	ISAN4140	ISAN4240	ISAN4340	ISAN4440	ISAN4540
	5.5mm	ISAN415	ISAN425	ISAN435	ISAN445	ISAN455
	7.0mm	ISAN417	ISAN427	ISAN437	ISAN447	ISAN457

• Диаметр Ø 5.2



	Высота (мм)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
Длина	4.0mm	ISAN5140	ISAN5240	ISAN5340	ISAN5440	ISAN5540
	5.5mm	ISAN515	ISAN525	ISAN535	ISAN545	ISAN555
	7.0mm	ISAN517	ISAN527	ISAN537	ISAN547	ISAN557

• Диаметр Ø 5.7



	Высота (мм)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
Длина	4.0mm	ISAN6140	ISAN6240	ISAN6340	ISAN6440	ISAN6540
	5.5mm	ISAN615	ISAN625	ISAN635	ISAN645	ISAN655
	7.0mm	ISAN617	ISAN627	ISAN637	ISAN647	ISAN657

• Диаметр Ø 6.5



	Высота (мм)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
Длина	4.0mm	ISAN7140	ISAN7240	ISAN7340	ISAN7440	ISAN7540
	5.5mm	ISAN715	ISAN725	ISAN735	ISAN745	ISAN755

Фрезеруемый абатмент

Абатмент для цементируемых одиночных коронок и мостовидных протезов

- Возможна индивидуализация абатмента при помощи фрезерования (во избежание повреждений винта, не затрагивайте поверхность 3мм от платформы имплантата)
- Винт абатмента (ISCS20) в комплекте, Рекомендованный момент вращения: 30 Нсм

Узкий / Стандартный / Wide / S-wide • Диаметр Ø 4.5

Hex

Длина 8.0mm

Высота десны

Диаметр Ø 4.5

SCRП®

Длина 8.0mm

Высота десны

Диаметр Ø 4.5

Высота (мм)	2.0	4.0
Hex	ISSH428	ISSH448

Hex

Длина 8.0mm

Высота десны

Диаметр Ø 5.2

SCRП®

Длина 8.0mm

Высота десны

Диаметр Ø 5.2

• Диаметр Ø 5.2

Высота (мм)	2.0	4.0
Hex	ISSH528	ISSH548

Hex

Длина 8.0mm

Высота десны

Диаметр Ø 5.7

SCRП®

Длина 8.0mm

Высота десны

Диаметр Ø 5.7

• Диаметр Ø 5.7

Высота (мм)	2.0	4.0
Hex	ISSH628	ISSH648

Hex

Длина 8.0mm

Высота десны

Диаметр Ø 6.5

SCRП®

Длина 8.0mm

Высота десны

Диаметр Ø 6.5

• Диаметр Ø 6.5

Приливаемый индивидуальный абатмент (кобальт-хром)

Узкий / Стандартный / Wide / S-wide

Шестигранный

Высота 1.0mm

Диаметр Ø 4.5

SCRП®

Высота 1.0mm

Диаметр Ø 4.5

Без шестигранника

Высота 1.0mm

Диаметр Ø 4.5

Шестигранный	SCRП®	Без шестигр.
ISUCH400	ISUCS400	ISUCN400

Индивидуальный пластиковый абатмент

Выжигаемый абатмент для одиночных и мостовидных конструкций с цементной и винтовой фиксацией.

- Винт абатмента (ISCS20) в комплекте, Рекомендованный момент вращения: 30 Нсм

• Пластик / Диаметр Ø 5.2

6-гр.

Высота десны 1.0 мм

Диаметр Ø 5.2

Без 6-гр.

Высота десны 1.0 мм

Диаметр Ø 5.2

6-гр.	Без 6-гр.
ISUPH500	ISUPN500

• Пластик / Диаметр Ø 4.5

6-гр.

Высота десны 1.0 мм

Диаметр Ø 4.5

Без 6-гр.


Высота десны 1.0 мм

Диаметр Ø 4.5

6-гр.	Без 6-гр.
ISUPH400	ISUPN400


Угловой абатмент (15°)

- Возможна индивидуализация абатмента при помощи фрезерования
- Позиционирование в 12 положениях при выборе А или В типа
- Рекомендованный момент вращения: 30Нсм

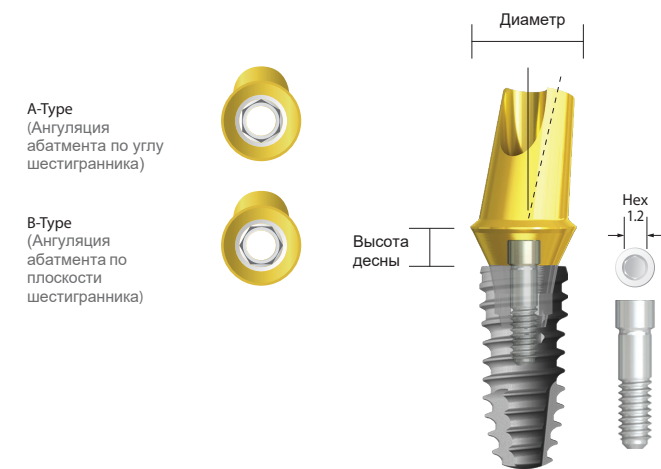


Узкий / Стандартный / Wide / S-wide

• Диаметр Ø 4.5

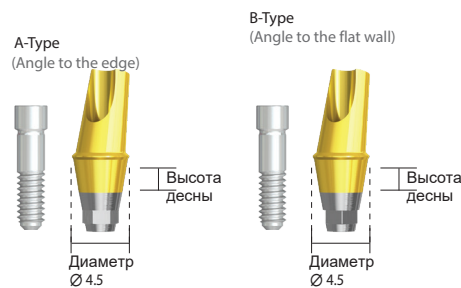


Высота (мм)	2.0	3.0	4.0
A Type	ISANA1427	ISANA1437	ISANA1447
B Type	ISAHB1427	ISAHB1437	ISAHB1447
Non-Hex	ISANA1427	ISANA1437	ISANA1447

• Диаметр Ø 5.2

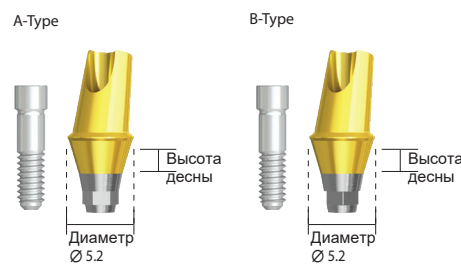

Высота (мм)	2.0	3.0	4.0
A Type	ISANA1527	ISANA1537	ISANA1547
B Type	ISAHB1527	ISAHB1537	ISAHB1547
Non-Hex	ISANA1527	ISANA1537	ISANA1547


• Диаметр Ø 5.7

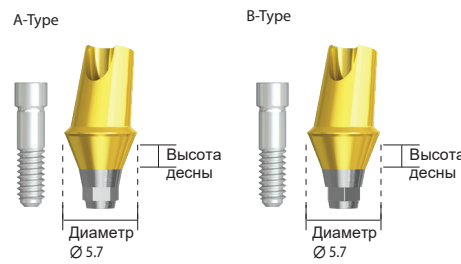

Высота (мм)	2.0	3.0	4.0
A Type	ISANA1627	ISANA1637	ISANA1647
B Type	ISAHB1627	ISAHB1637	ISAHB1647
Non-Hex	ISANA1627	ISANA1637	ISANA1647

Угловой абатмент (25°)

- Возможна индивидуализация абатмента при помощи фрезерования
- Позиционирование в 12 положениях при выборе А или В типа
- Рекомендованный момент вращения: 30Нсм

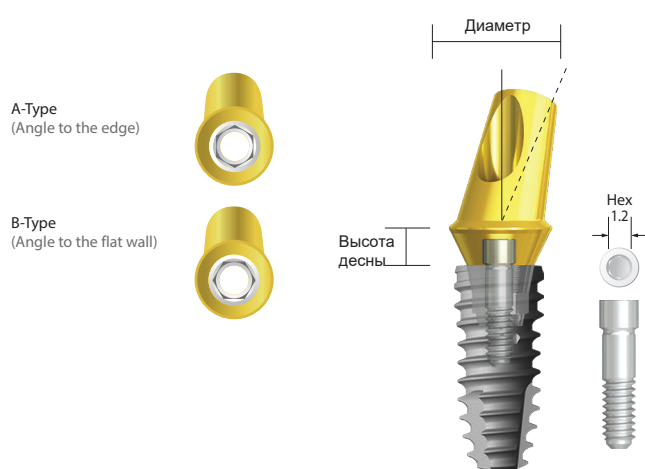

Узкий / Стандартный / Wide

/ S-wide • Диаметр Ø 4.5




Высота (мм)	2.0	3.0	4.0
A Type	ISANA2427	ISANA2437	ISANA2447
B Type	ISAHB2427	ISAHB2437	ISAHB2447
Non-Hex	ISANA2427	ISANA2437	ISANA2447

• Диаметр Ø 5.2




Высота (мм)	2.0	3.0	4.0
A Type	ISANA2527	ISANA2537	ISANA2547
B Type	ISAHB2527	ISAHB2537	ISAHB2547
Non-Hex	ISANA2527	ISANA2537	ISANA2547

• Диаметр Ø 5.7

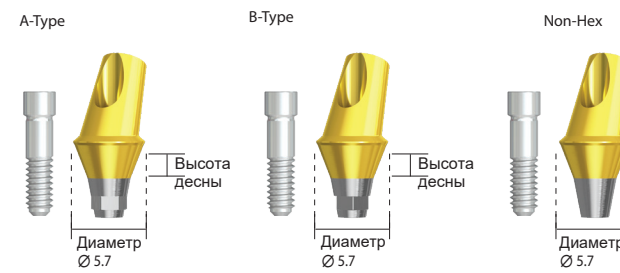

Высота (мм)	2.0	3.0	4.0
A Type	ISANA2627	ISANA2637	ISANA2647
B Type	ISAHB2627	ISAHB2637	ISAHB2647
Non-Hex	ISANA2627	ISANA2637	ISANA2647

Scan body

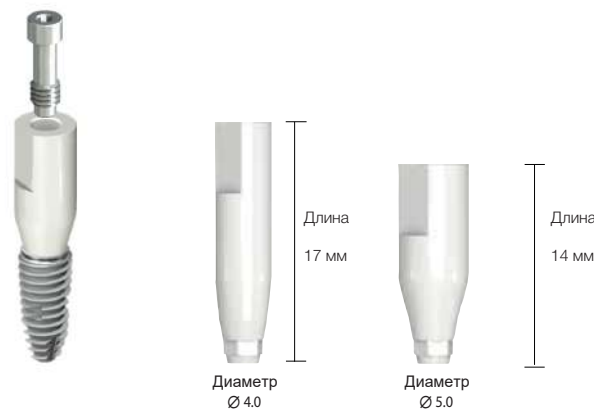

Диаметр	4.0	5.0
Артикул	ISPSBH40NB	ISPSBH50NB

Артикул ISPSBH40NB с шестигранником для имплантатов d=3,5 мм
Артикул ISPSBH50NB с шестигранником для имплантатов d=4,0/4,5/5,0/5,5/6,0 мм

Титановый блок

Титановый блок с шестигранником для фрезеровки с винтом
• Рекомендованный момент вращения: 30 Нсм




Узкий / Стандартный / Wide
/ S-wide D Cut

Диаметр	Ø10	Ø14
Hex	ISBKH10NBD	ISBKH14NBD
Non-Hex	ISBKH10NBD	-

Титановый цилиндр


Титановые основания Ti Cylinder (рекомендованы для боковой группы зубов) и титановое основание Ti Links (рекомендованы для передней группы зубов) - это специальные титановые платформы, выпускаемые компанией NeoBiotech для различных CAD/CAM систем. Они созданы для изготовления индивидуальных абатментов и идеально подходят к имплантам NeoBiotech, т. к. сделаны самим производителем имплантатов.

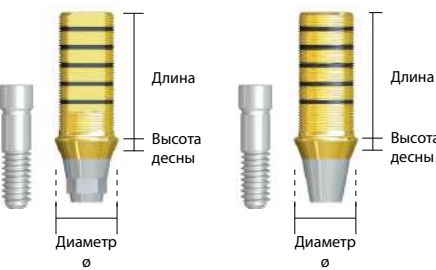

Высота десны (мм)	1.0	1.0
Диаметр ø	4.5	5.5
Длина (мм)	9.0	9.0
Шестигранник	ISTCAN4509	ISTCAN5509
Без шестигр.	ISTCAN4509	ISTCAN5509

※ Винт входит в комплект

Цифровой аналог имплантата

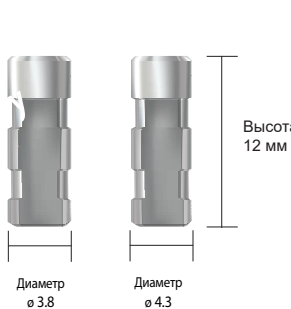



Диаметр	3.8	4.3
Артикул	SGISLA400	SGISLA500

*SGISLA400: узкая платформа — диаметр 3,5 мм
SGISLA500: стандартная и широкая платформа

Титановая платформа (Ti-Link)





Высота десны (мм)	1.0	1.0	1.0
Диаметр ø	4.0	4.5	5.0
Длина (мм)	3.5	3.5	3.5
Шестигранник	ISLKH4035NB	ISLKH4535NB	ISLKH5035NB
Без шестигр.	ISLKN4035NB	ISLKN4535NB	ISLKN5035NB

Лабораторный аналог имплантата






Диаметр	3.8	4.3
Артикул	ISLA400	ISLA500

*ISLA400: узкая платформа — диаметр 3,5 мм
ISLA500: стандартная и широкая платформа

Монолитный абатмент (комбинированный)

- Цельный комбинированный абатмент для цементируемых конструкций
- Рекомендованный момент вращения: 30 Нсм
- Защитный колпачок в комплекте

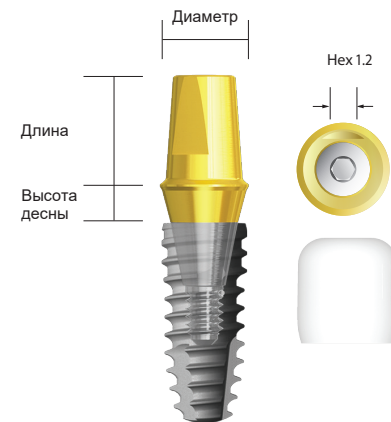

Узкий / Стандартный / Wide / S-wide


- Диаметр $\varnothing 4.5$







- Диаметр $\varnothing 5.2$



- Диаметр $\varnothing 5.7$

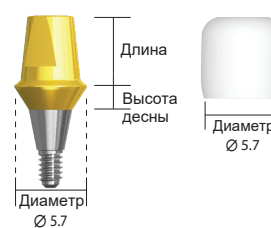


- Диаметр Ø 6.5

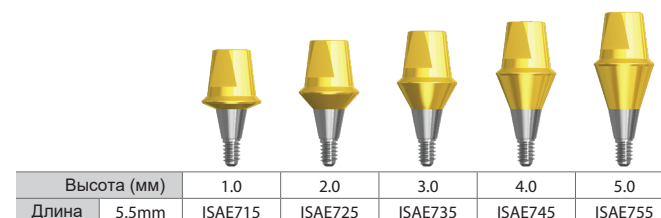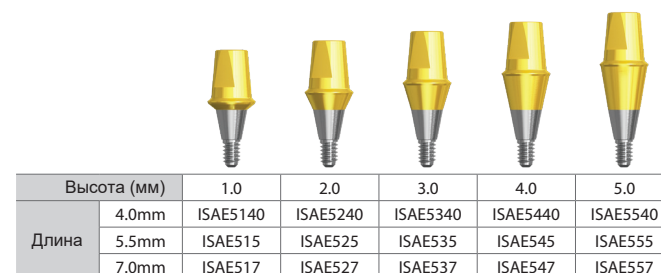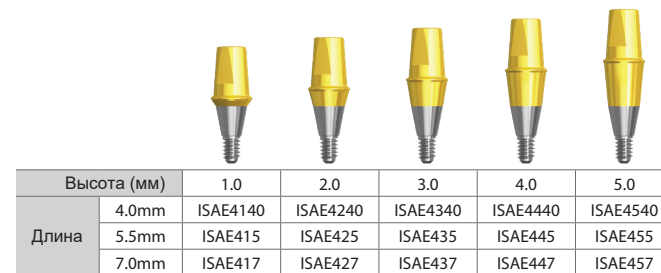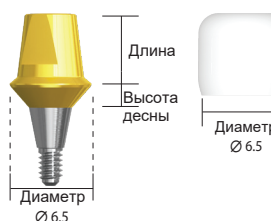

SCRP Multi абатмент


Абатмент для цементно-винтовой фиксации

- Усеченный 6-гранник позволяет установить мультиопорные конструкции, при расхождении осей имплантатов до 20°
- Возможна индивидуализация абатмента при помощи фрезерования (во избежание повреждений винта, не затрагивайте поверхность 3мм от платформы имплантата)
- Винт абатмента (ISCS20) в комплекте
- Рекомендованный момент вращения: 30 Нсм

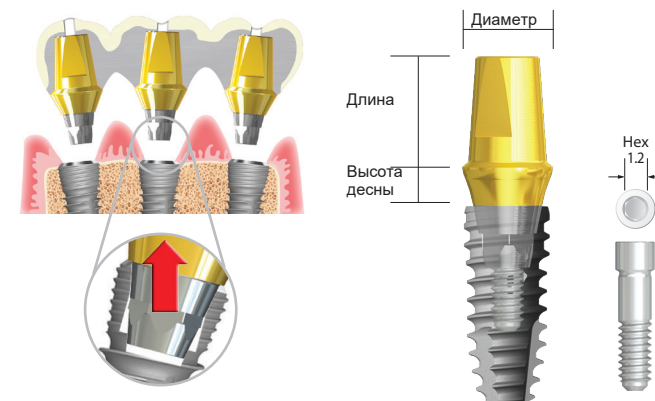


Узкий / Стандартный / Wide


- / S-wide • Диаметр Ø 4.5

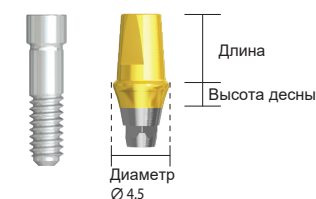



- Диаметр $\varnothing 5.2$

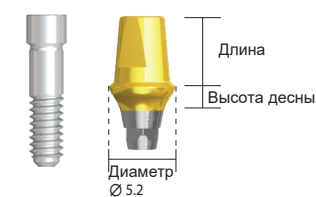

- Диаметр $\varnothing 5.7$

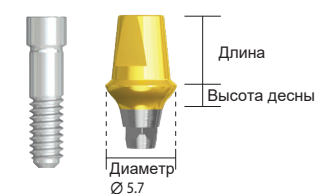

- Диаметр $\varnothing 6.5$

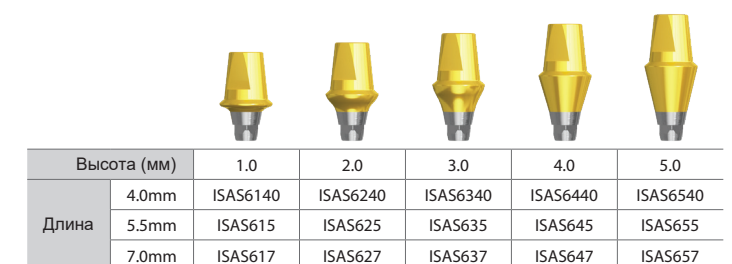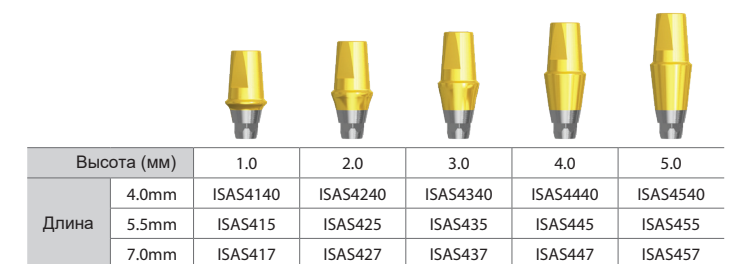

Компоненты для снятия слепка с уровня абатмента


Защитный колпачок



Узкий / Стандартный / Wide / S-wide

• Диаметр $\varnothing$ 4.5			
Длина (мм)	4.5	5.5	7.0
Артикул	ISPTC445	ISPTC455	ISPTC470
• Диаметр $\varnothing$ 5.2			
Длина (мм)	4.5	5.5	7.0
Артикул	ISPTC545	ISPTC555	ISPTC570
• Диаметр $\varnothing$ 5.7			
Длина (мм)	4.5	5.5	7.0
Артикул	ISPTC645	ISPTC655	ISPTC670
• Диаметр $\varnothing$ 6.5			
Длина (мм)	4.5	5.5	
Артикул	ISPTC745	ISPTC755	

Пластиковый моделировочный колпачок

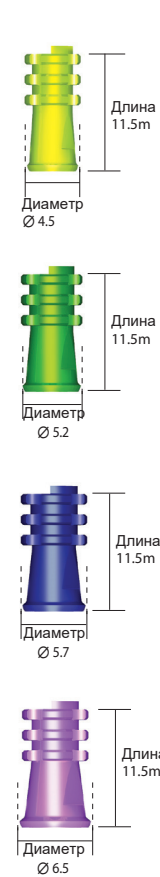

Узкий / Стандартный / Wide

/ S-wide • Диаметр $\varnothing$ 4.5	
Артикул	ISPIC411
• Диаметр $\varnothing$ 5.2	
Артикул	ISPIC511
• Диаметр $\varnothing$ 5.7	
Артикул	ISPIC611
• Диаметр $\varnothing$ 6.5	
Артикул	ISPIC711

Компоненты для снятия слепка с уровня абатмента

Лабораторный аналог



Узкий / Стандартный / Wide / S-wide

• Диаметр $\varnothing$ 4.5			
Длина (мм)	4.0	5.5	7.0
Артикул	ISLA440	ISLA455	ISLA470
• Диаметр $\varnothing$ 5.2			
Длина (мм)	4.0	5.5	7.0
Артикул	ISLA540	ISLA555	ISLA570
• Диаметр $\varnothing$ 5.7			
Длина (мм)	4.0	5.5	7.0
Артикул	ISLA540	ISLA655	ISLA670
• Диаметр $\varnothing$ 6.5			
Длина (мм)	4.0	5.5	
Артикул	ISLA640	ISLA755	

Пластиковый моделировочный колпачок




Узкий / Стандартный / Wide / S-wide

Шестиграннык				
Диаметр(а)	4.5	5.2	5.7	6.5
Артикул	ISPCN410	ISPCN510	ISPCN610	ISPCN710
Без шестигранника				
Диаметр(а)	4.5	5.2	5.7	6.5
Артикул	ISPCN410	ISPCN510	ISPCN610	ISPCN710

IS PickCap Impression Coping

Корпус, винт и колпачок для снятия оттиска входят в комплект

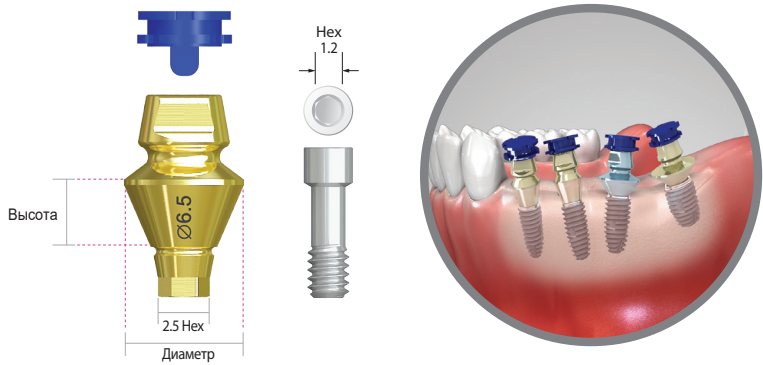

• Neo PickCap Impression Cap

Маленькая		Размер колпачка	Артикул	Примечание
		Маленькая	PCISC01	Coping Ø3.5~Ø4.5
Крупная		Крупная	PCILC01	Coping Ø5.2~Ø6.5

Диаметр	Ø 3.5			
Высота (мм)	3.0	5.0	8.0	10.0
Артикул	ISPCIB3503C	ISPCIB3505C	ISPCIB3508C	ISPCIB3510C

Диаметр	Ø 4.0			
Высота (мм)	3.0	5.0	8.0	10.0
Артикул	ISPCIB4003C	ISPCIB4005C	ISPCIB4008C	ISPCIB4010C

Диаметр	Ø 4.5			
Высота (мм)	3.0	5.0	8.0	10.0
Артикул	ISPCIB403C	ISPCIB405C	ISPCIB408C	ISPCIB410C

Диаметр	Ø 5.2				
Высота (мм)	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
Артикули	ISPCIB502C	ISPCIB503C	ISPCIB504C	ISPCIB505C	ISPCIB506C

Диаметр	Ø 5.7				
Высота (мм)	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
Артикули	ISPCIB602C	ISPCIB603C	ISPCIB604C	ISPCIB605C	ISPCIB606C

Диаметр	Ø 6.5				
Высота (мм)	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
Артикули	ISPCIB702C	ISPCIB703C	ISPCIB704C	ISPCIB705C	ISPCIB706C

Multi unit абатмент

Абатмент для мультиопорных и мостовидных конструкций с винтовой фиксацией
Рекомендованный момент вращения при фиксации абатментов: 30 Нсм, винта цилиндра 15 Нсм

Высота (мм)	1.0	2.0	3.0	4.0
Артикул	ISMUA4810S	ISMUA4820S	ISMUA4830S	ISMUA4840S


* Держатель (МУАН48) входит в комплект

Угловой multi unit абатмент

Рекомендованный момент вращения при фиксации абатментов: 30 Нсм, винта цилиндра 15 Нсм

Высота (мм)	1.0	2.0	3.0	4.0
Шестигр.	17° ISAHMUA1410S	ISAHMUA1420S	ISAHMUA1430S	ISAHMUA1440S
	30° ISAHMUA3410S	ISAHMUA3420S	ISAHMUA3430S	ISAHMUA3440S
Без шестигр.	17° ISANMUA1410S	ISANMUA1420S	ISANMUA1430S	ISANMUA1440S
	30° ISANMUA3410S	ISANMUA3420S	ISANMUA3430S	ISANMUA3440S

*Держатель входит в комплект

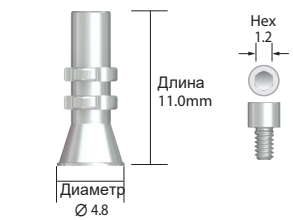

Временный цилиндр,
без шестигранника



Длина (мм)	11.0
Артикул	MUATPCN48

* Cylinder Screw(MUAS 14) Included



Трансфер для
открытой ложки



Длина (мм)	9.0
Артикул	MUAIP48

* Coping Screw(MUAI48) Included



Трансфер для
закрытой ложки



Длина (мм)	9.0
Артикул	MUAIT48



Лабораторный аналог
multi unit абатмента



Артикул	MUALA48
---------	---------



Отвертка
multi unit
абатмента



Артикул	MUAD48S
---------	---------




Кобальт-хромовый
цилиндр,
без шестигранника



Длина (мм)	12.0
Артикул	MUACCN48


* Винт цилиндра (MUAS 14) входит
в комплект

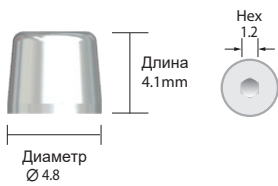

Заживляющий колпачок




Длина (мм)	4.1
Артикул	MUAHC48

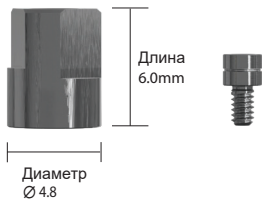

Multi Unit
Абатмент
Scan Body



Артикул	MUASB48
---------	---------

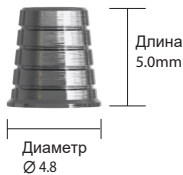

Multi Unit
Абатмент
Cylinder




Артикул	MUAC48
---------	--------

Цилиндрический винт (MUAS14) входит в комплект поставки

Шариковый абатмент

Применяются для фиксации съемных протезов

- Позволяют компенсировать расхождении осей имплантатов до 20°
- Рекомендованный момент вращения при фиксации абатмента: 30 Нсм

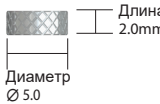

Шариковый абатмент



Высота (мм)	1.0	2.0	3.0	4.0
Артикул	ISABA100	ISABA200	ISABA300	ISABA400

*Требуется отвертка для шарикового абатмента (BADH24)

Матрица



Артикул	BAH40
---------	-------

*Клиническое кольцо (BAORING) 5 шт. и лабораторное кольцо (BAOIMP) 1 шт. входят в комплект


Фиксатор



Артикул	BAR20
---------	-------

* Если окклюзионное пространство не позволяет установить фиксатор в таком случае используйте матрицу.
* Клиническое кольцо (BAORING) 5 шт. и лабораторное кольцо (BAOIMP) 1 шт. в комплекте

Шариковый абатмент

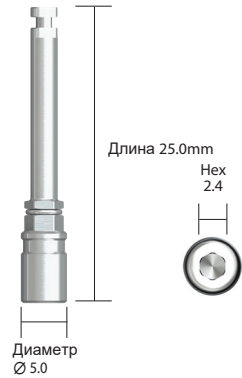

Клиническое кольцо



Артикул	BAORING
---------	---------

*3 шт. в комплекте

Лабораторное кольцо



Артикул	BAOIMP
---------	--------

* 3 шт. в комплекте
* Предотвращает попадание пластмассы под матрицу или фиксатор:
1. при лабораторном изготовлении протеза
2. при клинической фиксации матрицы или фиксатора в протезе

Лабораторный аналог шарикового абатмента



Артикул	BALA350
---------	---------

Отвёртка шарикового абатмента




Артикул	BADH24
---------	--------

ACM - Autobone Chip Maker


- Фреза для забора аутокости

- Применение для сбора кости 300 об/мин с орошением физраствором и 80 об/мин без орошения
- Стоппер рассчитан на одноразовое использование
- В комплекте 7 шт. стопперов-ловушек

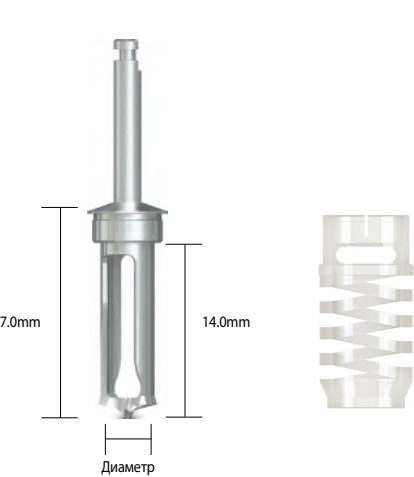


Диаметр	4.0	4.5	5.0	6.0
Артикул	NACM40ISETS	NACM45ISETS	NACM50ISETS	NACM60ISETS

• Инструкция по применению

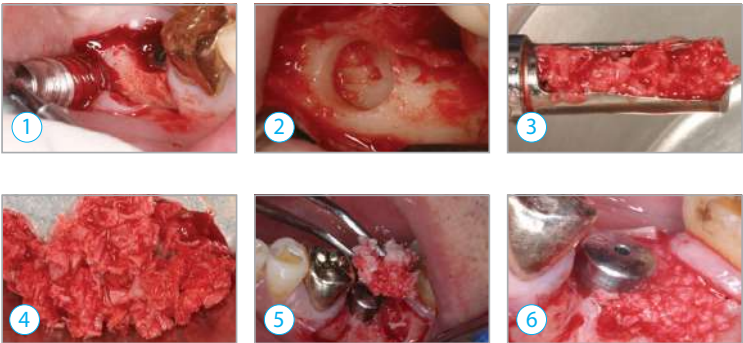

• Auto Chip Maker Руководство

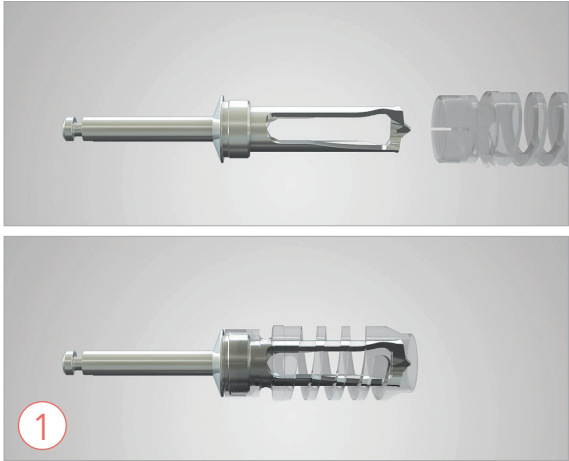


Стоппер

- Подсоедините стоппер к стерилизованному сверлу ACM.



- Выберите наиболее подходящее место для сбора костного аутотрансплантата.
- Расположите сверло ACM Drill в том месте, где будет собираться костный аутотрансплантат.

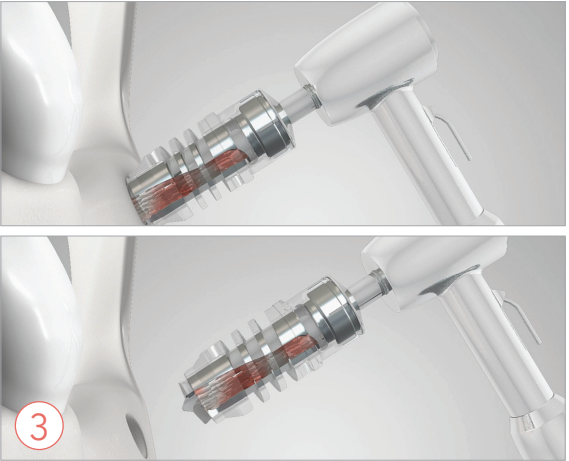


Сверление

- Чтобы предотвратить соскальзывание сверла ACM, слегка наклоняйте сверло влево и вправо, пока он не займет устойчивое положение. (Рекомендуется 80 об/мин / без ирригации)
- Чтобы собрать высококачественный костный аутотрансплантат, сверлите только на глубину 3~4 мм в одном месте и переходите к другому месту для продолжения сверления.



EZ-GBR Набор

EZ-GBR KIT представляет собой хирургический инструмент, используемый для костной пластики полости рта на участках с дефектами аутогенной кости. Он состоит из компонентов хирургического инструмента, которые могут фиксировать мембраны.

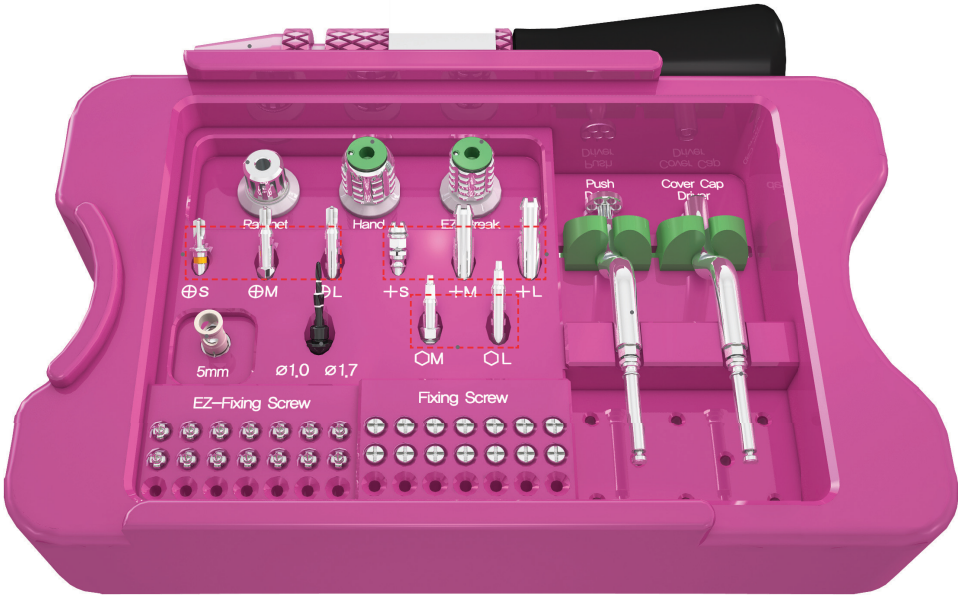

Kit	EZGBRKIT
-----	----------

• - Фиксирующее сверло EZ-Screw

Диаметр	Артикул
Ø1.0 / Ø1.7	EZSFD17

• Стоппер для сверла

Длина	Артикул
5mm	EZSFD5050

* В комплект входит только стоппер. Пожалуйста, заказывайте держатель стоппера (DSHF) отдельно.



EZ-GBR Kit

• Соединитель EZ-Handle



Длина	Артикул
12mm	EZHC12

• Соединитель под ключ




Длина	Артикул
15mm	GRC15




• Ручной соединитель



Артикул	DRH
---------	-----

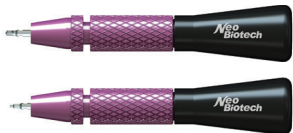

• Отвертка с головкой Philips

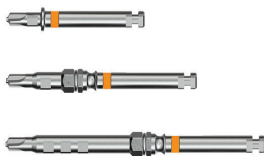


Длина	Артикул
5mm	PHSD05
10mm	PHSD10
20mm	PHSD20



• EZ-Break Отвертка




Диаметр	Артикул
Ø3.2	EZBRD

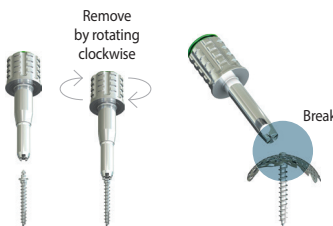

EZ-GBR Kit

• Руководство по техническому комплекту EZ-GBR

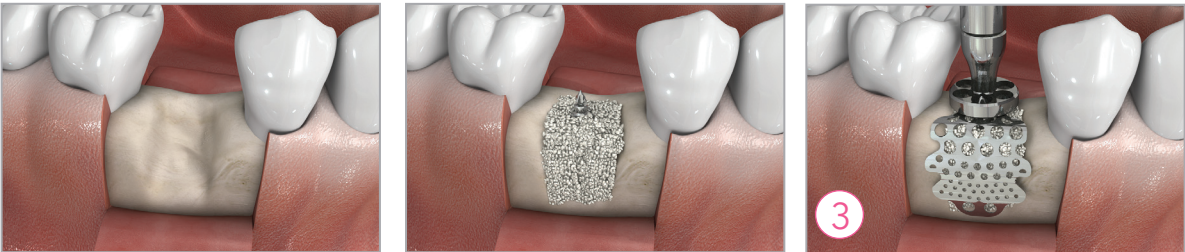

EZ-Fixing Screw

- Чтобы обеспечить достаточное пространство для формирования костной ткани, установите винт EZ-Fixing Screw на область костного дефекта.

Bone Graft & Cti-mem

- Заполните костный материал до высоты винта EZ-Fixing и установите соответствующий тип CTi-mem.

EZ-Ti-Mem Push Driver

- Закрепите мембрану, прижав EZ-Ti-Mem Push Driver к конической части винта EZ-Fixing Screw.



EZ-Cover Cap Driver

- Дополнительно зафиксируйте мембрану, установив колпачок EZ-Cover на винт EZ-Fixing Screw с помощью драйвера EZ-Cover Cap Driver.

EZ-Break Driver

- С помощью EZ-Break Driver снимите коническую часть крепежного винта EZ-Fixing Screw, вращая его по часовой стрелке.

Fixing Screw

- Если необходимо сделайте дополнительную фиксацию с помощью крепежных винтов.
- После адаптации Cti-mem к окружающему участку ткани накройте Cti-mem мягкой тканью.

GBR Компоненты

*Not Included. Separately Purchasable.

• Крепежный винт



Длина	Артикул
3mm	MFS1603
5mm	MFS1605
7mm	MFS1607

* Disposable

• Tent Screw



Длина	Артикул
7mm	CTS2007
10mm	CTS2010
13mm	CTS2013

* Disposable

• EZ-Fixing Screw



Длина	Артикул
3mm	EZFS1703C
5mm	EZFS1705C
7mm	EZFS1707C
10mm	EZFS1710C
13mm	EZFS1713C
15mm	EZFS1715C


* Disposable

• EZ-Fixing Spacer



Длина	Артикул
1.0mm	ISEZFS3410S
1.5mm	ISEZFS3415S
2.0mm	ISEZFS3420S

* Disposable

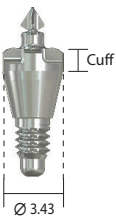

GBR Компоненты

*Not Included. Separately Purchasable.


• Универсальный Spacer

- Dual Hex Driver (DHDC10 / DHDC20) is required to use Universal Spacer.
- Cover Screw – 1.0 hex / Universal Spacer – 1.6 hex




Диаметр	Размер винта	Длина	Артикул	Совместимость
Ø4.0	M2.0	0.5mm	UVCSP2005*	- Neobiotech IS System
		1.0mm	UVCSP2010*	- OSSTEM TS
		1.5mm	UVCSP2015*	- Megagen EZ Plus RP
		2.0mm	UVCSP2020*	- Warantec Oneplant
				- Astra Large
				- Nobel Active RP

* Disposable / * For Neobiotech IS Type

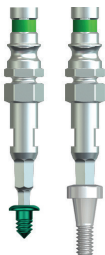


CTi-mem

Новая концепция титановой мембраны, индивидуальная титановая мембрана

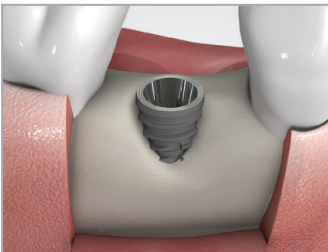


1 –Настенное крепление

- Дефект костной ткани в буккальной области

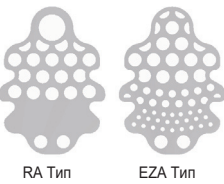


RA Тип

EZA Тип

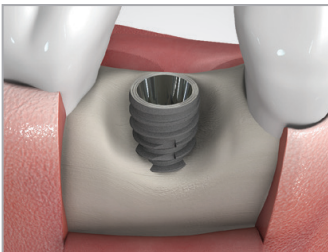


2 – Настенное крепление

- Дефект костной ткани в буккальной, проксимальной области

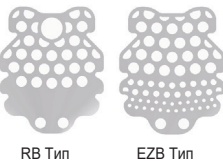


RB Тип

EZB Тип

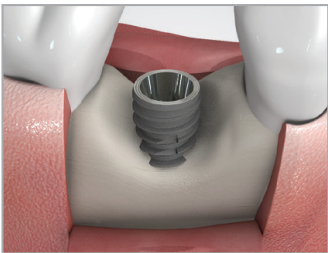

3 – Настенная аугментация

- Дефект костной ткани в буккальной, праксимальной, язычной областях

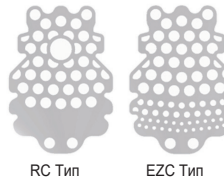


RC Тип

EZA Тип



Нестационарные погруженные

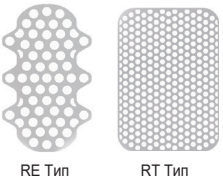


RE Тип

RT Тип

• Tent Screw Type



R Тип
CTi-mem

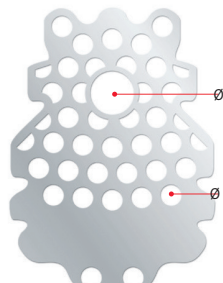


Толщина : 0.12mm

• EZ-Fixing Screw Type




EZ Тип
CTi-mem

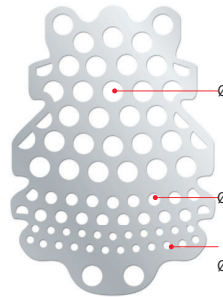

Толщина : 0.12mm


CTi-mem

• RA Тип

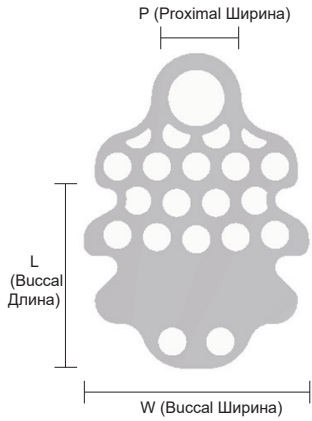


P(mm)	W(mm)	L(mm)	Тип	Артикул
4	8	6	RA1	RATMB0810F
4	10	8	RA2	RATMB0912F
4	10	11	RA3	RATMB0915F

* Одноразовые / Толщина: 0,12 мм

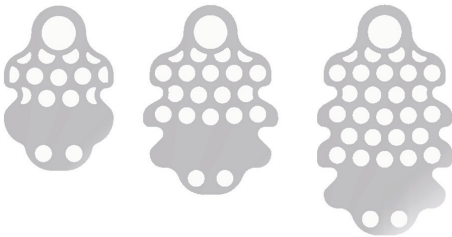


• EZA Тип

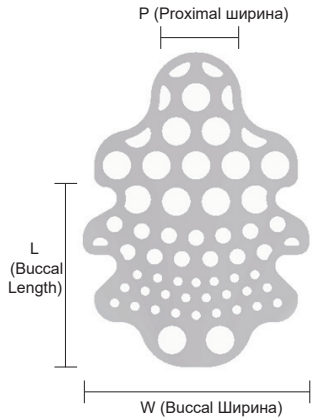


P(mm)	W(mm)	L(mm)	Тип	Артикул
4	8	5	EZA1	EZTM0810A1
4	10	8	EZA2	EZTM0912A2
4	10	11	EZA3	EZTM0915A3

*Одноразовые / Толщина: 0,12 мм

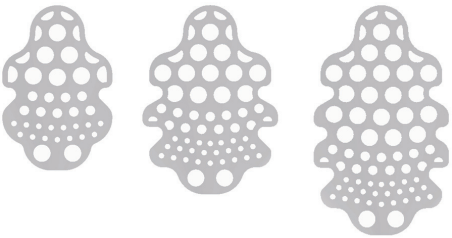


CTi-mem

• RB Тип

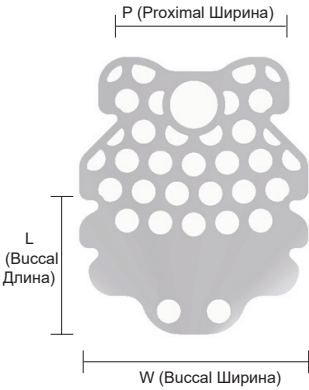


P(mm)	W(mm)	L(mm)	Тип	Артикул
10	12	5	RB4	RPTMB1210SF
		7	RB5	RPTMB1212SF
		10	RB6	RPTMB1215SF

*Одноразовые / Толщина: 0,12 мм

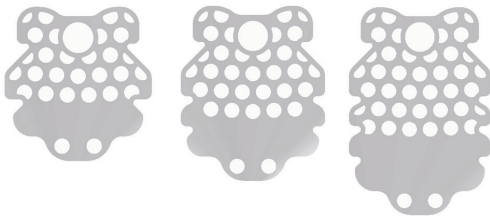


EZB Тип

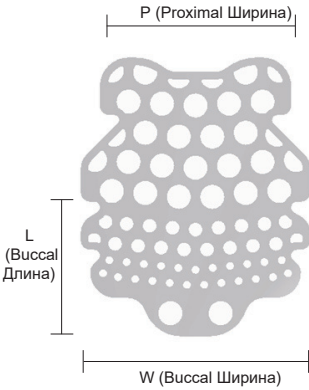


P(mm)	W(mm)	L(mm)	Тип	Артикул
10	12	5	EZB4	EZTM1210B4
		7	EZB5	EZTM1212B5
		10	EZB6	EZTM1215B6

*Одноразовые / Толщина: 0,12 мм

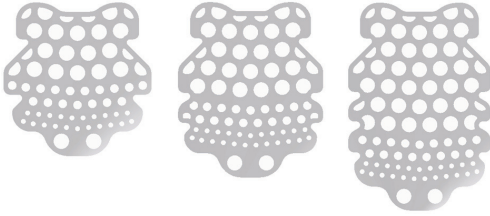


CTi-mem

• RC Тип

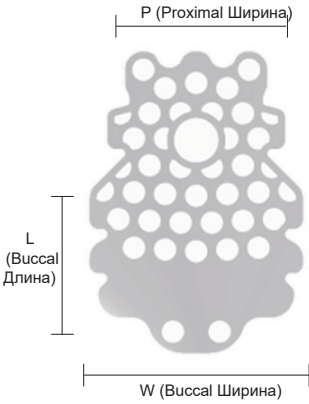


P(mm)	W(mm)	L(mm)	Тип	Артикул
7	9	6	RC1	RPTML0910F
		8	RC2	RPTML0912F
		11	RC3	RPTML0915F
10	12	5	RC4	RPTML1210SF
		7	RC5	RPTML1212SF
		10	RC6	RPTML1215SF
12	12	5	RC7	RPTML1210LF
		7	RC8	RPTML1212LF
		10	RC9	RPTML1215LF

*Одноразовые / Толщина: 0,12 мм

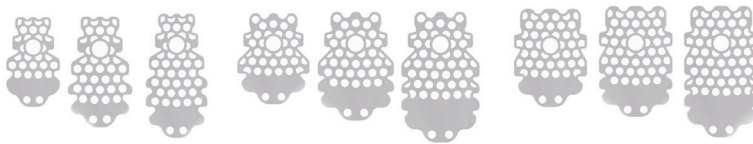


• EZC Тип

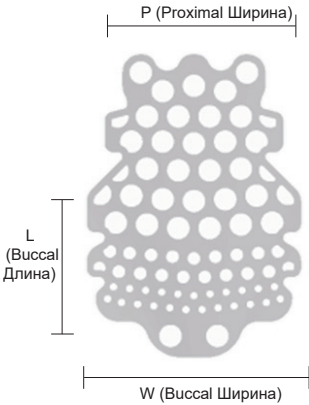


P(mm)	W(mm)	L(mm)	Тип	Артикул
7	9	6	EZC1	EZTM0910C1
		8	EZC2	EZTM0912C2
		11	EZC3	EZTM0915C3
10	12	5	EZC4	EZTM1210C4
		7	EZC5	EZTM1212C5
		10	EZC6	EZTM1215C6
12	12	5	EZC7	EZTM1210C7
		7	EZC8	EZTM1212C8
		10	EZC9	EZTM1215C9

*Одноразовые / Толщина: 0,12 мм

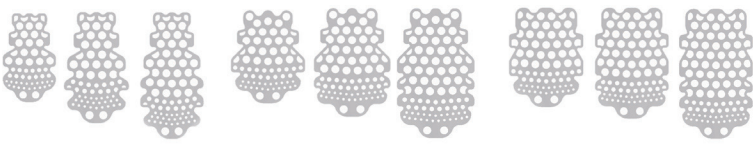


CTi-mem

RE Тип

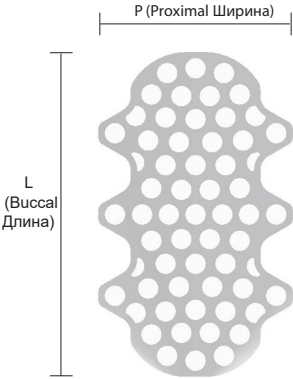


P(mm)	L(mm)	Тип	Артикул
12	15	RE1	RCTM1215
12	20	RE2	RCTM1220
15	25	RE3	RCTM1525

*Одноразовые / Толщина: 0,12 мм

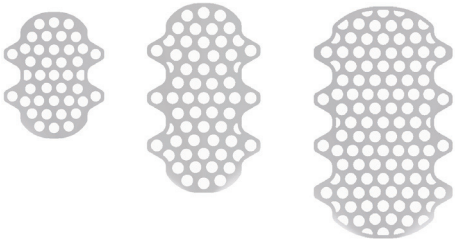

• RT Тип

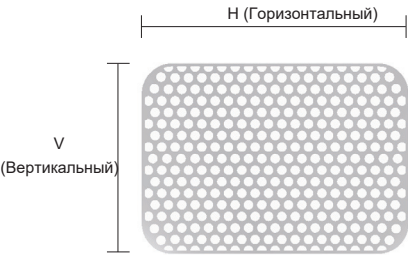

V(mm)	H(mm)	Тип	Артикул
12	20	RT1	RTMN1220125
20	25	RT2	RTMN2025125
25	35	RT3	RTMN2535125
35	50	RT4	RTMN3550125

*Одноразовые / Толщина: 0,12 мм




NeoBiotech
SURGICAL KIT



Комплектация хирургического набора Neo Master KIt


• Кортикальный метчик (IS-II active)

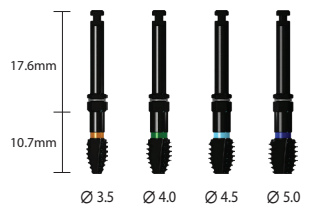

Диаметр	Артикул
Ø3.5	CT38S08*
Ø4.0	CT43S08*
Ø4.5	CT45S08*
Ø5.0	CT50S08*

* Optional

• Кортикальный метчик (IS-III / IT-III active)

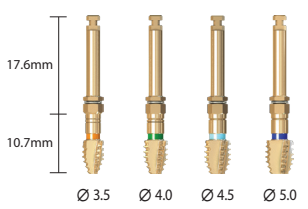

Диаметр	Артикул
Ø3.5	CT38S09*
Ø4.0	CT43S09*
Ø4.5	CT45S09*
Ø5.0	CT50S09*

* Optional


• Кортикальный длинный метчик



Диаметр	Артикул	
	IS-III, IT-III	IS-II, EB-II
Ø3.5	ISTD38L*	PTAP35FL*
Ø4.0	ISTD40L*	PTAP40FL*
Ø4.5	ISTD45L*	PTAP45FL*
Ø5.0	ISTD50L*	PTAP50FL*


* Not Included. Separately Purchasable.

• Переходник

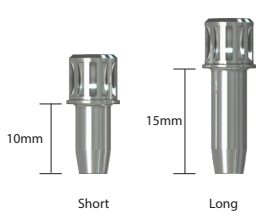

Длина	Артикул
Short	RC10
Long	RC15


• IS Имплантовод

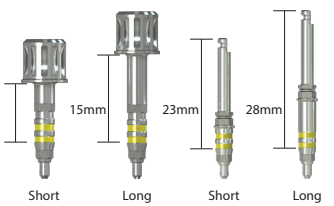

Type	Артикул
Ratchet (Short)	ISFD10R*
Ratchet (Long)	ISFD15R*
Contra Angle (Short)	ISFD05C*
Contra Angle (Long)	ISFD05CL*

* Optional


• IT Имплантовод

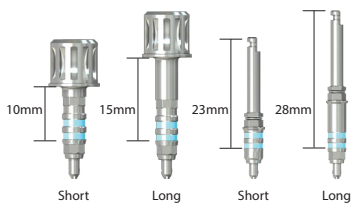

Тип	Артикул
Ratchet (Short)	ITFDO31RS*
Ratchet (Long)	ITFDO31RL*
Contra Angle (Short)	ITFDO31S*
Contra Angle (Long)	ITFDO31L*

* Optional


• MD Spacer

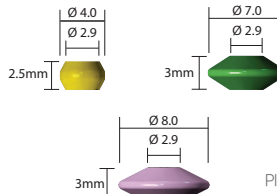

Диаметр	Артикул
Ø4.0	MDS4025
Ø7.0	MDS7030
Ø8.0	MDS8030

* Only stopper included. Please order MD Spacer holder(MDSH) separately.


Пин параллельности

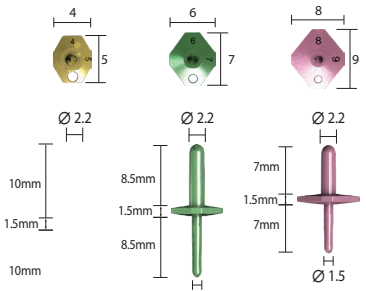

Диаметр	Артикул
Ø4.0 / Ø5.0	MDPP4050
Ø6.0 / Ø7.0	MDPP6070
Ø8.0 / Ø9.0	MDPP8090

Комплектация хирургического набора Neo Master KIt

• Направляющий пин

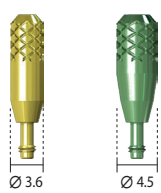

Диаметр	Артикул
Ø3.6	DP36
Ø4.5	DP45

• Кортикальная фреза



Диаметр	Артикул
Ø3.5	CD38*
Ø4.0	CD43*
Ø4.5	CD45*
Ø5.0	CD50*

* Optional

• EB Имплантовод



Тип	Hex	Артикул
Narrow	2.4	EBFDH24*
Regular/Wide(3i)	2.7	EBFDH27*
Wide(Brenemark)	3.4	EBFDH34*


* Not Included. Separately Purchasable.

• Удлинитель фрез



Product name	DE01
--------------	------

• Отвертка с шестигранником

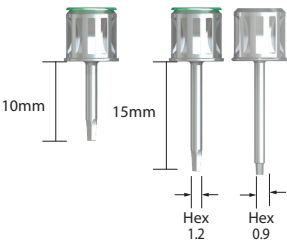

Длина(mm)	Hex	Артикул
10	1.2	HD1210S
15		HD1215S
10	0.9	HD0910*
15		HD0910S*


* Not Included. Separately Purchasable.

• Динамометрический ключ



Артикул	TW60
---------	------

• Держатель отвертки и глубиномер

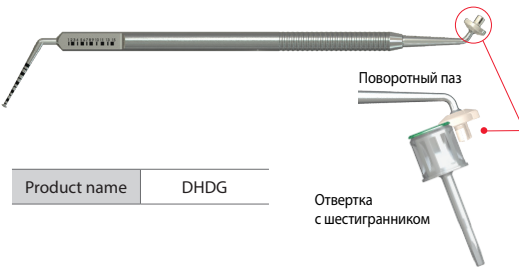

Product name	DHDG
--------------	------

Поворотный паз

Отвертка с шестигранником


Комплектация хирургического набора Neo Master KIt

• S-Narrow Финишная фреза



Диаметр	Артикул
Ø2.2	TSDS22CL*
Ø2.7	TSD27CL*

• S-Narrow Кортикальный метчик

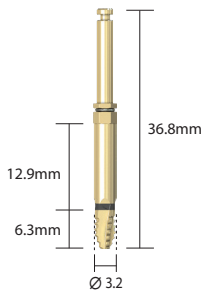

Диаметр	Артикул
Ø3.2	CT32S09*

• S-Narrow Ограничитель фрез

Длина(мм)	8.5	10	11.5	13
Артикул	DS085CS*	DS100CS*	DS115CS*	DS130CS*

* Please order Stopper holder(DSHCS) separately

• S-Narrow Fixture Driver




Тип	Артикул
Contra Angle	ISFDSNCL*


Neo Master KIt - Хирургический протокол

Точечное сверло,Направляющая фреза Lindemann, Начальная фреза, Финишная фреза: Скорость вращения 1200 об./мин., Сила вращения 35~45 Нсм
Кортикальный метчик / Профильный метчик : 50 об./мин., 50 Нсм
Кортикальная фреза : 1200 об./мин., 35-45 Нсм


• IS-III active(IT-III active) Fixture Ø4.0 X 10mm (D1/D2 bone)

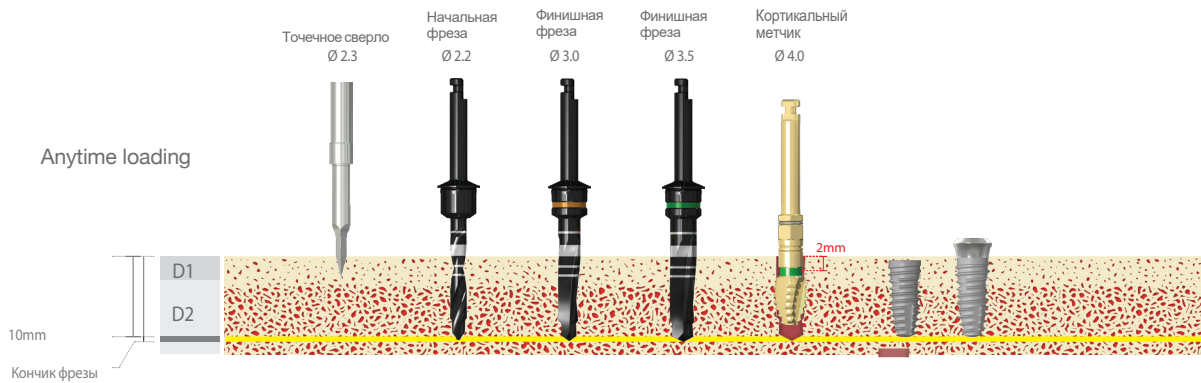


• IS-III active(IT-III active) Fixture Ø4.0 X 10mm (D1/D2 bone)

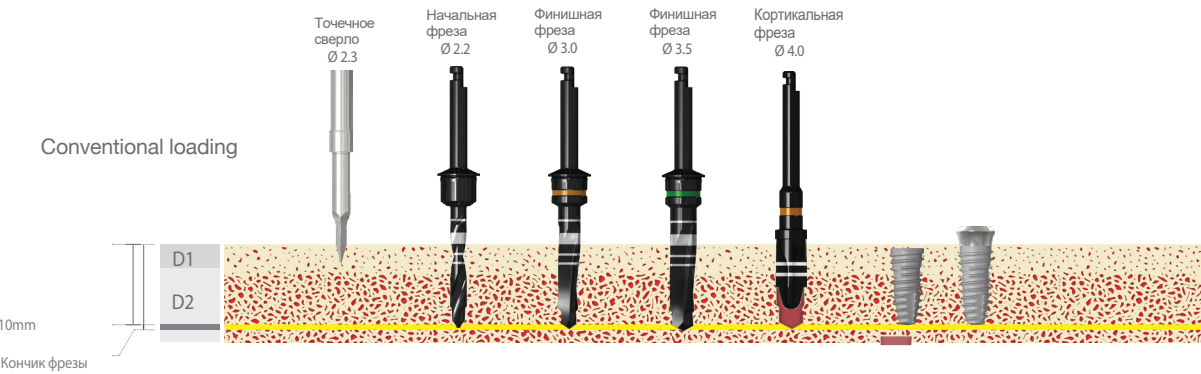


• IS-III active(IT-III active) Fixture Ø4.0 X 10mm (D3/D4 bone)

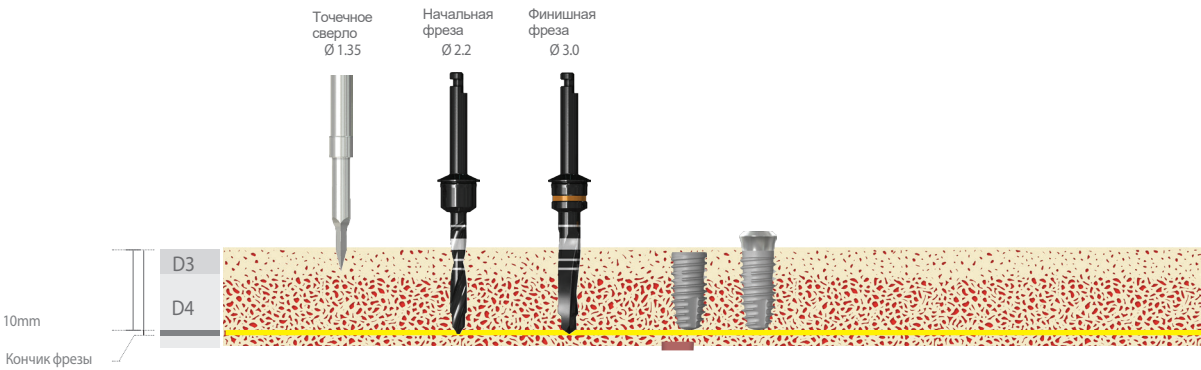

Neo Stop Drill Kit

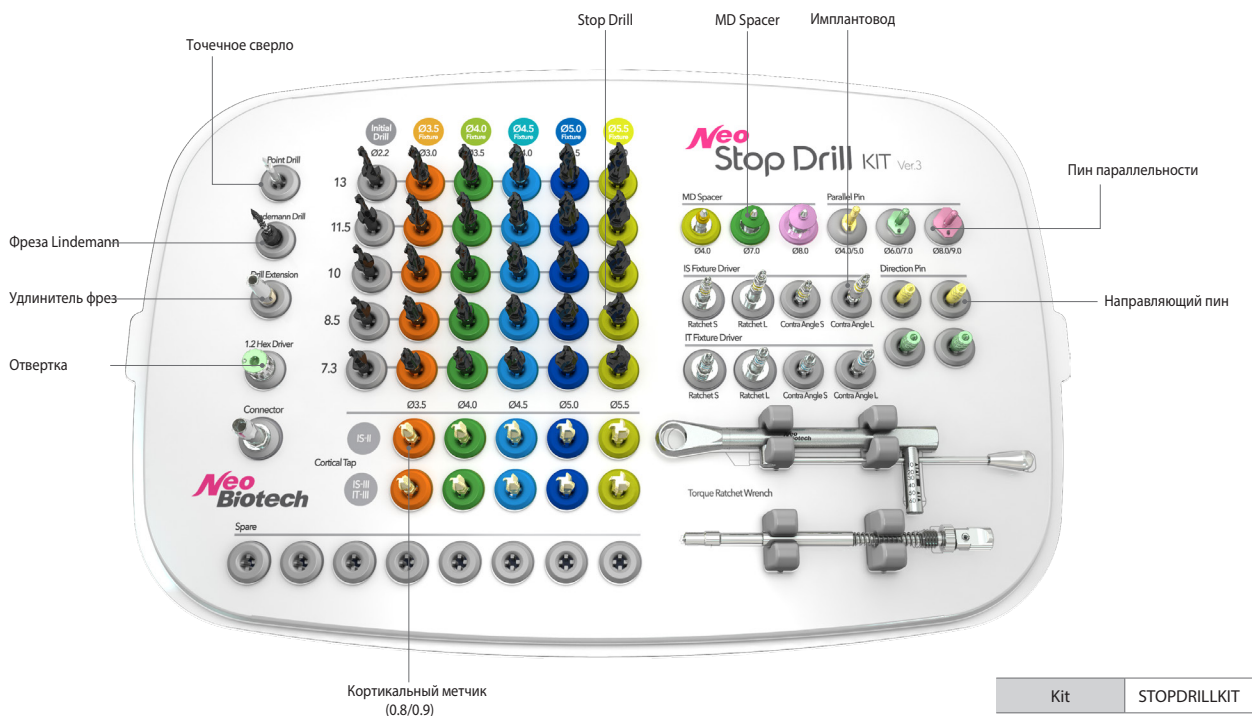

• Особенности сверла

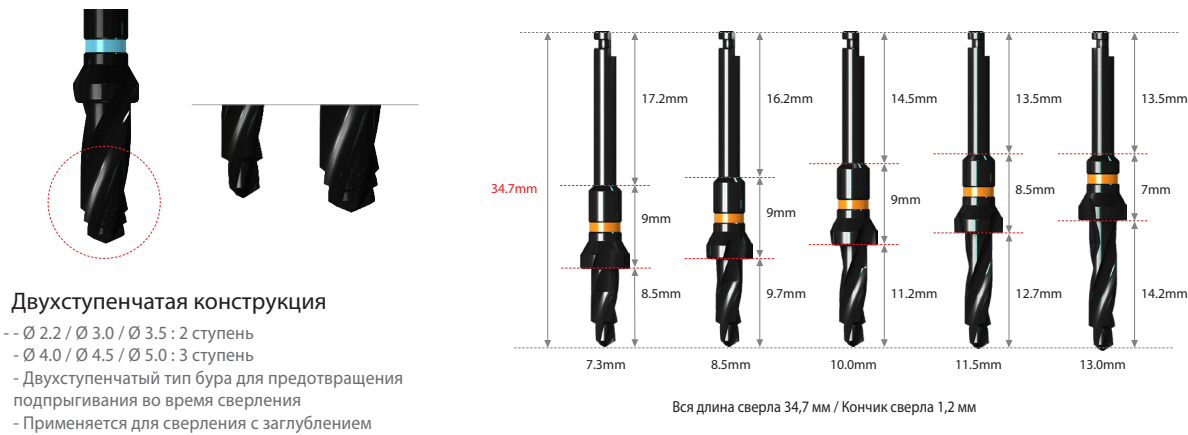

Neo Stop Drill Kit

• Точечное сверло

Диаметр	Ø 1.35
Артикул	PD13

• Фреза Lindemann

Диаметр	Ø 2.3
Артикул	LDS23CS*

*Not Included. Separately Purchasable.

• MD Spacer

Диаметр	Артикул
Ø 4.0	MDS4025
Ø 7.0	MDS7030
Ø 8.0	MDS8030

*Only stopper included. Please order MD Spacer holder(MDSH) separately.

• Stop Drill



Диаметр Ø2.2	Артикул	
	Длина (mm)	Артикул
	7.3	TSD2207F3
	8.5	TSD2208F3
	10.0	TSD2210F3
	11.5	TSD2211F3
	13.0	TSD2213F3



Диаметр Ø4.0	Артикул	
	Длина (mm)	Артикул
	7.3	TSD4007F3
	8.5	TSD4008F3
	10.0	TSD4010F3
	11.5	TSD4011F3
	13.0	TSD4013F3



Диаметр Ø3.0	Артикул	
	Длина (mm)	Артикул
	7.3	TSD3007F3
	8.5	TSD3008F3
	10.0	TSD3010F3
	11.5	TSD3011F3
	13.0	TSD3013F3



Диаметр Ø4.5	Артикул	
	Длина (mm)	Артикул
	7.3	TSD4507F3
	8.5	TSD4508F3
	10.0	TSD4510F3
	11.5	TSD4511F3
	13.0	TSD4513F3



Диаметр Ø3.5	Артикул	
	Длина (mm)	Артикул
	7.3	TSD3507F3
	8.5	TSD3508F3
	10.0	TSD3510F3
	11.5	TSD3511F3
	13.0	TSD3513F3




Диаметр Ø5.0	Артикул	
	Длина (mm)	Артикул
	7.3	TSD5007F3*
	8.5	TSD5008F3*
	10.0	TSD5010F3*
	11.5	TSD5011F3*
	13.0	TSD5013F3*

*Not Included. Separately Purchasable.

Neo Stop Drill Kit


• Кортикальный метчик (IS-II active)

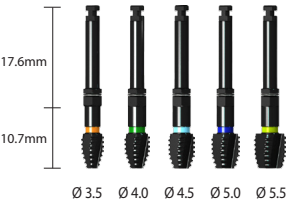

Диаметр	Артикул
Ø 3.5	CT38S08*
Ø 4.0	CT43S08*
Ø 4.5	CT45S08*
Ø 5.0	CT50S08*
Ø 5.5	CT55S08**

**Not Included.
Separately Purchasable.


• Кортикальный метчик (IS-III / IT-III active)

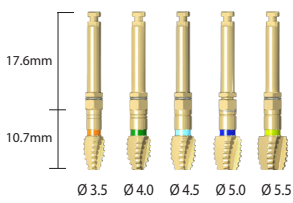

Диаметр	Артикул
Ø 3.5	CT38S09*
Ø 4.0	CT43S09*
Ø 4.5	CT45S09*
Ø 5.0	CT50S09*
Ø 5.5	CT55S09**


**Not Included.
Separately Purchasable.

• IS Имплантовод

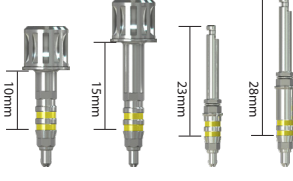

Наименование	Артикул
Ratchet (Short)	ISFD10R*
Ratchet (Long)	ISFD15R*
Contra Angle (Short)	ISFD05C*
Contra Angle (Long)	ISFD05CL*

• IT Имплантовод

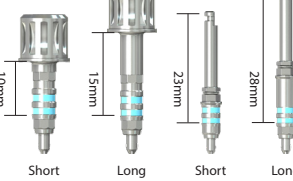

Наименование	Артикул
Ratchet (Short)	ITFDO31RS*
Ratchet (Long)	ITFDO31RL*
Contra Angle (Short)	ITFDO31S*
Contra Angle (Long)	ITFDO31L*

*Optional


• Кортикальная фреза



Диаметр	Артикул
Ø 3.5	CD38*
Ø 4.0	CD43*
Ø 4.5	CD45*
Ø 5.0	CD50*
Ø 5.5	CD55**

**Not Included.
Separately Purchasable.


• Переходник

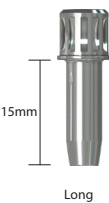

Длина	Артикул
Long	RC15


Neo Stop Drill Kit

• Направляющий пин

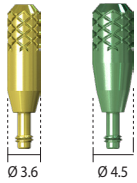


Диаметр	Артикул
Ø 3.6	DP36
Ø 4.5	DP45

• Пин параллельности

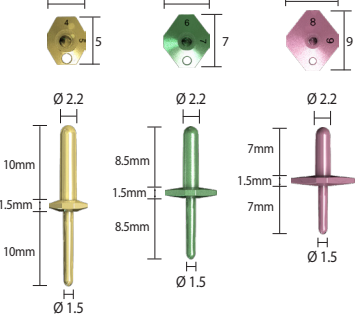

Диаметр	Артикул
Ø 4.0 / Ø 5.0	MDPP4050
Ø 6.0 / Ø 7.0	MDPP6070
Ø 8.0 / Ø 9.0	MDPP8090

• Отвертка с шестигранником

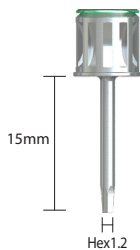

Артикул	HD1215S
---------	---------

• Удлинитель фрез




Артикул	DE01
---------	------

• Динамометрический ключ



Артикул	TW60
---------	------


• Глубиномер & Держатель отвертки

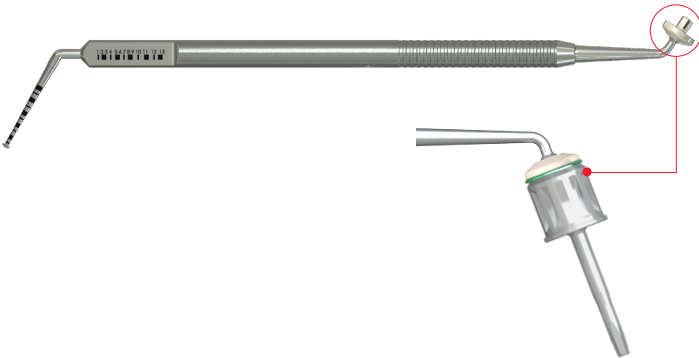


Артикул	DHDG
---------	------

Neo Stop Drill Kit


• IS-III active(IT-III active) имплантат Ø 4.0 X 10mm (D1/D2 bone)

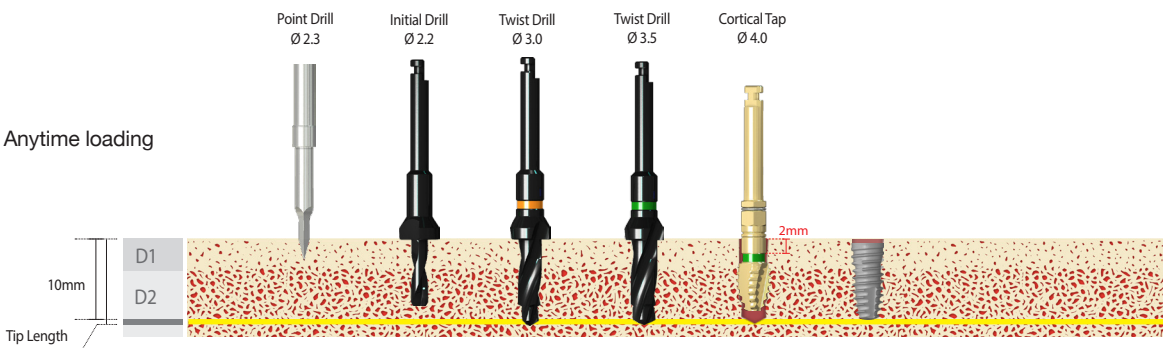

• IS-III active(IT-III active) имплантат Ø 4.0 X 10mm (D1/D2 bone)

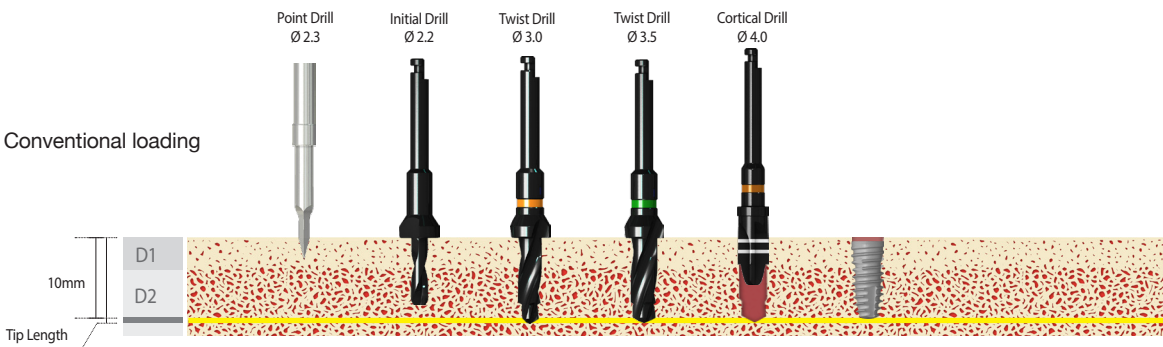


• IS-III active(IT-III active) Fixture Ø 4.0 X 10mm (D3/D4 bone)

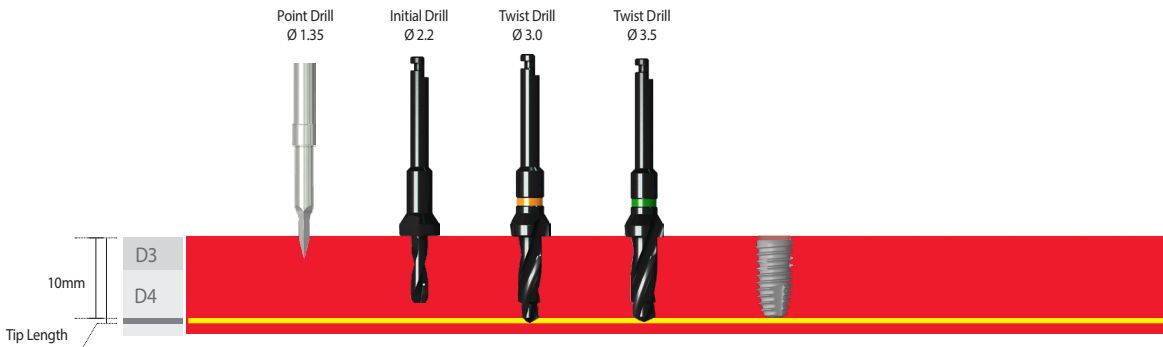

S-Wide Kit

Используется для установки имплантатов IS-II active d=5.5-7.0 мм

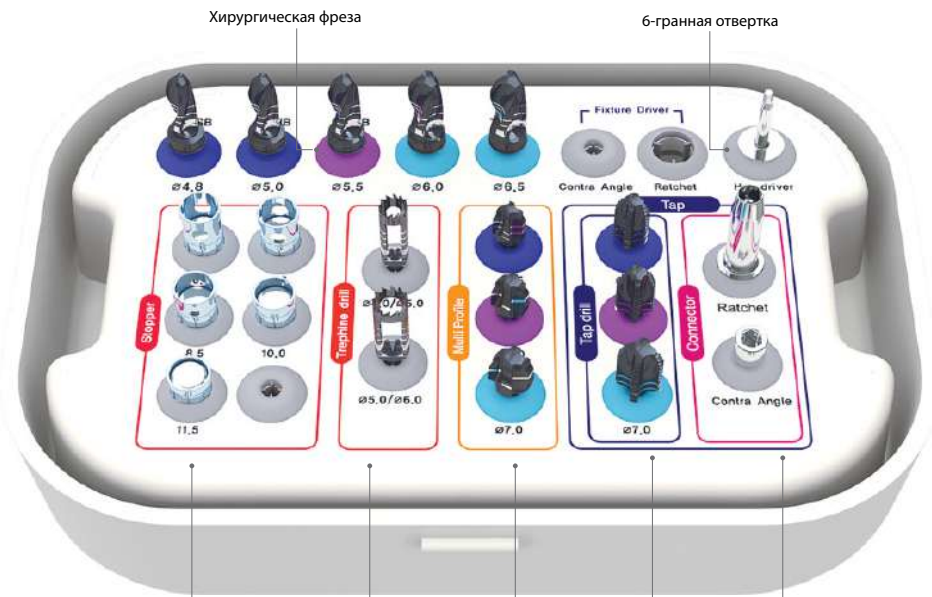

Артикул	SWKIT
---------	-------

• Хирургическая фреза

Диаметр	Артикул
Ø4.8	TSD48
Ø5.0	TSD50
Ø5.5	TSD55
Ø6.0	TSD60
Ø6.5	TSD65

• Кортикальная фреза-профилировщик

Диаметр	Артикул
Ø5.5	MP55
Ø6.0	MP60
Ø7.0	MP70

• Трепан

Диаметр	Артикул
Ø4.0 / Ø5.0	TB40
Ø5.0 / Ø6.0	TB50

• Кортикальный метчик

Диаметр	Артикул
Ø5.5	TD55
Ø6.0	TD60
Ø7.0	TD70

• Стопперы для хирургических фрез

Длина(мм)	6.0	7.0	8.5	10.0	11.5
Артикул	DSL060	DSL070	DSL085	DSL100	DSL115

• 6-гранная отвертка


Тип	Артикул
1.2Hex	HD1212s

• Переходник для кортикального метчика


Тип	Артикул
Ключ	RC10
Угловой наконечник	CAA00

Набор SinusAll (2 в 1 для общего синус-лифтинга)

Набор SinusAll объединяет в себе 2 набора от NeoBiotech : SLA Kit (для открытого синус-лифтинга), SCA Kit (для закрытого синус-лифтинга). SinusAll позволяет проводить синус-лифтинг с имплантацией с использованием одного набора, а не готовить наборы для синуса и хирургический отдельно.


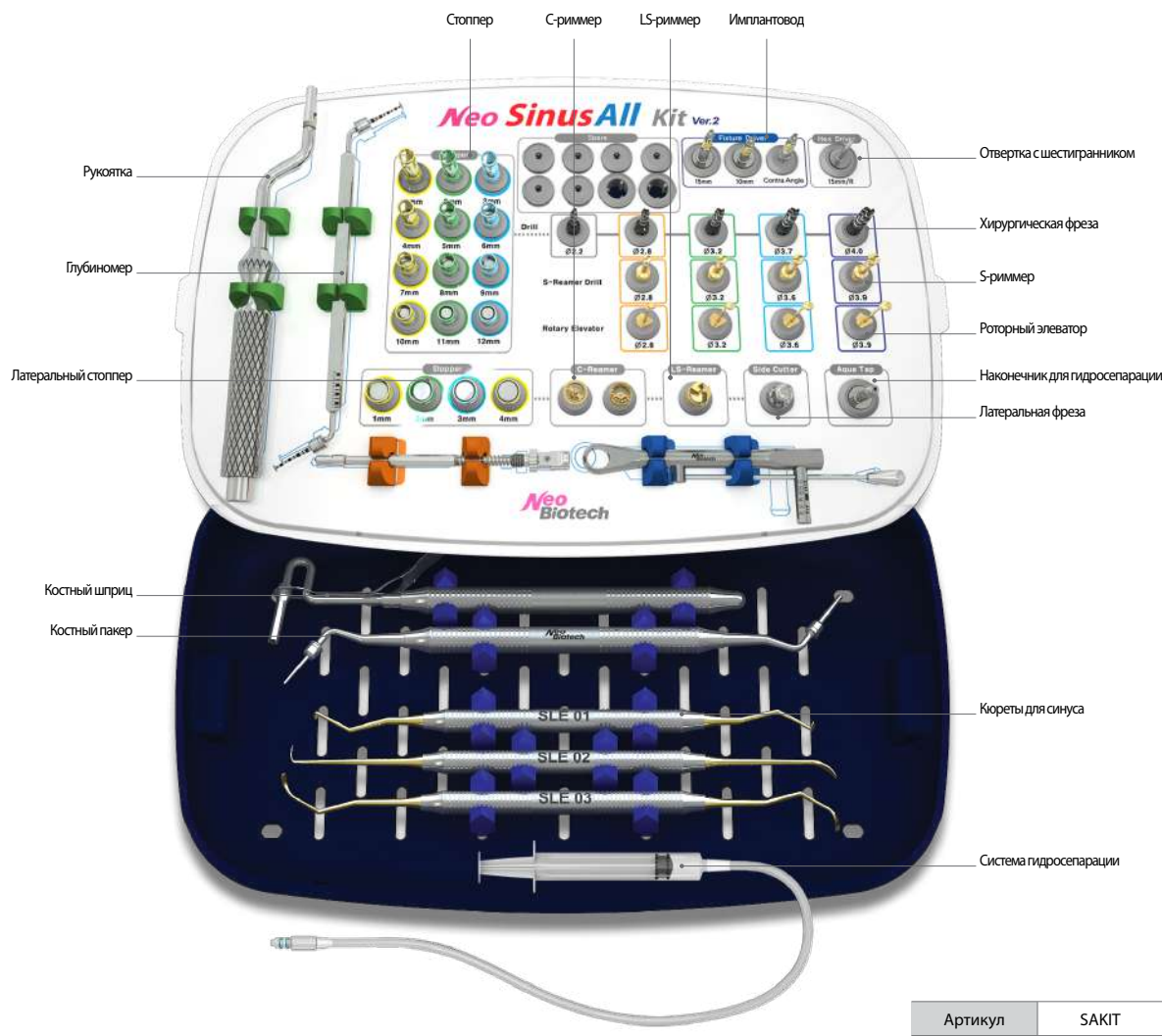


• Хирургическая фреза

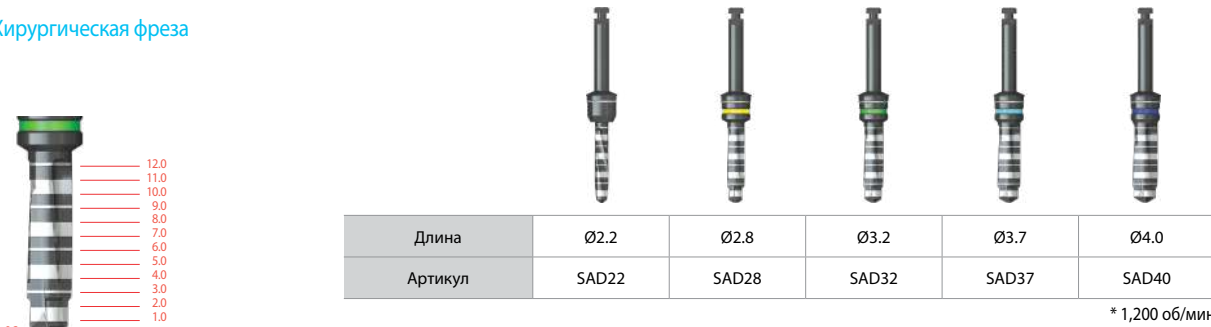


Набор SinusAll (компоненты для закрытого синуса)

• S-риммер

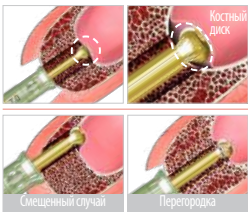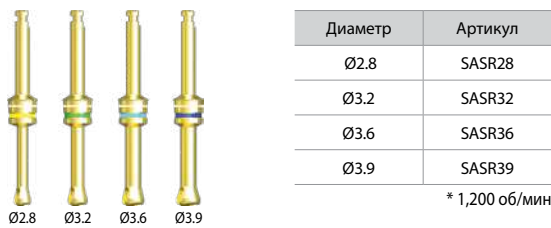



• Роторный элеватор

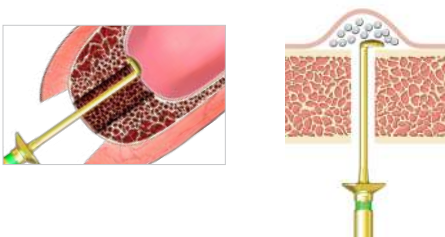

• Стоппер



• Глубиномер

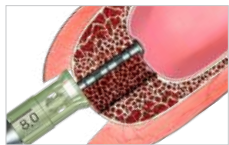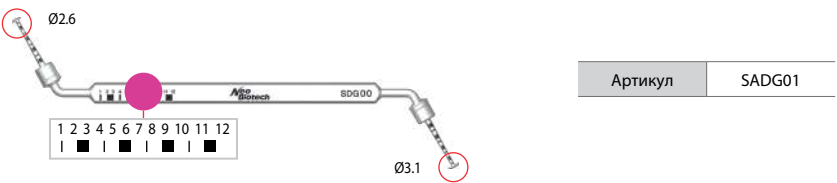


Набор SinusAll (Компоненты для закрытого синуса)

• Наконечник для гидросепарации



Артикул
AQT

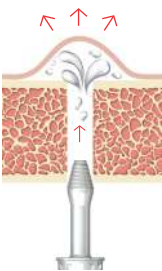

• Система гидросепарации



Артикул
AQST

• Костный шприц



Артикул
JUMB02



• Костный пакер



Артикул
SABC01




• Рукоятка




Артикул
SADH01

Набор SinusAll (Компоненты для открытого синуса)

• LS-риммер

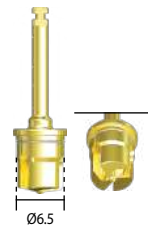


Артикул
SALS640

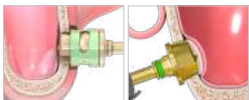


* 2,000 об/мин (20:1) / 5,000 об/мин (1:1)




• C-Guide риммер и C-риммер

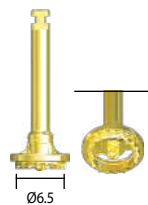

Артикул
SAG610

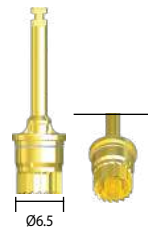

Артикул
SAC640

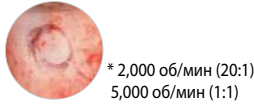

* 2,000 об/мин (20:1)
5,000 об/мин (1:1)

• Кюреты для синуса



Артикул
SLE01




Артикул
SLE02



Артикул
SLE03


• Латеральная фреза

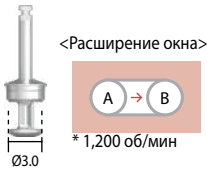

Артикул
SCT30

• Латеральный стоппер

Длина	1mm	2mm	3mm	4mm
Артикул	LTS010	LTS020	LTS030	LTS040

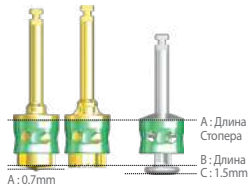


Набор SinusAll (Компоненты инструментов для установки имплантов)

2' y x x . l j s . s ~



у × ~ l .	у с т ~ . j x
/ . y y	QDB / . P
/ 3 y y	QDB / 3P
x s ~ j . x s . s ~ l . x s l ' j . l ~	QDB . 3A

2 4 + s . l l . s j . ' c j .

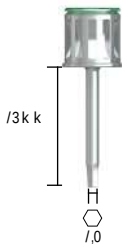


у с т ~ . j x	FB / 0 / 3Q
---------------	-------------

2 y ~ l . y s y ' j c ~ j . ' ~ ~ x , j



у с т ~ . j x	RU 4 .
---------------	--------

Набор SCA Kit (для закрытого синус-лифтинга)

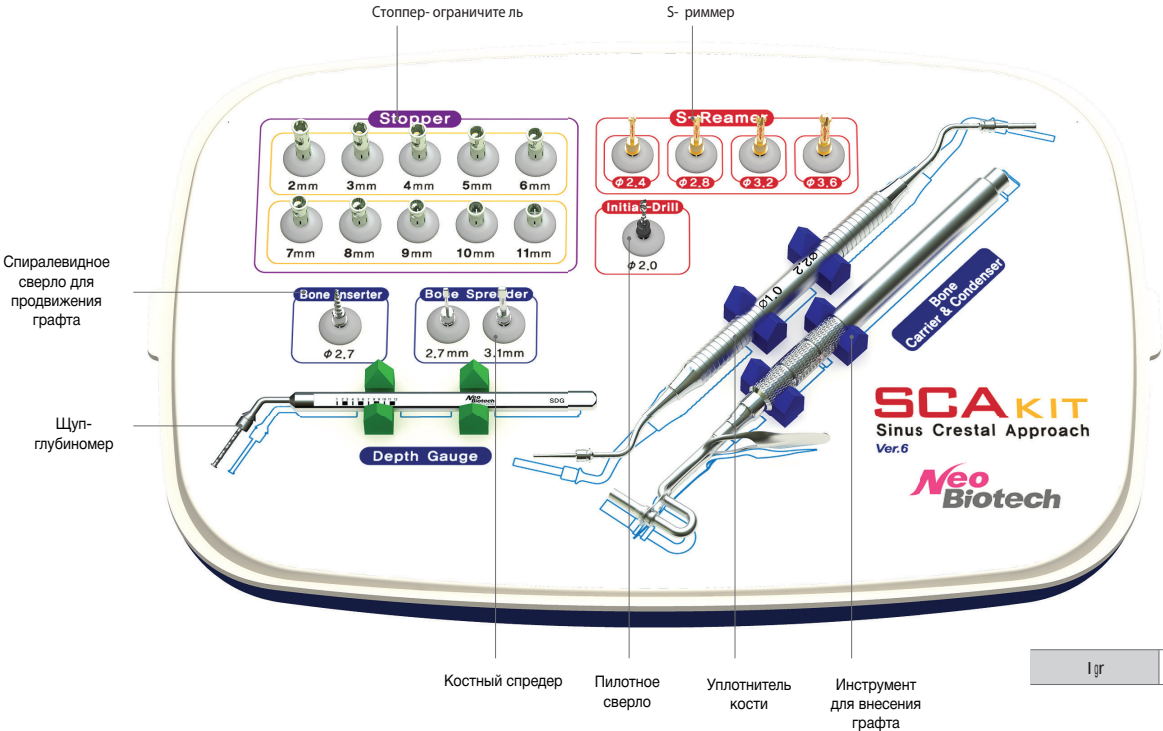

l gr	QA ? IGR
------	----------

у с т ~ . j x QA ? IGR

2 > ~ x s j l s ' j . ' c x s



у ~ . y ' j c	у с т ~ . j x
Ё 0 .	QQB 0 . (/ ' 0 . . s . - y ~ l

2 Q + c ~ y y ' c



у ~ . y ' j c	у с т ~ . j x
Ё 0.2	AP02
Ё 0.6	AP06
Ё 1.0	AP10
Ё 1.4	AP14 (/ ' 0 . . s . - y ~ l

Набор SCA Kit (для закрытого синус-лифтинга)

• Стоппер-ограничитель

										
Длина	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm	7mm	8mm	9mm	10mm	11mm
Артикул	SKS02	SKS03	SKS04	SKS05	SKS06	SKS07	SKS08	SKS09	SKS10	SKS11

• Щуп-глубиномер



Артикул
SDG00

• Инструмент для внесения графта



Артикул
JUMB02

• Уплотнитель кости



Артикул
SBC01

• Спиралевидное сверло для продвижения графта



Артикул
SBI27
* 80 об/мин

• Костный спредер



Диаметр	Артикул
Ø2.7	SBS20
Ø3.1	SBS30
	* 80 об/мин

Набор SCA Kit (для закрытого синус - лифтинга)

• Инструкция по применению




Начальное сверление

Используйте стопер на 1 мм длиннее остаточной высоты кости перед окончательным сверлением. Формируйте отверстие до контакта с внутренней кортикальной пластинкой дна пазухи. Скорость сверла 1200 об/мин.



Использование S-риммера

При использовании риммера малого диаметра, углубляйтесь не доходя 1 мм до границы с пазухой. При переходе к большему диаметру риммера используйте его со стопером на 1 мм короче остаточной длины для контакта поверхности риммера со слизистой пазухи.

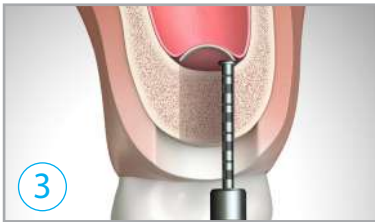

Использование щупа-глубиномера

Проверьте глубину сформированного отверстия.



Инструмент для внесения костного графта

Внесите порцию материала с помощью инструмента. Одномоментная порция 0,05 см³. Для создания высоты материала 1 мм необходимо 2 порции.



Уплотнитель кости

Протолкните и уплотните материал с помощью конденсора. Для большего контроля используйте стопер.



Спиралевидное сверло для внесения графта

Используется с угловым наконечником и стопером на 1 мм длиннее заданной глубины. Скорость вращения сверла 80 об/мин. Необходимо для продвижения внесенного материала вглубь сформированной полости.



Костный спредер

Для равномерного латерального распределения костной крошки используйте спредер с угловым наконечником и скоростью вращения 80 об/мин. Рекомендовано использовать спредер после внесения 2 порций материала.



Финальное сверление и имплантация

Сформируйте окончательное отверстие соответствующим диаметру имплантата сверлом. Установите имплантат.

Набор SLA Kit (для открытого синус-лифтинга)

Кюреты-элеваторы

Elevator

1

2

3

C-Guide ример

C-ример

LS-ример

SLAKIT Sinus Lateral Approach Ver.7 Neo Biotech

Артикул	SLAKIT
---------	--------

• LS-ример

Длина	2.0mm	2.0mm	2.0mm	3.5mm	3.5mm	3.5mm
Диаметр	Ø5.5	Ø6.5	Ø7.5	Ø5.5	Ø6.5	Ø7.5
Артикул	LS520	LS620	LS720	LS535	LS635	LS735

* Скорость - 1:1 угловой наконечник -5,000 об/мин / 1:20 угловой наконечник-2,000 об/мин

• C-Guide ример и C-ример

C-Guide ример

C-ример

Длина	1.0mm	1.0mm	1.0mm	2.0mm	2.0mm	2.0mm	3.5mm	3.5mm	3.5mm
Диаметр	Ø5.5	Ø6.5	Ø7.5	Ø5.5	Ø6.5	Ø7.5	Ø5.5	Ø6.5	Ø7.5
Артикул	SCG510	SCG610	SCG710	LC520	LC620	LC720	LC535	LC635	LC735

* Скорость - 1:1 угловой наконечник -5,000 об/мин / 1:20 угловой наконечник-2,000 об/мин

Набор SLA Kit (для открытого синус-лифтинга)

• Кюреты-элеваторы

Артикул	SLE05
Артикул	SLE02
Артикул	SLE03

• Инструкция по применению

1

LS- ример

Сформируйте доступ к поверхности альвеолярного отростка.

2

LS- ример

Сформируйте латеральный доступ с помощью LS-риммера. Держите ример в вертикальном устойчивом положении во время сверления. Обе стороны лезвия римера должны контактировать с костью на всем протяжении сверления. Скорость сверла 2000 об/мин.

3

LS-ример

LS-ример формирует тонкий остаточный костный диск на поверхности мембраны.

4

Отслаивание мембраны

Используйте элеватор №1 для отслаивания мезиально-дистальной поверхности мембраны.

5

Поднятие мембраны


Элеватор №2 для отслаивания нижней поверхности мембраны. Элеватор №3 для отслаивания передней и задней областей мембраны.

6

Костный трансплантат

Внесите необходимо количество костного материала в сформированную полость. Закройте латеральное отверстие коллагеновой мембраной. Уложите лоскут на место и ушейте рану.

Набор Universal Prosthetic Kit

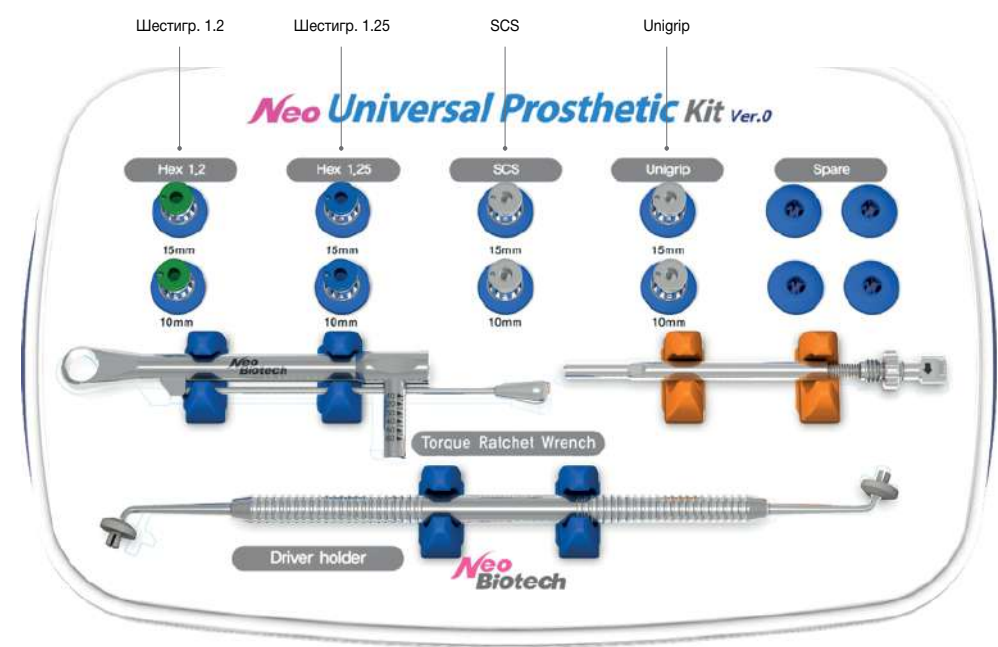

Артикул UVPRTKIT

• Отвертки




Длина	10.0mm	15.0mm	10.0mm	15.0mm	10.0mm	15.0mm	10.0mm	15.0mm
Наименование	Unigrip Driver		SCS Driver		1.25 Hex Driver (0.5")		1.2 Hex Driver (0.48")	
Артикул	WUGD10S	WUGD15S	WSCSD10S	WSCSD15S	HD12510S	HD12515S	HD1210S	HD1215S
Совместимость с системой	Nobel Biocare Implant Direct Swishplait Southern Implants Neoss		Straumann Implant Direct Replant		Biohorizons Zimmer, Astra Implant Direct Legacy Camlog, MIS, Dentis, Dentium		Neobiotech Biomet 3i Dentsply-Friadent, Xive, Osstem, DIO, Megagen	

• Динамометрический ключ




Артикул TW60

• Держатель шестигранной отвертки

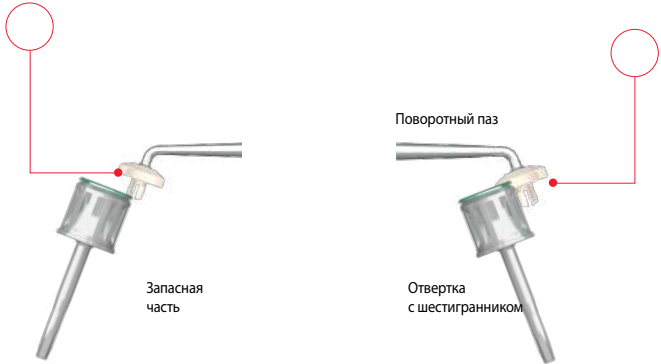


Артикул DH01

Neo Prosthetic Kit

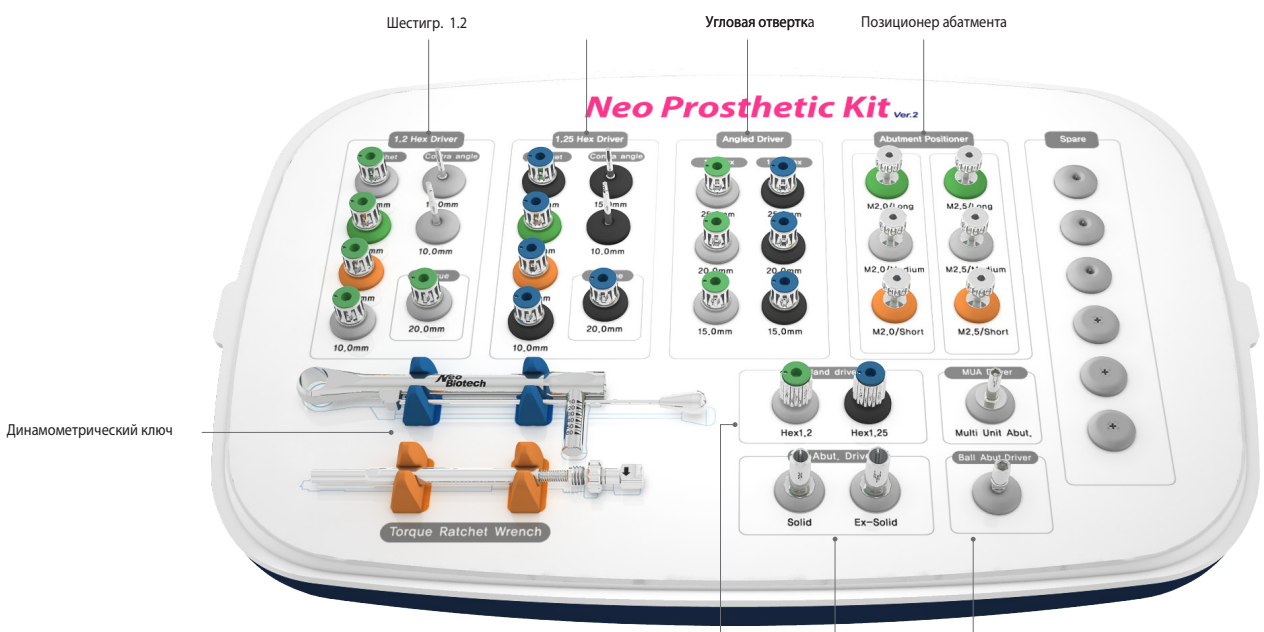


Кит PRTKIT

• Угловая отвертка

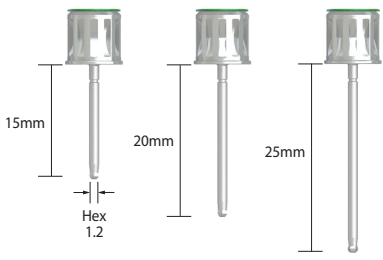

Length(mm)	Product name
15	HDA1215S
20	HDA1220S
25	HDA1225S*

*Not Included. Separately Purchasable.

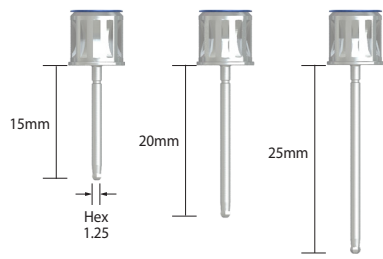


Length(mm)	Product name
15	HDA12515S
20	HDA12520S
25	HDA12525S*

*Not Included. Separately Purchasable.



Скругленный шестигранник

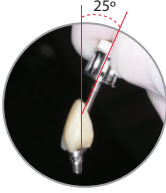


Угол доступа макс. 25°
Максимально 30 Ncm




Шейка рукоятки сконструирована таким образом, чтобы ее можно было сломать при давлении 35 Нсм для предотвращения перелома шестигранного наконечника

Neo Prosthetic Kit

• 1.2 Hex Driver

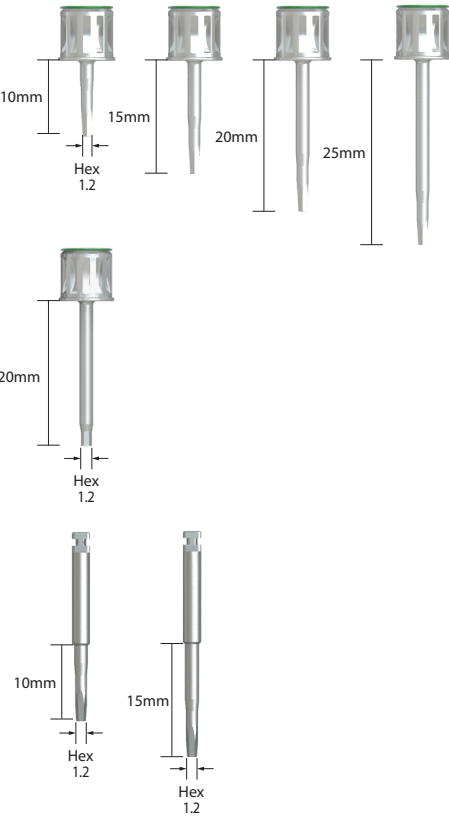

• 1.25 Hex Driver

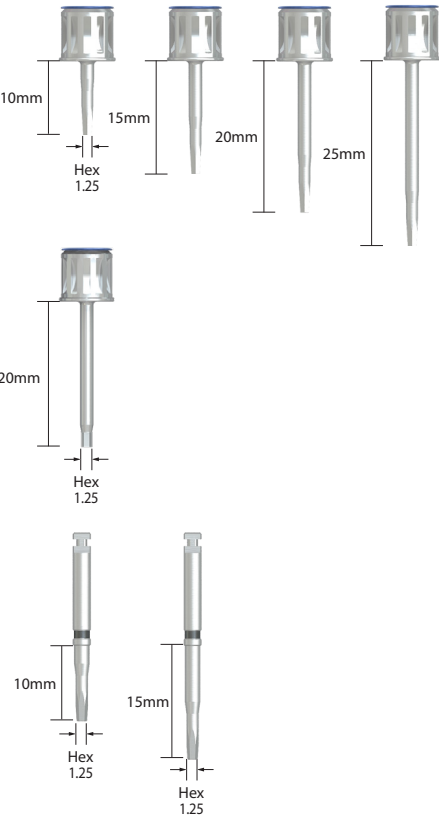

Ratchet

Length(mm)	Product name
10	HD1210S
15	HD1215S
20	HD1220S
25	HD1225S

Rescue

Length(mm)	Product name
20	HD1220RCS

Contra Angle

Length(mm)	Product name
10	HDC1210
15	HDC1215

Ratchet

Length(mm)	Product name
10	HD12510S
15	HD12515S
20	HD12520S
25	HD12525S

Rescue


Length(mm)	Product name
20	HD12520RCS

Contra Angle

Length(mm)	Product name
10	HDC12510
15	HDC12515

• Позиционер абатмента

Используется для определения точного положения шестигранника и направления абатмента одной рукой.

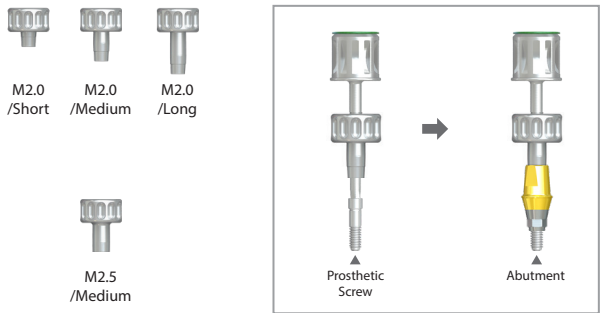

Type	Product name
M2.0/Short(2mm)	AP202N
M2.0/Medium(5mm)	AP205N
M2.0/Long(7mm)	AP207N
M2.5/Medium(5mm)	AP255N

*Abutment Positioner Holder : APH

• Дополнительные компоненты



Multi Unit
Отвертка



Отвертка шарикового
абатмента

Multi Unit Abutment Driver

Product name	MUAD48S*
* Not Included. Separately Purchasable.	

Ball Abutment Driver


Product name	BADH24*
* Not Included. Separately Purchasable.	

• Динамометрический ключ



Product name	TW60
--------------	------


• Slot Driver

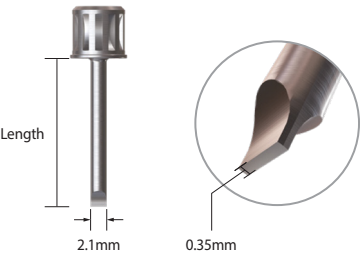

Length(mm)	Product name
10	SLOTD1210S
15	SLOTD1215S

* Not Included.
Separately Purchasable.

Набор для извлечения интегрированных имплантов FR-kit (Neo Fixture Remover Kit)

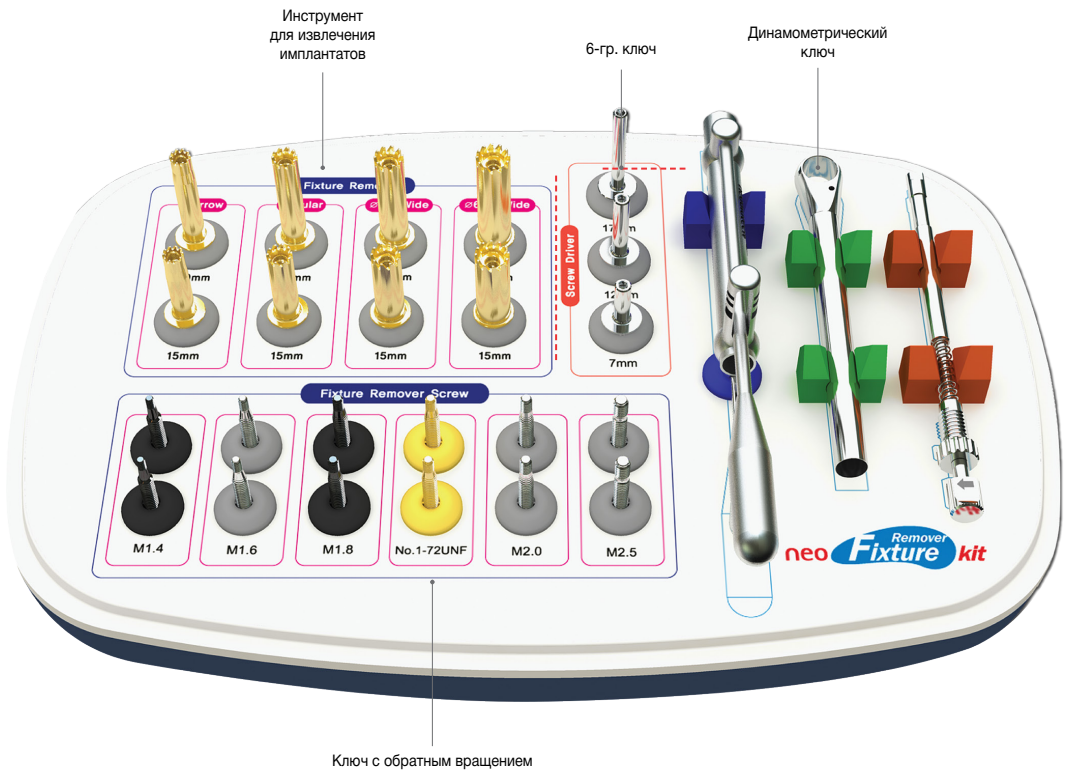

Артикул	FRKIT
---------	-------

• Ключ с обратным вращением




Размер винта	Артикул
M1.4	FRS14
M1.6	FRS16
M1.8	FRS18
1-72UNF	FRS172
M2.0	FRS20
M2.5	FRS25



Набор для извлечения интегрированных имплантов FR-kit (Neo Fixture Remover Kit)

• 6-гр. ключ

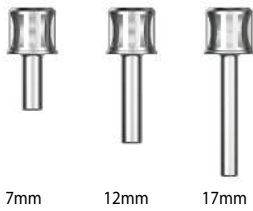

Длина	Артикул
7mm	HDF1607
12mm	HDF1612
17mm	HDF1617



Ключ с обратным вращением

• Инструмент для извлечения имплантатов



Тип	Длина	Артикул
Узкий	15mm	FR315
	20mm	FR320
Стандартный	15mm	FR415
	20mm	FR420
Диаметр (Ø5)	15mm	FR515
	20mm	FR520
Диаметр (Ø6 ~ 8)	15mm	FR615
	20mm	FR620




• Динамометрический ключ



Тип	Артикул
Ретчет	TW80400
Динамометр	FRCHT


Набор для извлечения интегрированных имплантов FR-kit (Neo Fixture Remover Kit)

• Инструкция по применению

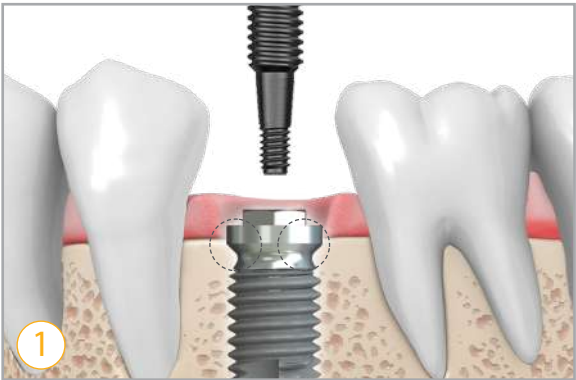


Имплант, подлежащий удалению

Полностью удалите ортопедические конструкции с имплантанта, подлежащего замене.

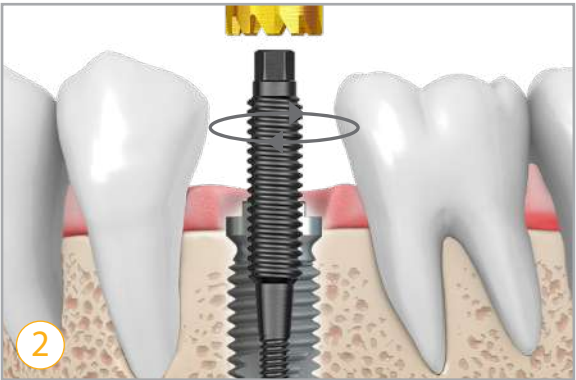


Ключ с обратным вращением

Выберите необходимый размер ключа с обратным вращением. Присоедините его к 6-гранной отвертке и затяните по часовой стрелке к импланту.

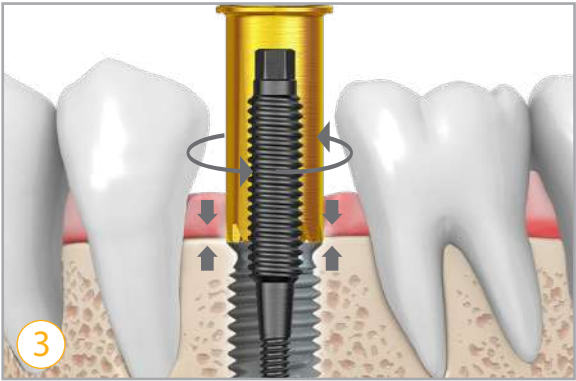


Извлечение импланта

Выберите необходимый размер инструмента для извлечения импланта. Присоедините выбранный инструмент к ключу с обратным вращением и затяните против часовой стрелки, пока он полностью не зафиксируется на импланте. Используя динамометрический ключ, приложите крутящий момент против часовой стрелки, пока имплант не начнет двигаться.

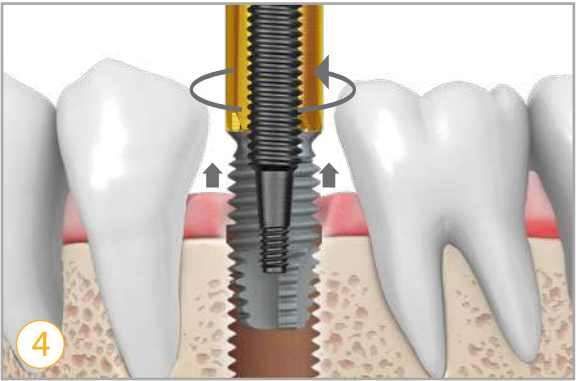

Извлеките имплант

Набор для извлечения винтов из имплантов SR-kit (Neo Screw Remover Kit)

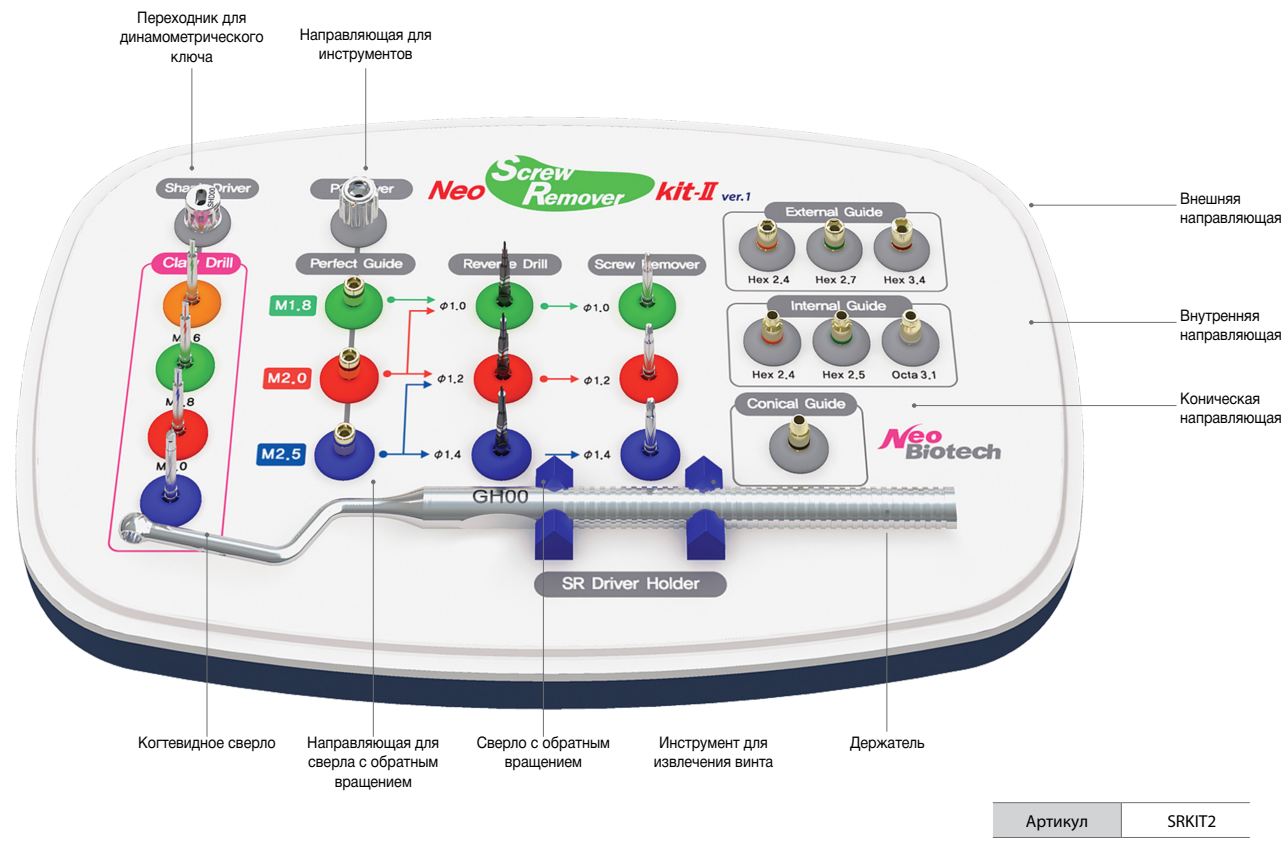


• Когтевидное сверло



Размер	Артикул
M1.6	CD16
M1.8	CD18
M2.0	CD20
M2.5	CD25

* 80 об/мин

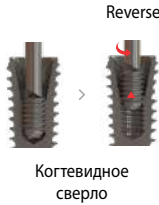

• Сверло с обратным вращением (реверсивное сверло)



Размер винта	Диаметр	Артикул
M1.8	Ø1.0	RCD10
M2.0	Ø1.2	RCD12
M2.5	Ø1.4	RCD14

* Для размера винта M 1.6 используйте когтевидное сверло для извлечения со скоростью 2000 об/мин

Набор для извлечения винтов из имплантов SR-kit (Neo Screw Remover Kit)

• Инструмент для извлечения винта



Совместимость	Диаметр	Артикул
M1.8	Ø1.0	SR10
M2.0	Ø1.2	SR12
M2.5	Ø1.4	SR14

* приблизительная скорость около 80 об/мин



Инструмент для извлечения винта

• Переходник для динамометрического ключа



Совместимость	Артикул
SR10, SR12, SR14	SHD00

* подходит для использования с инструментом для извлечения винта и когтевидным сверлом



Инструмент для извлечения винта



Переходник
Когтевидное сверло

• Направляющая для сверла с обратным вращением



Сверло	Размер винта	Диаметр	Артикул
RCD10	M1.8	Ø1.0	PG1018
RCD10 RCD12	M1.8, M2.0	Ø1.2	PG1220
RCD12 RCD14	M2.0, M2.5	Ø1.4	PG1425

• Направляющая для инструментов



Совместимость	Стандарт	Артикул
PG1018, PG1220, PG1425	2.5 6-гр.	PGHD25SS



Направляющая для инструментов

Направляющая для сверла с обратным вращением

Набор для извлечения винтов из имплантов SR-kit (Neo Screw Remover Kit)

• Коническая направляющая



Описание	Стандарт	Артикул
11° / 8°	11° / 8° коническое соединение	CG00

• Внутренняя направляющая



Описание	Стандарт	Артикул
2.4 6-гр. внутреннее соединение	2.4 6-гр.	IHG24
M2.0 имеет 2.5 6-гр.внутреннее соединение	2.5 6-гр.	IHG25
3.1 8-гр. внутреннее соединение	3.1 8-гр.	IOG31

• Внешняя направляющая




Описание	Стандарт	Артикул
2.4 6-гр. внешнее соединение	2.4 6-гр.	EHG24
2.7 6-гр. внешнее соединение	2.7 6-гр.	EHG27
3.4 6-гр. внешнее соединение	3.4 6-гр.	EHG34

• Держатель



Описание	Артикул
Коническая направляющая: CG00	GH00
Внутренняя направляющая: IHG24, IHG25, IOG31	
Внешняя направляющая: EHG24, EHG27, EHG34	

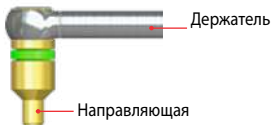

Держатель


Направляющая

Набор для извлечения винтов из имплантов SR-kit (Neo Screw Remover Kit)


• Инструкция по применению



Сломанный винт

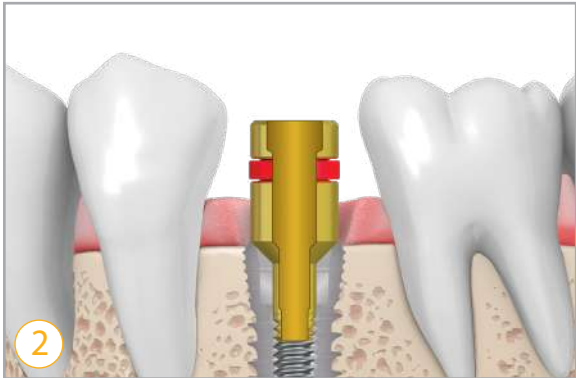


Направляющая для сверла с обратным вращением (реверсивного сверла)
Выберите подходящий размер направляющей для сверла с обратным вращением. Используя направляющую для инструментов, затяните направляющую для сверла к импланту по часовой стрелке до соприкосновения с винтом внутри импланта.

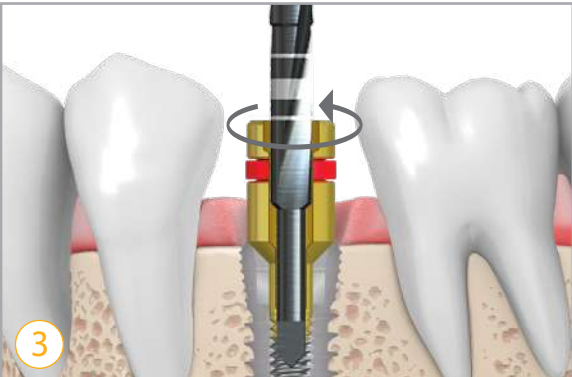

Сверло с обратным вращением (реверсивное сверло)

Выберите подходящий размер реверсивного сверла и соедините его с угловым наконечником. Введите реверсивное сверло в направляющую для реверсивного сверла, присоединенную к импланту. Против часовой стрелки на скорости 2000 об/мин углубитесь сверлом на 1-2мм в поверхность сломанного винта. Проверьте маркировочную линию на сверле (интервал маркировки 1 мм) и охлаждаете ирригацией на всем протяжении сверления.

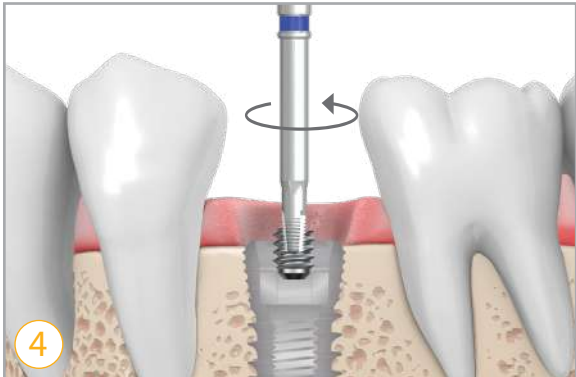


Инструмент для извлечения винта

Отсоедините направляющую для реверсивного сверла от импланта. Выберите подходящий размер инструмента для извлечения винта,соответствующий размеру сформированного отверстия после реверсивного сверла. Соедините инструмент для извлечения винта с угловым наконечником и медленно, со скоростью не более 80 об/мин, нажимая на сломанный винт с достаточным усилием, извлеките его.

Набор Neo NaviGuide Kit


Этот набор рекомендован для установки имплантатов neobiotech IS-II active и IS-III active D=3.5/4.0/4.5/5.0 со втулками для хирургических шаблонов SGS70RW, CSGS70RW

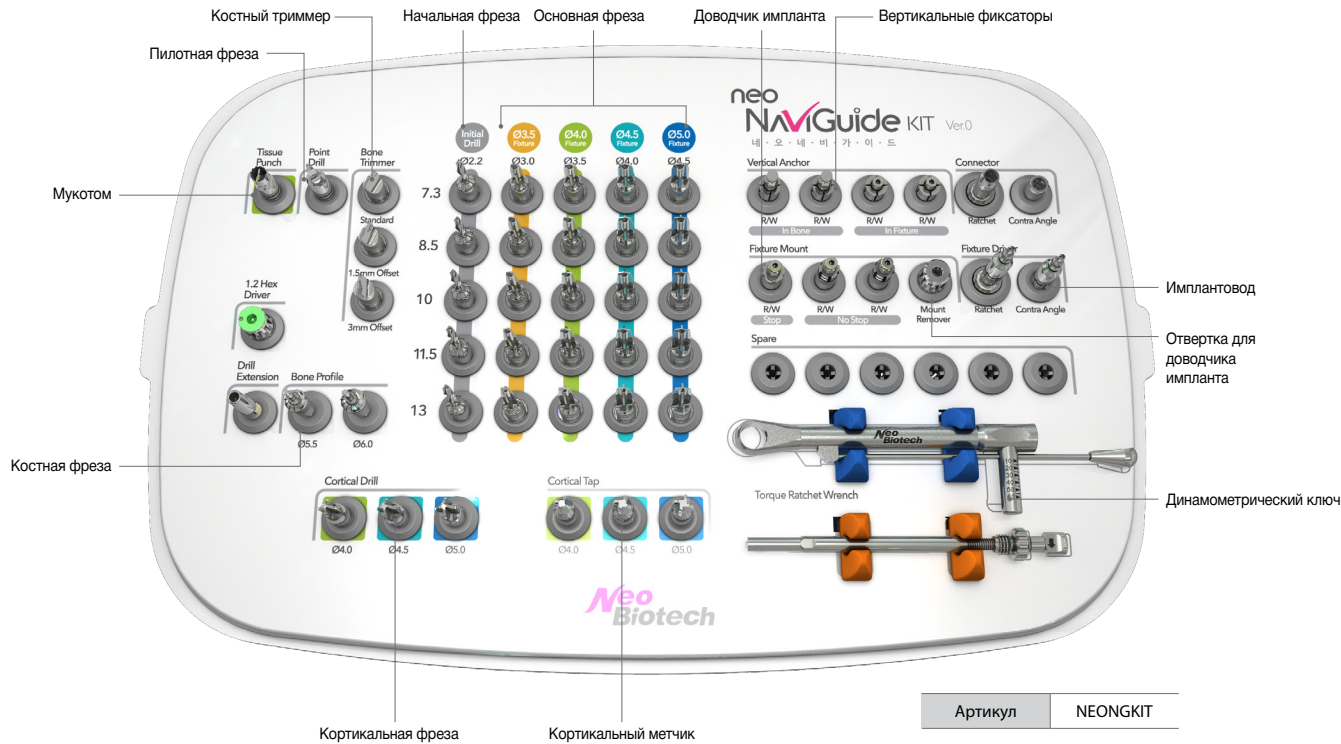

• Руководство по длине фрезы




• Рекомендации по смещению втулки

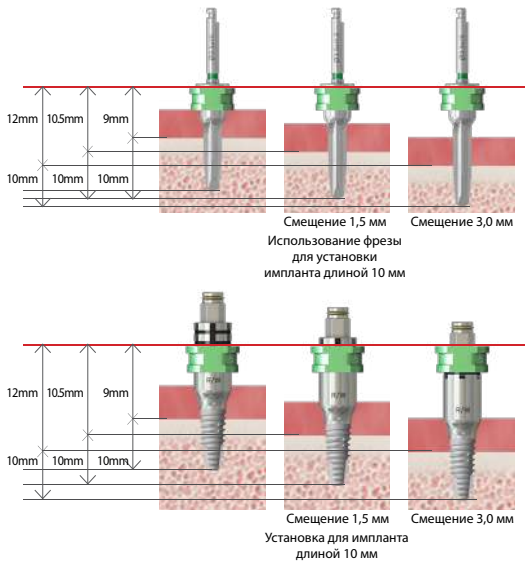


Набор Neo NaviGuide Kit

• Мукотом

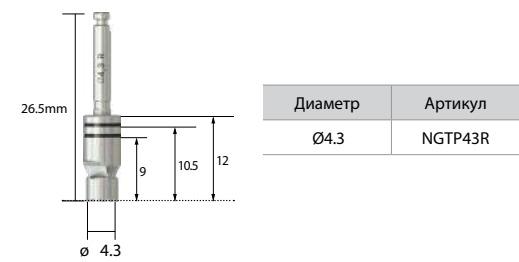


• Пилотная фреза

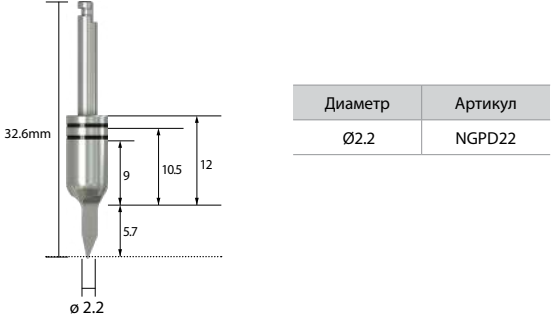

• Костный триммер



• Ø2.2 Начальная фреза

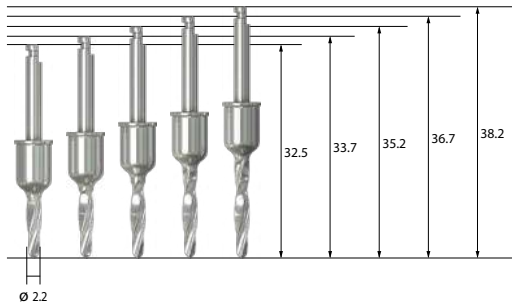


• Кортикальная фреза




Набор Neo NaviGuide Kit


• Ø3.0 Основная фреза

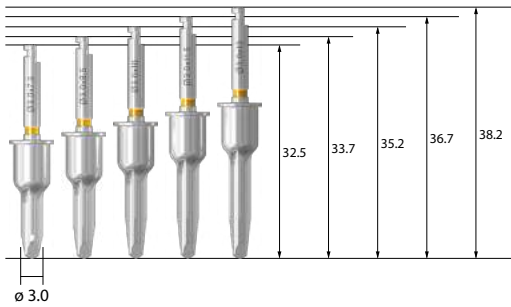


• Ø3.5 Основная фреза

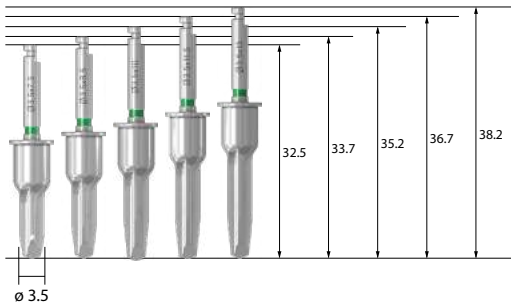

• Ø4.0 Основная фреза

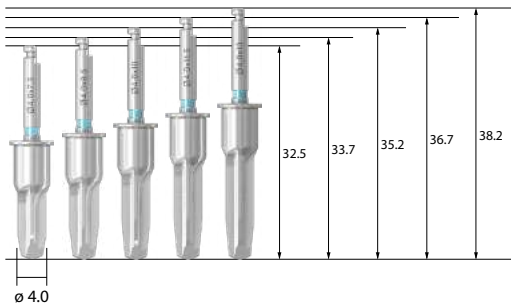


• Ø4.5 Основная фреза

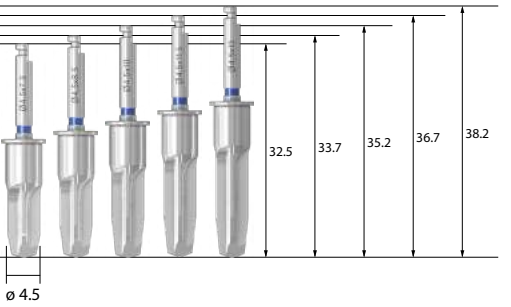

Набор Neo NaviGuide Kit

• Кортикальный метчик (IS-II Active)

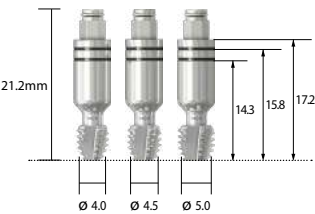

Диаметр	Артикул
Ø4.0	NGISCT40R
Ø4.5	NGISCT45R
Ø5.0	NGISCT50W

• Вертикальные фиксаторы



Тип	Артикул
В кость	SGVABRW



Тип	Артикул
В имплантат	SGISVAFRW

• Доводчик импланта



Тип	Артикул
Со стоппером	SGISFARW




Тип	Артикул
Без стоппера	SGISFARW30

• Имплантовод



Тип	Артикул
Для ключа-трещотки	NGISFDR

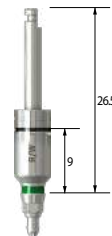

Тип	Артикул
Для углового наконечника	NGISFDCA

• Переходник



Тип	Артикул
Для ключа-трещотки	SGRC10



Тип	Артикул
Для углового наконечника	SGCAC00


Набор Neo NaviGuide Kit

• отвертка для доводчика имплантата



Артикул	SGFART20
---------	----------

• Шестигранная отвертка

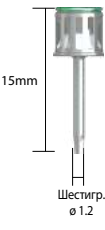

Артикул	HD1215S
---------	---------

• Удлинитель фрез



Артикул	DE01
---------	------



Диаметр	Артикул
Ø5.5	ISBP55
Ø6.0	ISBP60

• Костная фреза для ремоделирования кости


• Динамометрический ключ




Артикул	TW60
---------	------

Приобретается дополнительно

• Втулка для хирургического шаблона

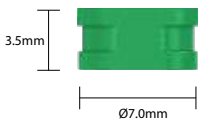


Тип	Артикул
R/W C-Sleeve	SGS70RW
Подходят для установки имплантов Ø = 3.5-5.0 мм Наружный диаметр Ø7.0 мм	

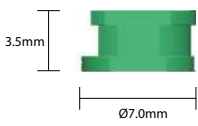

Тип	Артикул
R/W C-Sleeve	CSGS70RW
Подходят для установки имплантов Ø = 3.5-5.0 мм Наружный диаметр Ø7.0 мм	


• Аналог имплантата

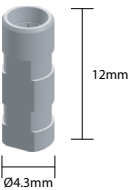


Артикул	SGISLA500
---------	-----------

Протокол последовательности использования фрез навигационного набора NEONGKIT


• IS-II active имплантат Ø5.0 X 10mm / смещение втулки (оффсет) 0 мм (кость D1/D2)

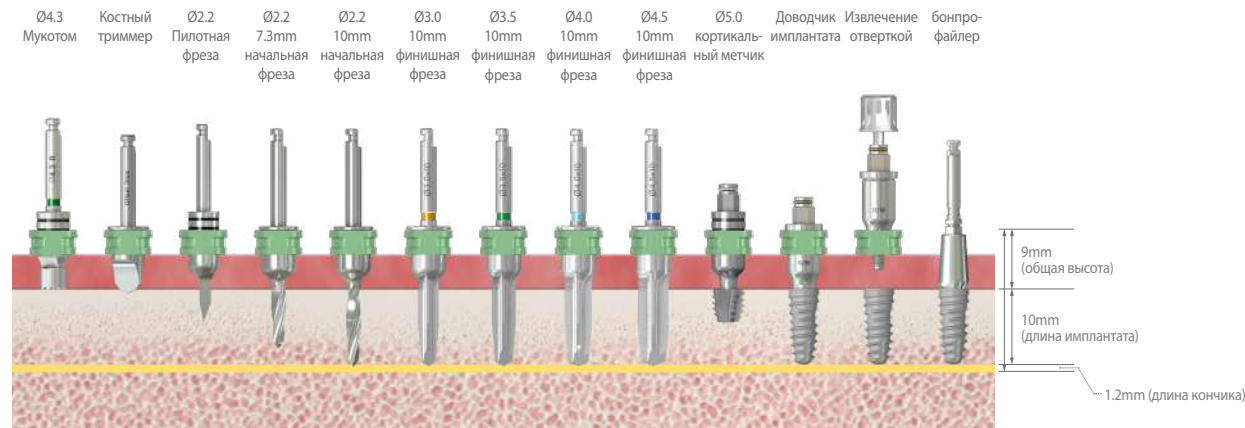

• IS-II active имплантат Ø5.0 X 10mm / смещение втулки (оффсет) 1.5 мм (кость D1/D2)

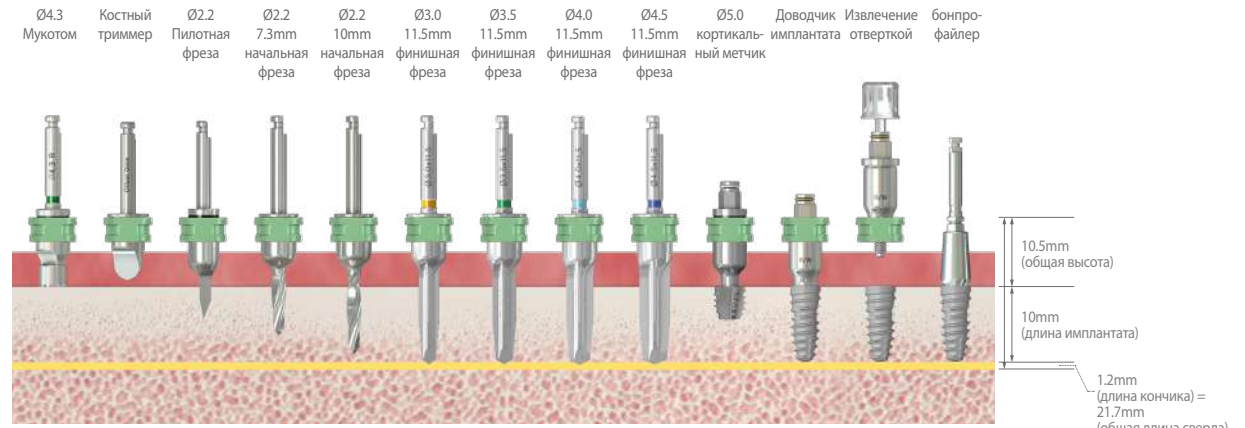


• IS-II active имплантат Ø5.0 X 10mm / смещение втулки (оффсет) 3.0 мм (кость D1/D2)

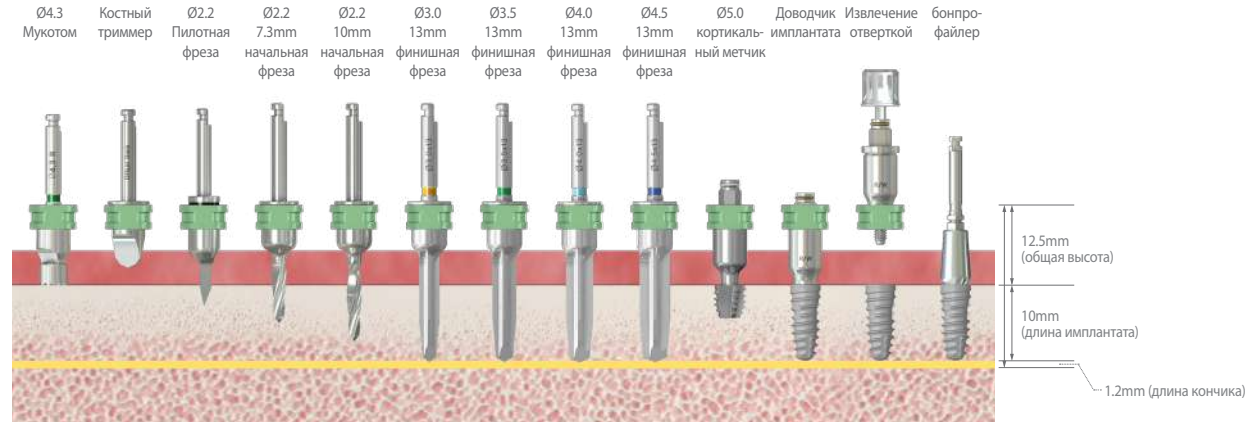


Neo NaviGuide Narrow Kit

Этот набор может использоваться для установки имплантов IS-II active, IS-III active диаметром 3,5 мм с узкой втулкой (narrow)

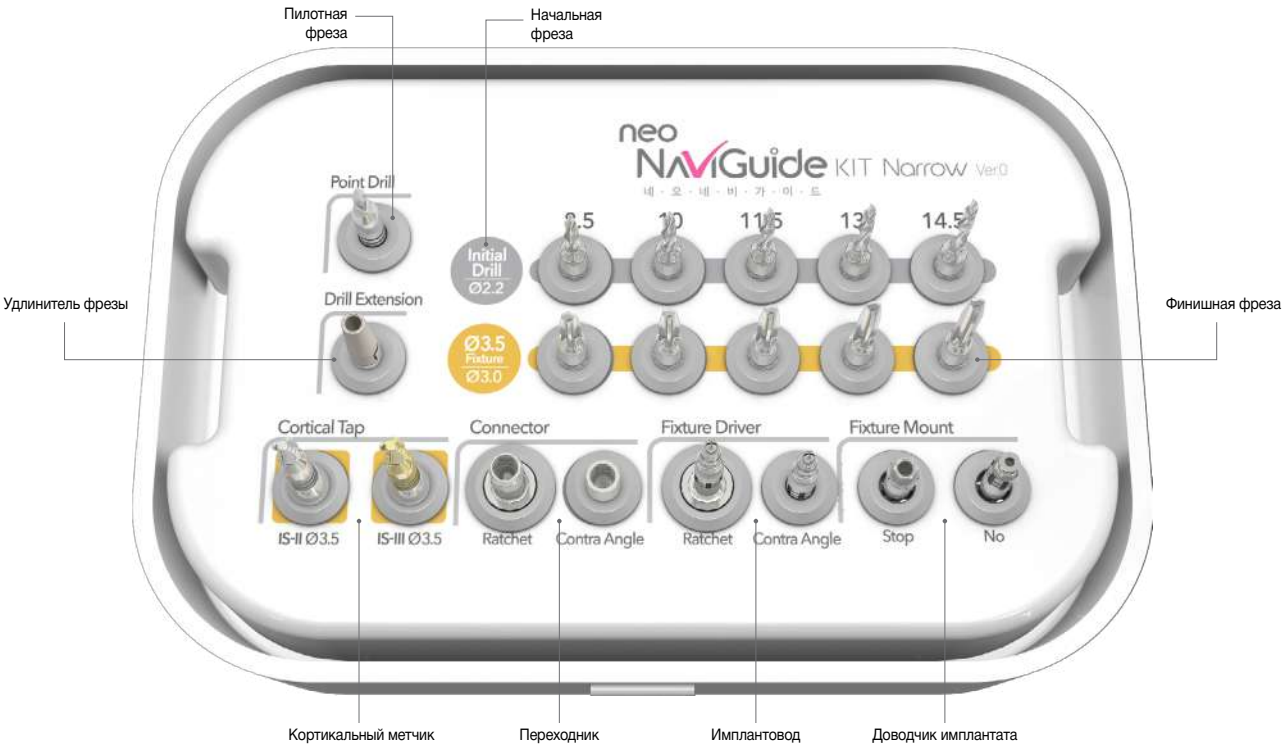


Артикул NEONGKIT

• Руководство по длине фрезы

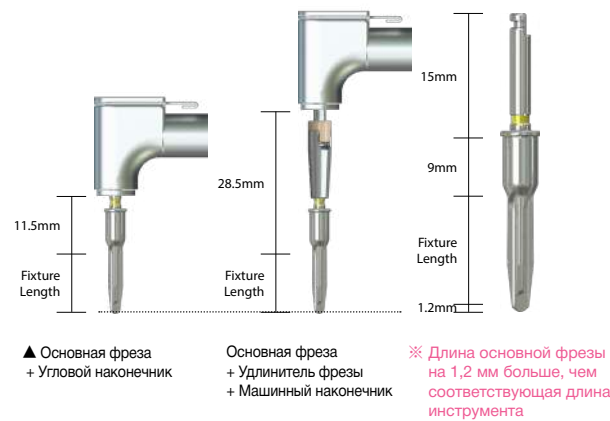


• Рекомендации по смещению втулки

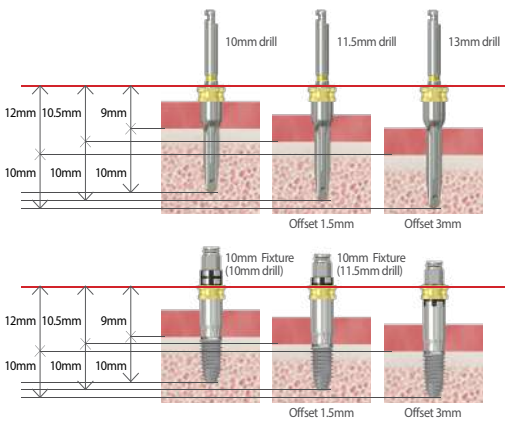


Neo NaviGuide Narrow Kit

• Пилотная фреза

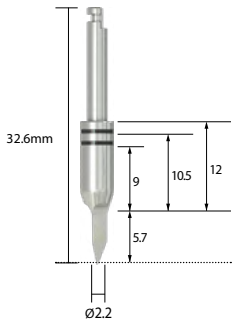


Диаметр	Артикул
Ø2.2	NGPD22N

• Ø2.2 Начальная фреза

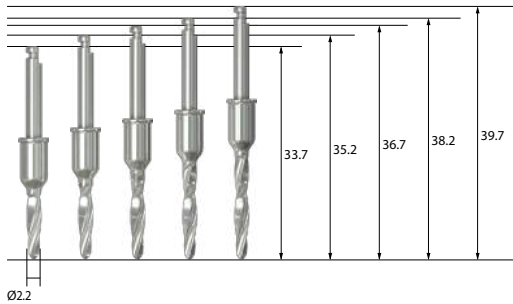

Диаметр	Длина	Артикул
Ø2.2	8.5	NGTWD2208N
Ø2.2	10	NGTWD2210N
Ø2.2	11.5	NGTWD2211N
Ø2.2	13	NGTWD2213N
Ø2.2	14.5	NGTWD2214N

• Ø3.0 Финишная фреза

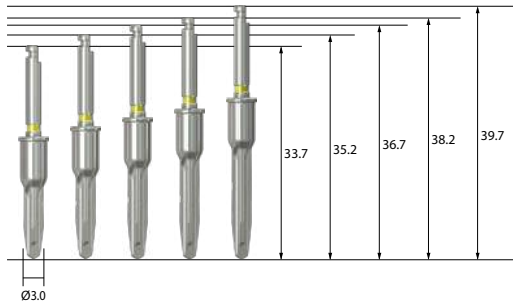

Диаметр	Длина	Артикул
Ø3.0	8.5	NGTD3008N
Ø3.0	10	NGTD3010N
Ø3.0	11.5	NGTD3011N
Ø3.0	13	NGTD3013N
Ø3.0	14.5	NGTD3014N

• Кортикальный метчик



Тип	Артикул
IS-II	NGISCT35N
IS-III	NGISCT35NS

Neo NaviGuide Narrow Kit

• Fixture Mount



Тип	Артикул
Стоппер	SGISFAN




Тип	Артикул
Без стоппера	NGISFDCAN

• Имплантовод



Тип	Артикул
Ключ	NGISFDRN

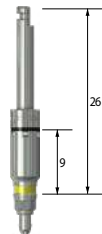

Тип	Артикул
Угловой наконечник	NGISFDCAN

• Переходник



Тип	Артикул
Ключ	SGRC10



Тип	Артикул
Угловой наконечник	SGCAC00

• Удлинитель фрезы



Артикул	DE01
---------	------

Дополнительно


• Втулка для хирургического шаблона



Тип	Артикул
Narrow	SGS55N

Подходят для установки имплантов не более 3.5 мм (для навигационного набора Narrow kit). Наружный диаметр Ø5.5 мм

• Аналог импланта

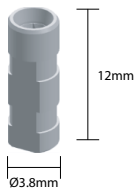


Артикул	SGISLA400
---------	-----------

Narrow kit, имплантанты Ø3.5 мм


Protocol of sequential use of navigational drill set NEO NaviGuide Narrow kit

Pilot drill, start drill: 1200 rpm / 35~45 Ncm
 • Finish drill: 50~100 rpm, optionally up to 1200 rpm / 35~45 Ncm
 • Cortical marker: 50 rpm / 50 Ncm


• IS-II active implant Ø3.5 X 8.5mm / sleeve offset (offset) 0 mm (bone D1/D2)

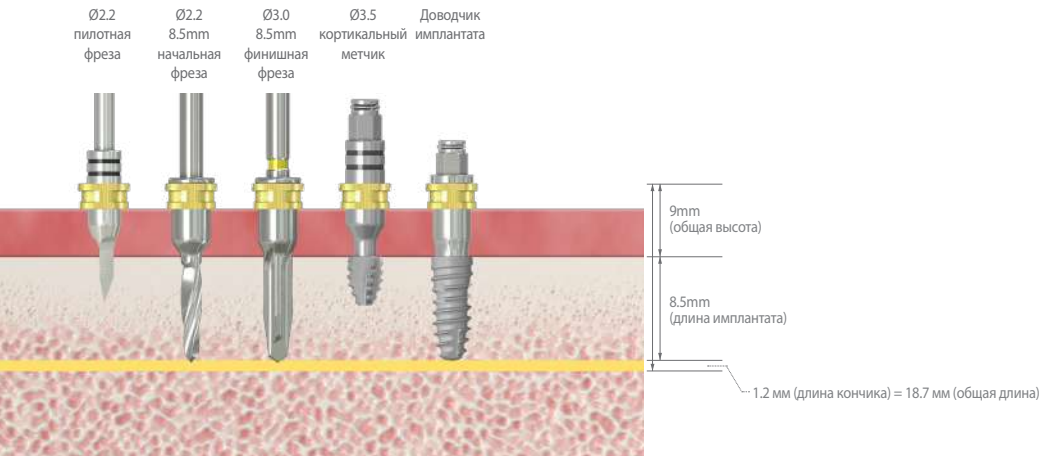

• IS-II active implant Ø3.5 X 10.0mm / sleeve offset (offset) 0 mm (bone D1/D2)

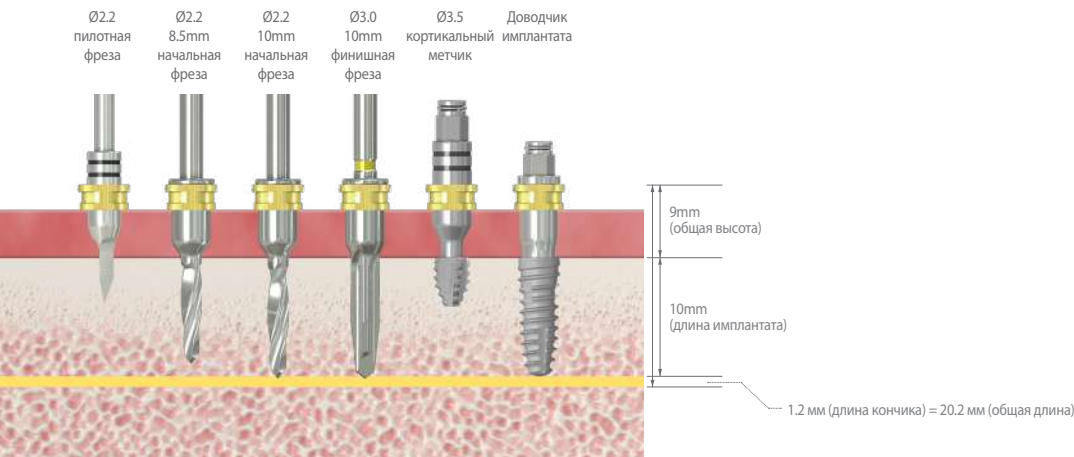


• IS-II active implant Ø3.5 X 11.5mm / sleeve offset (offset) 0 mm (bone D1/D2)

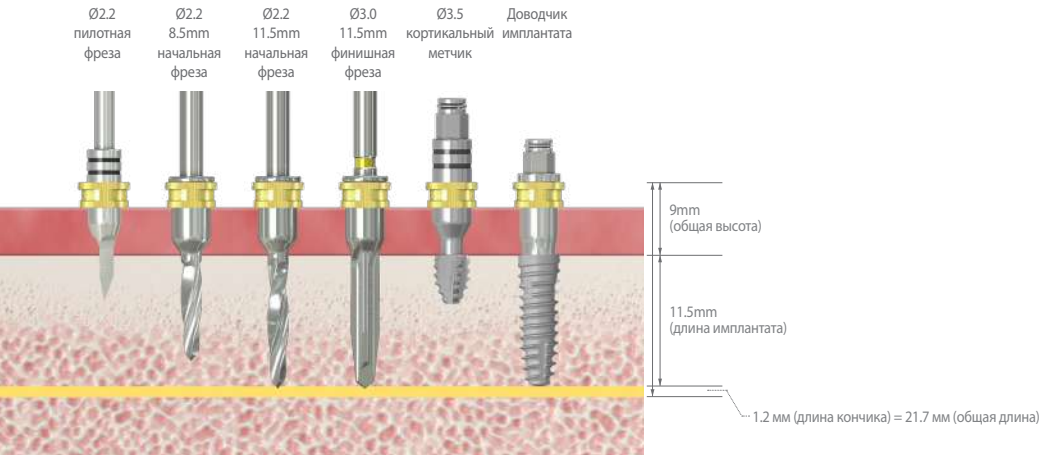


Protocol of sequential use of navigational drill set NEO NaviGuide Narrow kit


• IS-II active implant Ø3.5 X 13mm / sleeve offset (offset) 0 mm (bone D1/D2)

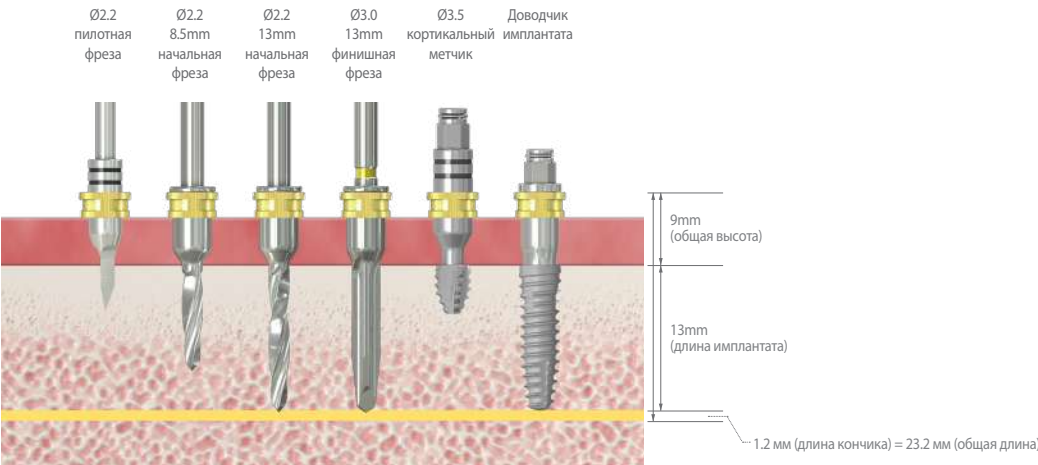

• IS-II active implant Ø3.5 X 13mm / sleeve offset (offset) 1.5 mm (bone D1/D2)

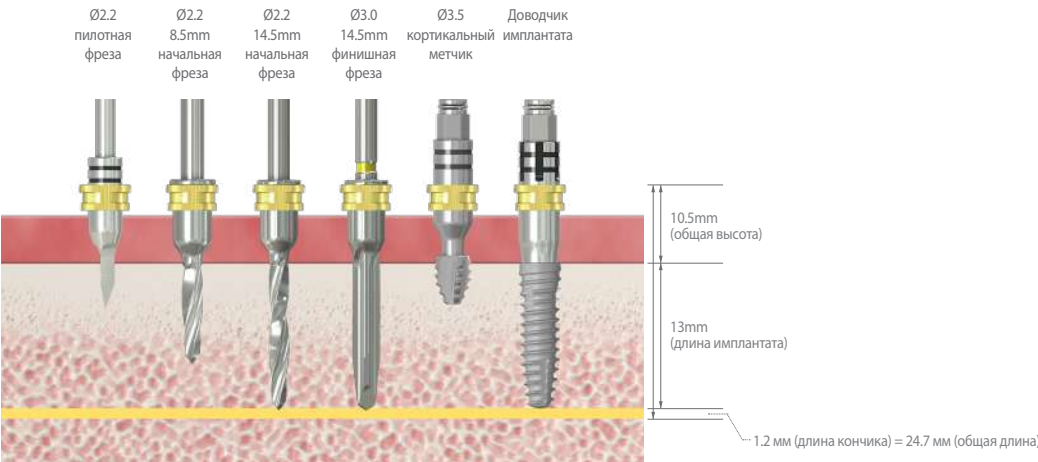

Набор Neo Surgical Accessory Kit

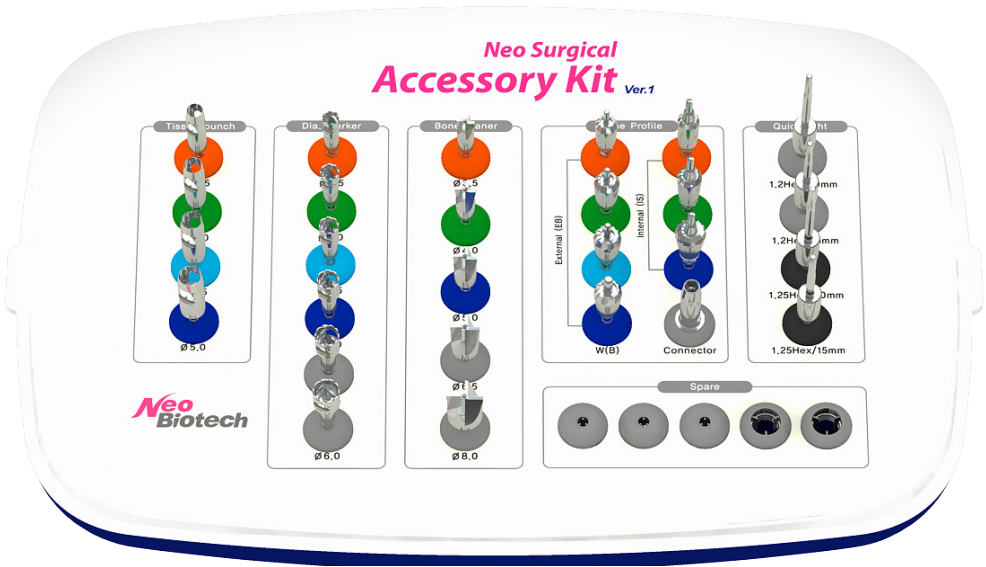

• Мукотом




Диаметр	Артикул
Ø3.5	TP35
Ø4.0	TP40
Ø4.5	TP45
Ø5.0	TP50




Используется для иссечения мягких тканей, скорость 1000 об/мин

• Маркер диаметра

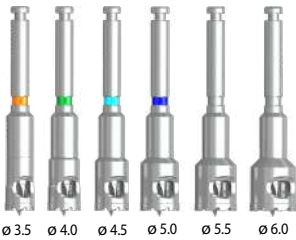


Диаметр	Артикул
Ø3.5	DM35
Ø4.0	DM40
Ø4.5	DM45
Ø5.0	DM50
Ø5.5	DM55
Ø6.0	DM60

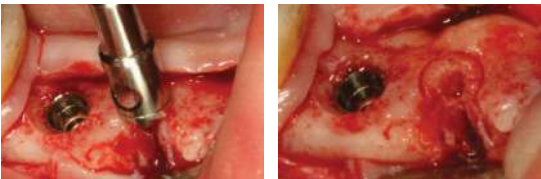

Используется для выбора положения и отметки нужного диаметра имплантата, скорость 1200 об/мин

Набор Neo Surgical Accessory Kit

• Планировщик кости

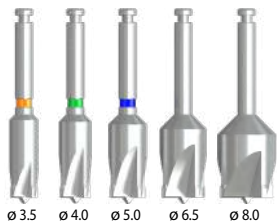


Диаметр	Артикул
Ø3.5	BP35
Ø4.0	BP40
Ø5.0	BP50
Ø6.5	BP65
Ø8.0	BP80



Испльзуется для выравнивания кортикальной кости перед установкой импланта, скорость 1200 об/мин

• Профилировщик кости

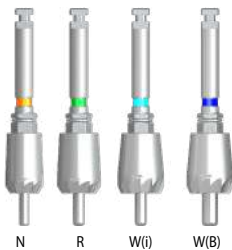

External(EB) для наружного шестигранника

Тип	Артикул
N	BPN40
R	BPR50
W(i)	BPI60
W(B)	BPB60




Используется после приживления имплантата перед установкой формирователя десны или абатмента. Скорость 50 об/мин



Internal(IS) для конусного соединения

Диаметр	Артикул
Ø4.8	ISBP48
Ø5.5	ISBP55
Ø6.0	ISBP60

• Ключ "Quick tight"

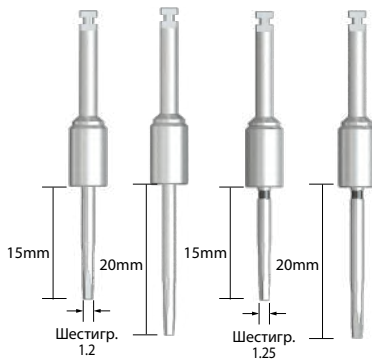


Шестигр.	Длина	Артикул
1.2	15mm	QTN1215
	20mm	QTN1220*
1.25	15mm	QTN12515
	20mm	QTN12520*

* Optional



Используется для устанки винтов(заглушка, формирователь десны, винт абатмента) с помощью машинного наконечника, Скорость 500-1000 об/мин без усилия (1-2 Нсм)


Ridge Wider Kit

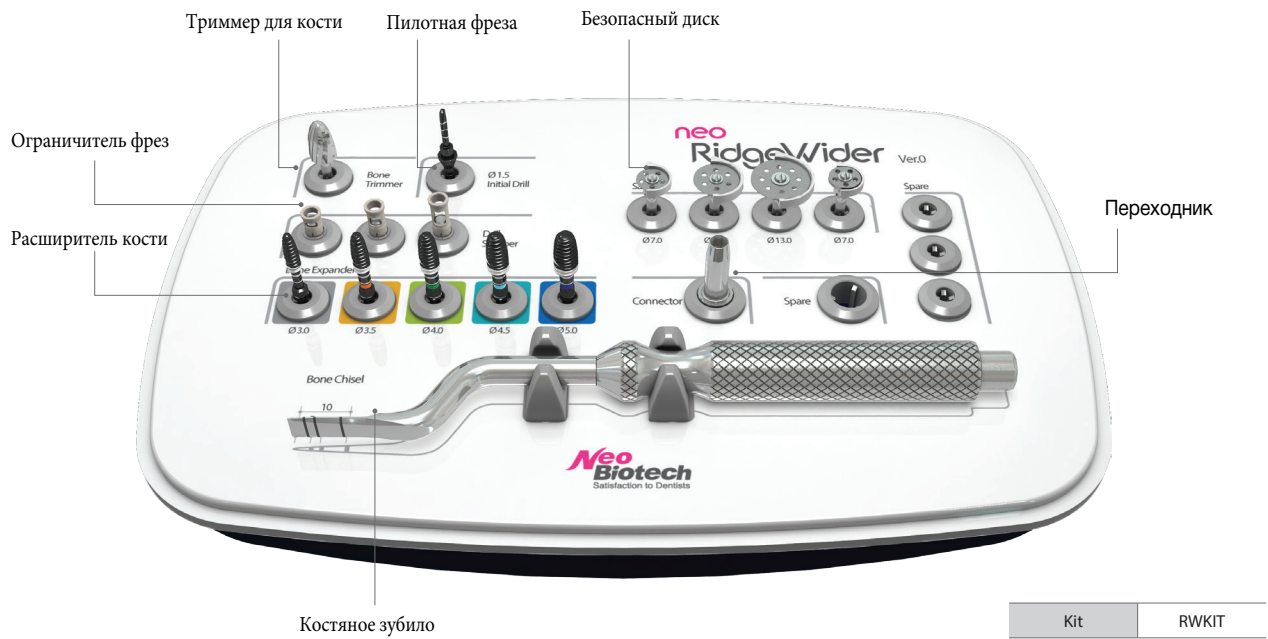


• Триммер для кости




• Ограничитель фрез

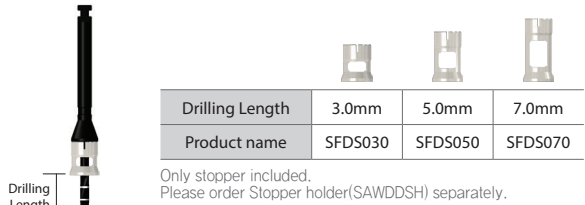

• Пилотная фреза

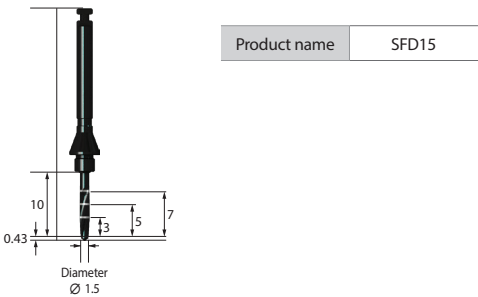


• Безопасный диск (Non-Saw Type)

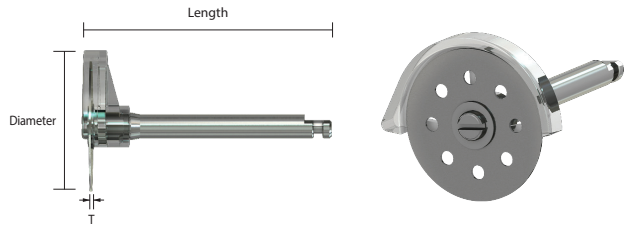

Diameter	Length	T	Product name
Ø7.0	24.8mm	0.35T	SAWD0703N
Ø7.0	25.75mm	1.0T	SAWD0710N
Ø10.0	24.8mm	0.35T	SAWD1003N
Ø13.0	24.8mm	0.35T	SAWD1303N


• Безопасный диск (Saw Type) - Optional

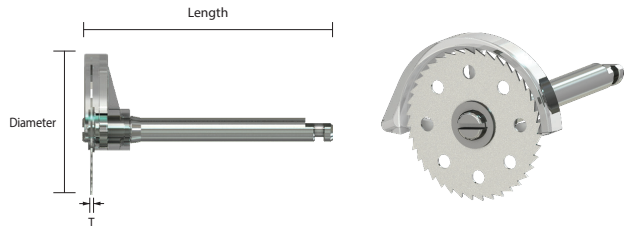

Diameter	Length	T	Product name
Ø7.0	24.8mm	0.28T	SAWD0703S*
Ø7.0	25.75mm	1.0T	SAWD0710S*
Ø10.0	24.8mm	0.28T	SAWD1003S*
Ø13.0	24.8mm	0.28T	SAWD1303S*


* Not Included. Separately Purchasable.

• Расширитель кости

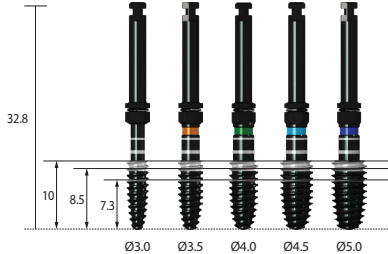

Diameter	Product name
Ø3.0	BEXP30
Ø3.5	BEXP35
Ø4.0	BEXP40
Ø4.5	BEXP45
Ø5.0	BEXP50

• Костяное зубило

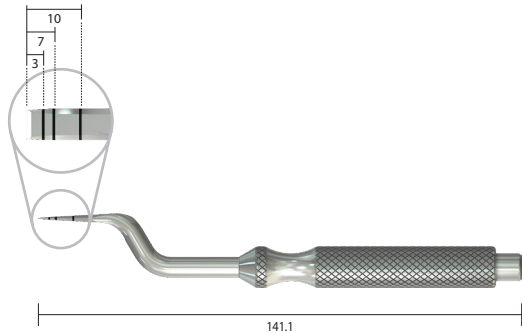

Length	Product name
141.1mm	BCHI60


Ridge Wider Kit



САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ И УДОБНЫЙ НАБОР!

Набор SCA Neobiotech для закрытого синус-лифтинга

(крестальный синус-лифтинг)

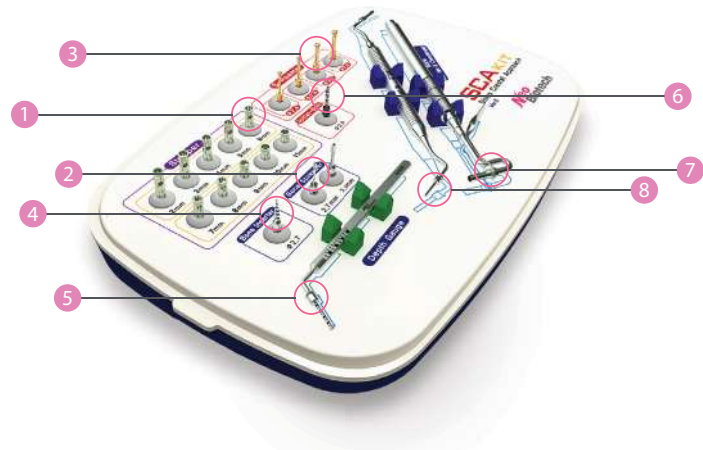

2. БЫСТРОТА

За счет особой конструкции сверла ример формирует тонкий костный диск-прослойку между своей рабочей поверхностью и слизистой пазухи, что полностью предотвращает повреждение слизистой оболочки.

3. ЭРГОНОМИКА

Облегчает работу у врача и позволяет легко работать специалистам с разным уровнем мануальных навыков в работе.

Высокая скорость сверления с постоянным орошением позволяет быстро и безопасно сформировать ложе для имплантата, предотвращая повреждение слизистой оболочки.


Характеристики инструментов:

- 1. Стоппер-ограничитель.** Предотвращает S-ример, предотвращая вращения перфорирования слизистой оболочки пазухи при формировании ложа имплантата.
- 2. Костный спредер.** Инструмент для горизонтального распределения графта внутри пазухи через сформированное ложе имплантата. Скорость вращения спредера 80 об/мин.
- 3. S-ример.** Основное сверло набора SCA. Предназначено для перфорирования кортикальной пластинки верхней челюстной пазухи без формирования слизистой оболочки. Скорость вращения 1200 об/мин.
- 4. Спиралевидное сверло для продвижения графта.** Применяется для безопасного продвижения графта через ложе имплантата сформированный объем внутри пазухи. Скорость вращения 80 об/мин.
- 5. Щуп-глубиномер.** Измерительный инструмент для определения высоты осевой костной после проникновения через костную границу пазухи.
- 6. Пилотное сверло.** Предназначено для первичного сверления до костной границы пазухи. Скорость вращения 1200 об/мин.
- 7. Инструмент для внесения графта.** Используется для первичного внесения графта в сформированное ложе, одновременно вносимого материала 0,05 см³.
- 8. Уплотнитель кости.** Используется для вертикального продвижения графта в сформированное ложе.



Формирование латерального доступа к верхнечелюстной пазухе всего за 1 минуту!

Набор для открытого (латерального) синус-лифтинга SLA-Neobiotech

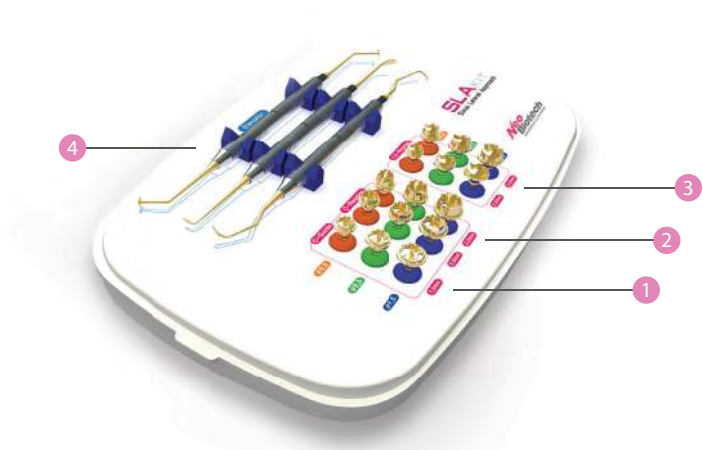

1. БЕЗОПАСНОСТЬ

Можно избежать беспокойства о повреждении мембраны или избыточной кровоточивости.

2. СКОРОСТЬ


Возможность создать латеральный доступ за 1 минуту.

3. ПРОСТОТА

Создание доступа за один подход. При необходимости создать отверстие большего диаметра, чем ример, возможность создать несколько последовательных окон.

Характеристики инструментов:

- 1. C-guide (латеральный перфоратор костной пластинки).** Небольшой для быстрого (перфорации) кортикальной пластинки в челюстную пазуху для предотвращения соскальзывания римера.
- 2. C-ример.** Небольшой для создания латерального окна, операция открытого синус-лифтинга с возможностью получения костного блока соответствующего диаметра и толщины всего за 1 минуту. Скорость вращения 2000 об/мин.
- 3. LS-ример.** Особая, травматичная форма сверла способствует его заполнению костной тканью, что защищает мембрану от повреждения. Использовать с обильным орошением. Формирует тонкий костный диск Residual Bone Shield на поверхности мембраны. Скорость вращения 2000 об/мин.
- 4. Зажимы-элеватора.**
 - 1. Для подтяжки мембраны в мезио-дистальной области.
 - 2. 3. Для отслаивания мембраны в дистальной и нижней области сформированного окна.

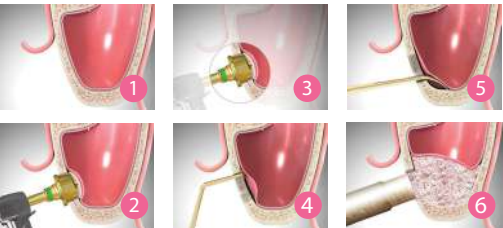

Neobiotech Co.,Ltd

70, Sinpyeong-ro, Jijeong-myeon, Wonju-si,
Gangwon-do, 26351, Republic of Korea
Tel +82 33-742-2885, Fax +82 33-742-2887

Made in Korea



ООО "Имплантат Групп" -эксклюзивный дистрибьютор
NeoBiotech в Беларуси.

+375 29 654 33 77

+375 29 654 33 66

NeoBiotech.by

